

GEBRAUCHSANWEISUNG

BETRIEB, FAHREN UND SICHERHEIT

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch Ihres Eloflex dieses Dokument,
um sicherzustellen, dass Sie ihn auf eine Weise verwenden, die sicher ist und Ihnen, Ihrer
Umwelt oder Ihrem Scooter nicht schadet.

Eloflex S1



strack

EL&FLEX

Vielen Dank und viel Glück!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Eloflex als Ihren Elektro-Scooter entschieden haben. Das bedeutet uns sehr viel, denn wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Alltag der Menschen ein wenig zu erleichtern und Menschen mit eingeschränkter Mobilität mehr Freiheit zu ermöglichen. Wir hoffen, dass Sie beides mit Hilfe Ihres Eloflex erleben.

Wir glauben, dass Sie viel Freude an Ihrem neuen Scooter haben werden. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Pflege. Wir empfehlen Ihnen, diese gesamte Dokumentation durchzulesen, bevor Sie Ihren Eloflex zum ersten Mal verwenden. Wir empfehlen Ihnen außerdem, den Betrieb Ihres Eloflex auf einer abgelegenen, offenen und ebenen Fläche zu trainieren, bevor Sie ihn in anderen Umgebungen verwenden.

Der Eloflex-Scooter ist für Benutzer mit vielen verschiedenen Bedürfnissen konzipiert. Die Entscheidung, ob der Eloflex für den Benutzer geeignet ist, wird immer von Koordinator oder Händler zusammen mit dem Benutzer selbst getroffen. Eloflex übernimmt keine Verantwortung für Fälle, in denen der Scooter sich für die Bedürfnisse des Benutzers nicht eignet.

Ein Eloflex sollte in erster Linie in seiner Standardausführung verwendet werden. Wenn der Scooter angepasst oder in irgendeiner Weise verändert werden muss, darf dies nur von Ihrem Kundendienst oder von Eloflex durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass Schäden und Störungen, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder durch mangelhafte Wartung entstehen, nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Viel Glück und viel Spaß mit Ihrem Eloflex.

Fahren Sie vorsichtig

ELOFLEX

Inhalt	Seite
Verwendungszweck	3
Aufklappen	4
Sitzlänge und Sitzhöhe einstellen	5
Armlehnen anheben	6
Kippsicherung	6
Manuelles Fahren	6
Fernbedienung	7
Beleuchtung	7
Ladeanweisungen	7
Steuerung	8
Sitzbreite ändern	9
Transport und Aufbewahrung	9
Fehlercodes	10
Sicherheit beim Fahren	11
Allgemeine Sicherheitsinformationen	13
Technische Informationen	15
Kontakt	16

Verwendungszweck

Typenklassifizierung und Verwendungszweck

Eloflex-Elektro-Scooter wurden für Personen entwickelt, die Schwierigkeiten beim Gehen haben oder gar nicht gehen können, jedoch über ausreichende Seh-, Körper- und geistige Fähigkeiten verfügen, um einen Scooter zu steuern.

Der Eloflex-Scooter ist für den Außenbereich konzipiert, aber auch für den Gebrauch im Innenbereich kompakt und flexibel genug. Das Kapitel „Technische Daten“ am Ende dieses Dokuments enthält Informationen über Geschwindigkeit, Wendekreis, Reichweite, maximale Tragfähigkeit und maximales Gewicht des Benutzers usw. Wir empfehlen Ihnen, alle Sicherheitsinformationen im Kapitel „Sicherheit“ in diesem Dokument zu lesen.

Der Eloflex ist geprüft und zugelassen nach EN12184: 2014 - Klasse B (Indoor- und Outdoor-Gebrauch). Der Eloflex ist auch nach ISO-7176, IEC60601 zugelassen und die Akkus sind nach UN38.3 zugelassen.

Eloflex-Elektro-Scooter erfüllen die geltenden Anforderungen der MDR 2017/745.

Die Konformitätsbewertung/CE-Kennzeichnung der Klasse 1 wurde gemäß Anhang VIII Kapitel III der MDR 2017/745 ausgestellt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang II und Anhang III der MDR 2017/745. Die CE-Kennzeichnung gilt nicht mehr, wenn Sie Ersatzkomponenten oder Zubehör verwenden, die für dieses Produkt nicht zugelassen sind.

Anforderungen

Der Zweck eines Eloflex-Scooters ist es, eine Verletzung oder Behinderung auszugleichen, weshalb er für die folgenden Umstände empfohlen wird:

- Der Benutzer kann gar nicht oder nur sehr eingeschränkt gehen, was es schwierig macht, sich in den eigenen vier Wänden zu bewegen.
- Wenn es erforderlich ist, das Haus zu verlassen, um an Orte zu gelangen, die üblicherweise besucht werden, um alltägliche Angelegenheiten zu erledigen oder um einfach nur nach draußen zu kommen.
- Wenn der Benutzer aufgrund seiner eingeschränkten Mobilität Schwierigkeiten hat, einen Arbeitsplatz oder Aktivitäten zu erreichen oder Arbeiten/Aktivitäten auszuführen. Es wird empfohlen, den Eloflex-Scooter drinnen und draußen zu verwenden, wenn die Nutzung von handbetriebenen Rollstühlen aufgrund der eingeschränkten Mobilität nicht möglich ist, jedoch die ordnungsgemäße Handhabung eines Scooters gegeben ist.

Zubehör

Es sind Ladegeräte und eine Tasche mit einfacheren Werkzeugen erhältlich, die sich bei der Lieferung in der Aufbewahrungstasche unter dem Sitz befinden.

Funktionstüchtigkeit

Verwenden Sie den Eloflex-Scooter nur, wenn er voll funktionstüchtig ist. Ansonsten bringen Sie sich und andere in Gefahr. Die folgende Liste umfasst nicht alle möglichen Situationen. Es werden nur bestimmte Situationen beschrieben, die die Funktionstüchtigkeit des Scooters beeinträchtigen können.

- Benutzen Sie den Scooter nicht, wenn die Akkus defekt oder verformt sind.
- Benutzen Sie den Scooter nicht, wenn der Motor ruckelt oder ungewöhnliche Geräusche macht.
- Benutzen Sie den Scooter nicht, wenn die Bremsfunktion nicht in Ordnung zu sein scheint.
- Wenn Ihre Reifen abgenutzt sind, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst oder Ihren Händler.
- Wenn Sie Schäden am Sicherheitsgurt, an der Armlehne, am Sitz, an der Rückenlehne, am Lenker oder an anderen Teilen des Scooters feststellen, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst oder Ihren Händler.
- Wenn Sie Schäden an der Elektrik (Kabel, Akkus, Ladegeräte usw.) feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst oder Ihren Händler.

Garantie

Sie haben immer zwei Jahre Garantie auf Ihren Eloflex-Scooter. Die Garantiebedingungen entsprechen den geltenden nationalen und allgemeinen Geschäftsbedingungen und Regeln

und Verordnungen. Die detaillierten Garantiebedingungen können auf www.eloflex.eu heruntergeladen werden. Beachten Sie, dass Sie den Originalkarton für Ihren Eloflex während der Garantiezeit aufbewahren sollten (der Karton kann zusammengeklappt und beiseitegelegt werden).

Lebensdauer

Die geschätzte Lebensdauer eines Eloflex beträgt 5 Jahre. Die Lebensdauer des Produkts wird jedoch weitgehend davon beeinflusst, wie es verwendet und gehandhabt wird. Ein Eloflex kann eine viel längere Lebensdauer haben, wenn Sie ihn gut pflegen und nur in Übereinstimmung mit den Informationen in diesem Dokument verwenden.

Sicherheitsvorschriften und Risiken

BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE AB SEITE 11, BEVOR SIE IHREN ELOFLEX VERWENDEN.



Auseinander-/Zusammenklappen

Auseinanderklappen

Schritt 1

Legen Sie den zusammengeklappten Scooter wie rechts abgebildet auf den Boden. Klappen Sie den Lenker hoch, indem Sie ihn nach oben und nach vorne anheben. Verriegeln Sie dann den Lenker mit Hilfe der Klemme, die sich im Scharnier an der Unterseite des Lenkers befindet. Um die Klemme zu sichern, drehen Sie die schwarze Kunststoffsicke über die Klemme.




Schritt 2

Greifen Sie die Rückenlehne und ziehen Sie sie nach oben, um den Stuhl zu öffnen. Halten Sie mit einer Hand den Lenker fest.



Schritt 3

Schließen Sie den Verriegelungshaken auf der Rückseite des Scooters – das ist sehr wichtig! Vergewissern Sie sich, dass der Verriegelungshaken einrastet.

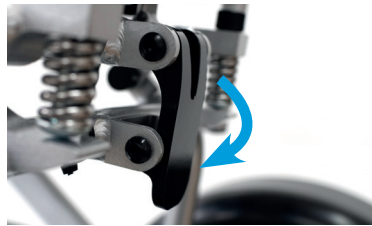

Es ist sehr wichtig, dass Sie den Verriegelungshaken schließen, bevor Sie den Scooter benutzen.

Zusammenklappen

Schritt 1

Öffnen Sie den Verriegelungshaken wie im Bild rechts gezeigt.



Schritt 2

Legen Sie eine Hand auf die Vorderkante des Lenkers. Greifen Sie mit der anderen Hand die Oberkante der Rückenlehne und klappen Sie sie nach vorne. Klappen Sie den Scooter gemäß den Bildern auf der rechten Seite zusammen.



Schritt 3

Öffnen Sie die Verriegelungsklemme an der Unterseite des Lenkers, indem Sie den Sicherheitshaken abdrehen und den Haken öffnen. Klappen Sie dann den Lenker herunter und legen Sie ihn auf den umgeklappten Sitz.



Sitzlänge und Sitzhöhe einstellen

Sitzlänge vergrößern

Stellen Sie sicher, dass sich der Scooter in der Fahrposition befindet und eingeschaltet ist. Halten Sie den Pfeil nach oben gedrückt, um den Scooter zu erweitern.



Sitzlänge verkürzen

Stellen Sie sicher, dass sich der Scooter in der Fahrposition befindet und eingeschaltet ist. Halten Sie den Pfeil nach unten gedrückt, um den Abstand zwischen Sitz und Lenker zu verringern.



Sitzhöhe einstellen

Entfernen Sie das Sitzpolster des Scooters. Ziehen Sie das schwarze Kabel unter die Vorderkante des Sitzes. Gleichzeitig mit dem Halten des Drahtes in der gespannten Position kann nun die hintere Kante des Sitzes in die gewünschte Position gebracht werden (drei verschiedene Positionen). Wenn sich der Sitz in der gewünschten Position befindet, wird die Vorderkante des Sitzes auf gleicher Höhe wie die Hinterkante platziert. Lösen Sie das Kabel, um den Sitz in dem Loch zu verriegeln, das sich auf gleicher Höhe wie die hintere Kante befindet.



Armlehnen anheben

Um die Armlehnen nach oben und unten anzuheben, lösen Sie zunächst die Verriegelung, indem Sie den Verriegelungshebel um eine halbe Umdrehung drehen. Heben Sie dann die Armlehnen an.



Wichtig ist, dass Sie die Armlehnen beim Zusammenklappen arretieren, indem Sie den Verriegelungshebel um eine halbe Umdrehung nach hinten drehen.



OFFEN



VERRIEGELT

Kippsicherung

Die Kippsicherungen haben zwei Positionen. Eine für die Fahrposition und eine für den Fall, dass der Scooter in einer stehenden Position aufbewahrt wird. Sie können die Position durch manuelles Verstellen der Kippsicherungen einfach ändern.

HINWEIS! Die Kippsicherung muss sich beim Gebrauch des Scooters immer in ihrer Fahrposition (wie auf dem Bild) befinden.



Manuelles Fahren

Schalten Sie den Scooter aus. Drücken Sie dann die roten Hebel an den Motoren (siehe Bild), um die Magnetbremsen zu lösen. In dieser Position kann der Scooter manuell gerollt werden.

HINWEIS! Wenn der Scooter im ausgeschalteten Zustand bewegt wird, muss die Magnetbremse immer ausgeschaltet sein.



WICHTIG!

Treten Sie NIEMALS mit dem Fuß auf die roten Hebel. Benutzen Sie nur Ihre Hände.

Fernbedienung

Ihr Eloflex-Scooter wird mit einer Fernbedienungssteuerung geliefert. Mit der Fernbedienung können Sie Ihren Scooter ver- und entriegeln. Wenn sich der Scooter in der verriegelten Position befindet, ist es nicht möglich, ihn zu fahren.



Beleuchtung

Ihr Eloflex-Scooter verfügt über eine Front- und Rückbeleuchtung für mehr Sicherheit. Um das Licht einzuschalten, tippen Sie auf das Lichtsymbol auf der linken Seite des Lenkers. Außerdem gibt es Bremslichter und Blinker. Den Blinker benutzen Sie mit den beiden Pfeilen auf der linken Seite des Lenkers. Das Bremslicht wird aktiviert, wenn der Scooter steht, wenn Sie den Gasgriff loslassen und wenn Sie mit dem Bremsknopf bremsen.



Ladeanweisungen

So laden Sie auf

Schalten Sie zunächst Ihren Eloflex aus. Schließen Sie das Ladegerät an die Buchse an der Vorderseite des Lenkers an. Stellen Sie sicher, dass die Position der Kontakte zueinander passt. Stecken Sie dann das Netzkabel des Ladegeräts in eine Steckdose. Der Ladevorgang wird durch eine Leuchtanzeige am Ladegerät angezeigt. Eine rote Anzeige bedeutet, dass der Ladevorgang läuft. Nach etwa drei Stunden sind die Akkus zu 90 Prozent geladen. Der Scooter kann nun wieder genutzt werden. Nach ca. 5-8 Stunden leuchtet die Anzeige am Ladegerät grün und die Akkus sind vollständig geladen. Während des Ladevorgangs wird das Ladegerät warm. Das ist normal. Für eine maximale Akkulaufzeit sollte der Ladevorgang etwa fünf Stunden lang



erfolgen, wenn die Akkuanzeige auf ein Drittel gesunken ist. Die Akkus werden durch Wartungsladungen nicht beschädigt, aber für eine maximale Lebensdauer des Akkus empfehlen wir Ihnen, das Ladegerät zu trennen, wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind. Das Aufladen der Akkus kann bei bis zu -10 Grad erfolgen. Beim



WICHTIG!

Schließen Sie das Ladegerät NIEMALS direkt an den Akku an.

Laden bei niedrigeren Temperaturen werden die Akkus nicht vollständig aufgeladen. Wenn Ihr Eloflex bei Minusgraden verwendet wird, wirkt sich dies auf die Fahrleistung aus. So kann sich beispielsweise bei -10 Grad die Fahrleistung um bis zu 50 % verringern.

Steuerung

Schneller fahren

Ein- und Ausschalten

Langsamer fahren



Sitzlänge vergrößern

Neutrale Sitzlänge

Sitzlänge verkürzen

Beleuchtung

Blinker links

Bremse



Blinker rechts

Hupe

Informationsdisplay: Das Display am Scooter verfügt über 2 verschiedene Anzeigemodi, einer zeigt aktuelle Informationen über Geschwindigkeit, Gangwahl, Scheinwerfer und Blinker an. Der andere Anzeigemodus leuchtet bei einer Störung am Scooter auf. Dort werden der aktuelle Fehlercode, die Akkuspannung und der aktuelle Gang angezeigt

Rückwärts

Beschleunigung



Akku-Steuerung: Diese gibt an, wie viel Strom sich noch in den Akkus befindet. Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, leuchten alle Lichter. Wenn sich die Akkus entladen, erlöschen die Lichter nacheinander. Laden Sie auf, wenn zwei Drittel der Lichter erloschen sind.

Fahr-anweisungen

Starten

Wenn Sie den Scooter starten (Ein- und Ausschalter), befindet er sich im Parkmodus. Drücken Sie dann den roten Bremsknopf und dann können Sie mit dem grauen Beschleunigungsknopf losfahren.


Rückwärtsfahren

Sie drücken den grauen Knopf unter der Akkukontrollanzeige, um in den Rückwärtsmodus zu wechseln. Ein Piepton ertönt, wenn der Rückwärtsmodus eingeschaltet ist (Sie sehen auch auf dem Display des Scooters, welcher Fahrmodus eingeschaltet ist). Sie fahren dann rückwärts, indem Sie die Beschleunigungstaste drücken. Wenn Sie wieder vorwärtsfahren möchten, klicken Sie erneut auf den grauen Knopf, um wieder in den Fahrmodus zu wechseln.

Ändern der Sitzbreite

Sie können die Sitzbreite vergrößern, indem Sie die Armlehnen mithilfe des Verbreiterungssets herauschieben.

Sie können wählen, ob Sie die Sitzbreite um 5 oder 10 cm vergrößern möchten.

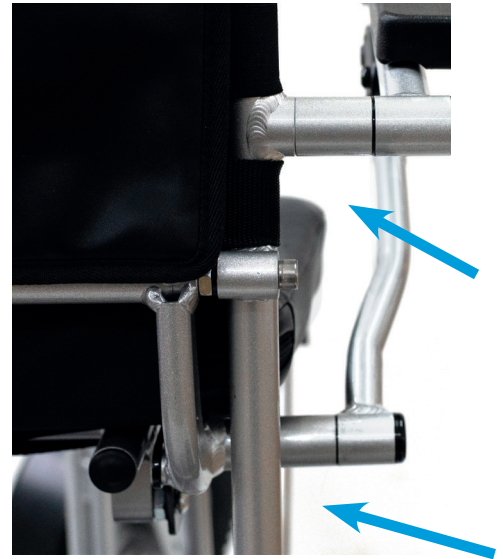

Schritt 1

Lösen Sie beidseitig die Armlehnen, indem Sie die beiden Halterungen abschrauben.



Schritt 2

Bringen Sie die Verbreiterungshülse zwischen Stuhl und Armlehne an. Die Armlehnen wieder montieren.

Bestellen Sie das Verbreiterungsset bei dem Händler, bei dem Sie Ihren Scooter gekauft haben.

Transport und Aufbewahrung

- Ein zusammengeklappter Scooter kann im Gepäckraum eines größeren Autos verstaut werden. Benutzen Sie eine Rampe, um den Scooter ins Auto zu befördern.
- Ein zusammengeklappter Scooter kann wie auf dem Bild rechts aufrecht stehen, um weniger Platz einzunehmen.
- Wenn der Scooter eine Weile nicht benutzt werden soll, empfehlen wir, den Akku vollständig aufzuladen, bevor Sie den Scooter wegstellen.
- Der Scooter sollte drinnen in frostfreien, trockenen und belüfteten Räumen gelagert werden. Empfohlen wird eine Aufbewahrungstemperatur von 0-30 Grad.
- Beim Transport mit dem Bus oder mit dem Behindertentransport muss der Eloflex an den unten gezeigten Befestigungspunkten befestigt werden. Beachten Sie, dass Eloflex nicht als Autositz getestet wurde. Wir empfehlen dem Benutzer daher immer, sich auf die Autositzplätze zu begeben.

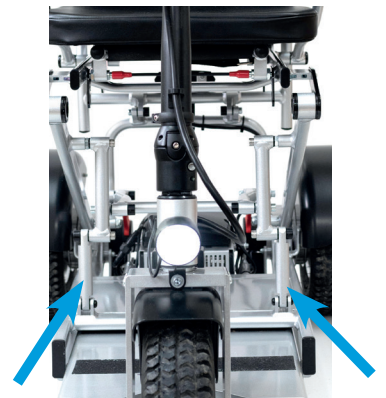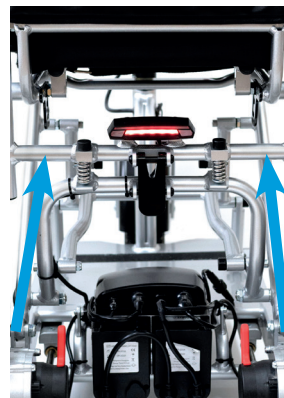

Fehlercodes

Fehlercodes, die auf dem Display angezeigt werden könne

FEHLERCODE	URSACHE	FEHLER BEHEBEN
Magnetventil-Störung links/rechts	1. Die Magnetbremse des linken/rechten Motors ist geöffnet. 2. Anschlussfehler an der linken Motor-Magnetbremse. 3. Die Magnetbremse des linken Motors ist defekt oder die Steuereinheit ist beschädigt.	1. Schließen Sie die Magnetbremse, indem Sie den roten Hebel in die geschlossene Position ziehen. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Motorstecker richtig angeschlossen ist. 3. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung zu erhalten.
Links/Rechts Überstrom	1. Überspannung durch zu viel Widerstand. 2. Störung des Motors oder der Steuereinheit.	1. Das System wird zurückgesetzt, wenn der Widerstand weg ist. 2. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
Beschleunigung nicht Null	1. Der Gasgriff befindet sich nicht in der „Leerlaufstellung“, wenn der Stuhl einen Anlaufest durchführt. 2. Störung der Steuereinheit.	1. Lösen Sie den Gasgriff und starten Sie den Scooter neu. 2. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung zu erhalten.
Beschleunigungs	Störung am Gasgriff oder an der Steuereinheit.	Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung zu erhalten.
MController wird nicht unterstützt	Fehler in der Steuereinheit oder falscher Typ der Steuereinheit.	Steuereinheit wechseln.
Com-Fehler Dis zu MC	1. Lose oder falsch installierte Anschlüsse. 2. Störung der Steuereinheit.	1. Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse ordnungsgemäß installiert wurden. 2. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung zu erhalten.
Fehler des linken/rechten Antriebs	Störung der Steuereinheit.	Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung zu erhalten.
Störung am Schubstangenmechanismus	Kurzschluss im Längeneinstellungsmotor, defekter Längeneinstellungsmotor oder Fehler in der Steuereinheit.	Überprüfen Sie die Verbindung zum Längeneinstellungsmotor oder wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung zu erhalten.
Akkuvolumen zu hoch	Falscher Akkutyp oder defekter Akku.	Tauschen Sie den 24-V-Akku aus.
Akkuvolumen zu niedrig	Der Akku ist alt oder unaufgeladen.	Akku aufladen oder austauschen, wenn er alt ist.
Störung des Winkelsensors	Der Winkelsensor ist defekt oder die Verbindung ist fehlerhaft.	Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung zu erhalten.

Sicherheitshinweise für das Fahren

Es besteht Verletzungsgefahr durch Kippen des Scooters.

- *Fahren Sie nur auf einem Untergrund, der die maximal zulässige Steigung nicht überschreitet.*
- *Verwenden Sie immer die Kippsicherung, wenn Sie mit Ihrem Eloflex fahren.*
- *Bergab immer mit geringerer Geschwindigkeit fahren.*
- *Vermeiden Sie Bereiche, in denen die Gefahr von vereisten oder rutschigen Oberflächen besteht.*
- *Versuchen Sie niemals, mit Ihrem Scooter Treppen hinauf- oder hinunterzufahren.*
- *Fahren Sie niemals über Hindernisse, die höher als die empfohlene maximale Höhe sind.*
- *Vermeiden Sie schnelle Bewegungen mit dem Lenker und plötzliche Richtungswechsel während der Fahrt.*

Risiko, an abgelegenen Orten festzusitzen.

- *Ein Benutzer mit stark eingeschränkter Mobilität sollte längere Strecken im Freien nicht ohne Begleitperson fahren.*

Verletzungsgefahr, wenn ein Fuß während der Fahrt von der Fußstütze rutscht und unter den Scooter gerät.

- *Stellen Sie Ihre Füße während der Fahrt immer in die Mitte der Fußstütze.*

Verletzungsgefahr bei Kollision mit anderen Gegenständen in engen Passagen.

- *Befahren Sie enge Passagen mit niedrigster Geschwindigkeit und größter Aufmerksamkeit.*

Es besteht die Gefahr, dass der Scooter umkippt, wenn die Kippsicherung entfernt, beschädigt oder an einer Position montiert wird, die von der Standardbefestigung abweicht.

- *Die Kippsicherung muss immer in Fahrposition montiert werden, wenn der Scooter benutzt wird.*
- *Die Kippsicherungen funktionieren nur auf festem Untergrund. Auf weichen Untergründen wie Rasen und Schnee kann die Kippsicherung ihre Wirkung verlieren. Fahren Sie daher auf weichem Untergrund äußerst vorsichtig.*

Fahren

Bitte lesen

Der Benutzer muss diese Sicherheits- und Fahrhinweise lesen, bevor er den Eloflex-Scooter benutzt.

Übung

- Übung macht den Meister. Trainieren Sie mit einem Assistenten, Ihren Eloflex zu fahren, indem Sie auf einer offenen Fläche beginnen, vorzugsweise im Freien, bevor Sie Ihren Scooter unter anderen Personen, in Geschäften oder Restaurants usw. verwenden.
- Bewegen Sie sich vorwärts, indem Sie den Beschleunigungsknopf drücken.
- Stoppen Sie, indem Sie den Knopf loslassen, oder drücken Sie den Bremsen-Knopf, um sofort anzuhalten.

Rückwärts

Legen Sie den Rückwärtsgang ein, indem Sie den Rückwärts-Knopf drücken, und fahren Sie dann rückwärts, indem Sie den Beschleunigungsknopf drücken. Drücken Sie erneut den Rückwärts-Knopf, um wieder in den Fahrmodus zu wechseln. Denken Sie daran, immer nach hinten zu schauen, bevor Sie mit dem Rückwärtsfahren beginnen, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Gegenstände im Weg sind.

Drehen

Drehen Sie sich, indem Sie den Lenker sanft seitwärts bewegen.
Achten Sie darauf, dass sich beim Drehen seitlich keine Hindernisse befinden.

Die Richtung wechseln

Wechseln Sie während der Fahrt die Richtung, indem Sie den Lenker vorsichtig seitwärts in die Richtung bewegen, in die Sie fahren möchten.
Verringern Sie beim Wechseln der Richtung immer die Geschwindigkeit.

Hindernisse

Üben Sie, Hindernisse zu umgehen und zu überwinden.
Bewegen Sie den Lenker seitwärts, während Sie vorwärtsfahren, um Hindernissen auszuweichen.
Denken Sie daran, die Geschwindigkeit zu verringern, wenn Sie sich Hindernissen nähern.

Schnelles Fahren

Drücken Sie den Plus-Knopf, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, wenn Sie schnell fahren möchten. Denken Sie daran, die Geschwindigkeit zu verringern, sobald Sie sich unsicher fühlen, egal ob Sie abbiegen oder sich einem Hindernis nähern.

Überfahren von Hindernissen

Fahren Sie langsam auf das Hindernis zu und achten Sie darauf, dass die Vorderräder in Fahrtrichtung zeigen. Drücken Sie dann den Beschleunigungsknopf, während Sie sich nach hinten lehnen, um über das Hindernis zu fahren. Eloflex ist für Hindernisse bis maximal 6 cm geprüft und zugelassen.

Fahren am Hang

Versuchen Sie, auf einem geneigten Untergrund gerade nach oben oder unten zu fahren. Lehnen Sie sich leicht nach vorne, wenn Sie nach oben fahren, und nach hinten, wenn Sie nach unten fahren, um den Schwerpunkt beizubehalten. Vermeiden Sie nach Möglichkeit seitliches Fahren und gleichen Sie eine eventuelle Seitenneigung aus, indem Sie sich in die entgegengesetzte Richtung lehnen. Fahren Sie an Hängen immer langsam. Vermeiden Sie Flächen, die sich um mehr als 9 Grad neigen.

Aufzüge

Überprüfen Sie, bevor Sie den Aufzug nutzen, die Breite der Aufzugstür und auch, wie schnell die Tür geschlossen wird. Denken Sie daran, dass Sie möglicherweise rückwärts aus dem Aufzug herausfahren müssen, wenn dieser nicht groß genug ist, um zu wenden.

Fahren auf der Straße

Fahren Sie mit Ihrem Eloflex vor allem auf Neben-, Geh- und Radwegen und erst zuletzt auf stark befahrenen Straßen.

Überqueren der Straße

Wenn möglich, überqueren Sie die Straße immer an einem Fußgängerüberweg. Achten Sie auf vorbeifahrende Autos. Nutzen Sie den abgeflachten Bereich des Bordsteins, falls vorhanden. Vermeiden Sie Bordsteine, die höher als 6 cm sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn der Scooter für andere als die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke verwendet wird.

- Verwenden Sie den Scooter nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung (siehe oben, Kapitel „Typenklassifizierung und Verwendungszweck“).

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn der Scooter mit verminderter Fahrtüchtigkeit verwendet wird.

- Benutzen Sie den Scooter nicht, wenn Ihre Fahrkünste z. B. durch Krankheit, Medikamente oder Alkohol beeinträchtigt sind.

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn der Scooter sich unvorhergesehen bewegt.

- Schalten Sie den Scooter vor dem Ein- und Absteigen aus oder wenn die Gefahr besteht, dass Sie, eine andere Person oder ein Gegenstand mit dem Lenker in Berührung kommen könnten.
- Wenn die Motoren ausgeschaltet sind, funktionieren die Bremsen nicht. Daher darf der Scooter nur auf ebenem Untergrund geschoben werden, niemals an Hängen. Lassen Sie den Scooter niemals in oder in der Nähe von Hängen mit ausgeschalteten Motoren stehen.

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn der Scooter während der Fahrt z. B. mit dem Ein-/Ausknopf oder durch Abreißen eines Kabels ausgeschaltet wird, da er mit einem harten Ruck stoppt.

- Lösen Sie den Beschleunigungsknopf oder drücken Sie den roten Bremsknopf, um schneller anzuhalten.

Es besteht Verletzungsgefahr durch Stürze vom Scooter

- Bewegen Sie sich nicht vorwärts, beugen Sie sich nicht zwischen den Knien nach vorne und lehnen Sie sich nicht über die Kante des Scooters, um beispielsweise Gegenstände zu erreichen.
- Verwenden Sie immer einen Sicherheitsgurt und stellen Sie ihn vor jeder Fahrt neu ein.

- Fahren Sie so nah wie möglich an den neuen Sitzplatz, wenn Sie auf einen anderen Sitzplatz wechseln.

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn die maximal zulässige Belastung überschritten wird.

- Beachten Sie die maximal zulässige Belastung (siehe Kapitel „Technische Daten“ am Ende dieses Dokuments).
- Der Scooter darf nur von einer einzigen Person benutzt werden. Verwenden Sie den Scooter niemals, um mehr als eine Person gleichzeitig zu transportieren.

Wenn das Ausklappen nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, kann sich beim Gebrauch des Scooters die Verriegelung lösen und Verletzungen sowie Schäden am Scooter verursachen.

- Wenn die Verriegelung des Scooters nicht richtig eingerastet ist, kann der Scooter bei Gebrauch plötzlich zusammenklappen, was dazu führen kann, dass Sie aus dem Scooter fallen.
- Stellen Sie immer sicher, dass sich der Verriegelungshaken in der richtigen Position befindet, bevor Sie den Scooter benutzen.

Es besteht Verletzungs- und Quetschgefahr beim Zusammenklappen des Scooters.

- Klappen und heben Sie den Scooter immer wie in der Bedienungsanleitung beschrieben an.
- Achten Sie darauf, dass beim Auf- und Zusammenklappen niemand oder nichts eingeklemmt wird.

In feuchten Umgebungen besteht die Gefahr von Verletzungen sowie Beschädigung des Scooters.

- Der Scooter darf nicht während des Duschens benutzt werden.
- Der Scooter darf nicht beim Baden benutzt werden.

Sicherheit

Bahngleise überqueren

Überqueren Sie die Bahngleise immer gerade von vorne, niemals schräg von der Seite.

Überqueren Sie die Bahngleise nie allein, sondern immer mit einer Begleitperson, die Ihnen helfen kann.

Scharfe Kanten

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an steilen Hängen fahren, da der Scooter leicht beschädigt werden kann. Eloflex ist für Neigungen mit maximal 9 Grad geprüft und zugelassen. Nutzen Sie den Scooter immer mit einer Begleitperson, die Ihnen helfen kann.

Hohe Kanten

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie nach oben fahren oder ausscheren, um eine Kante zu erreichen. Eloflex ist für Kanten bis maximal 6 cm geprüft und zugelassen. Nutzen Sie den Scooter immer mit einer Begleitperson, die Ihnen helfen kann.

Transfer

Wir empfehlen, immer eine Begleitperson zur Seite zu haben, die Ihnen bei Transfers von und zu Ihrem Eloflex helfen kann. Schalten Sie ihn immer aus, bevor Sie auf- oder absteigen. Heben Sie immer die Armlehnen an, bevor Sie sich bewegen, um das Auf- und Absteigen zu erleichtern.

Führen Sie Reparaturen nicht selbst aus

Versuchen Sie niemals, einen defekten Scooter selbst zu reparieren. Wenn Sie versuchen, den Scooter selbst zu reparieren, verfällt die Garantie. Wenden Sie sich immer an Eloflex oder an das Geschäft oder das Assistentenzentrum, das den Scooter verkauft/verschrieben hat. Modifizieren Sie Ihren Scooter niemals auf eigene Faust.

Kein Spielzeug

Lassen Sie niemals zu, dass Kinder, die normalerweise keinen Scooter benutzen, auf Ihrem Eloflex sitzen oder ihn benutzen.

Reinigung

Reinigen Sie Ihren Eloflex niemals mit fließendem Wasser. Wischen Sie ihn nur mit einem feuchten Tuch ab.

Wenn sich Ihr Eloflex nur langsam zusammenklappen lässt, können Sie die Gelenke mit Öl oder Silikonspray schmieren.

Vorsicht vor Hitze

Lassen Sie Ihren Eloflex niemals in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle stehen/liegen, da dies die Akkus beschädigen kann. Halten Sie sich mit Ihrem Eloflex niemals in der Nähe von offenem Feuer auf.

Sie können Ihren Eloflex von -10 Grad bis +45 Grad verwenden. Minus-Grade können sich auf die Reichweite auswirken.

Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihren Eloflex außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn er nicht verwendet wird.

Der Scooter sollte drinnen in frostfreien, trockenen und belüfteten Räumen gelagert werden. Lagertemperatur 0-30 Grad.

Das Ladegerät

Das Ladegerät darf niemals abgedeckt werden, wenn es zum Aufladen Ihres Eloflex verwendet wird. Das Ladegerät wird heiß und es besteht Unfall- oder Verletzungsgefahr.

Akkus

Lagern Sie die Akkus niemals in direktem Sonnenlicht oder an einem Ort, an dem Minus-Temperaturen erreicht werden können.

Die Akkus sollten an einem trockenen und belüfteten Ort gelagert werden.

Technische Spezifikationen

FAKTEN ZUM ELOFLEX S1

GEWICHT	41 kg inklusive 2 Akkus
GESCHWINDIGKEIT	max 9 km/h
REICHWEITE	30 km
MOTOR	2 x bürstenlose Motoren
MOTORLEISTUNG	2 x 250 Watt
AKKU	2 x Lithium-IONEN 10 AH/24 V (240 Wh)
GEWICHT DES AKKUS	1,6 kg/Stück
LADEDAUER	3 Stunden
WENDEKREIS	100 cm
MAX. NEIGUNG	9 Grad
RÄDER	3 St. 12" luftgefüllt
SITZHÖHE	55-60 cm
SITZBREITE	45 / 50 / 55 cm
SITZTIEFE	40 cm
MAX. BELASTUNG	Max 120 kg
SITZPOLSTER	Kunstleder
GRÖSSE	105-120 cm (H) x 63 cm (W) x 91 cm (D)
GRÖSSE EINGEKlappt	105 cm (H) x 63 cm (W) x 55 cm (D)
GARANTIE	2 Jahre

Empfohlener Reifendruck = 2,5 kg.

Eloflex kontaktieren

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst oder Ihren Händler. Wenn Sie direkt mit uns in Kontakt treten möchten, finden Sie Kontaktinformationen auf unserer Website, www.eloflex.eu



The logo for strack, featuring the word "strack" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are colored in a gradient from orange to yellow.

strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

+41 (0)58 666 08 08
www.strack.ch
info@strack.ch

© Copyright Eloflex

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen und darf ohne schriftliche Genehmigung von Eloflex weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt werden. Eloflex behält sich alle typografischen Fehler in diesem Dokument vor und behält sich das Recht auf Produktänderungen vor.

Sungo Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands
SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd
No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu