

Mobilex Rollator "Tiger" **Art. Nr. 312201, 312202**

Montage- und Gebrauchsanleitung



CE

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns besonders. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Der Rollator "Tiger" ist auf die Bedürfnisse von Arthritispatienten abgestimmt, um eine beschwerdefreie Mobilität zu gewährleisten und die Bewegungsfreiheit des Benutzers erweitern. Die Lastaufnahme erfolgt nicht über die Hand sondern über den Unterarm. Der Benutzer muss über ein für die Anwendung ausreichendes Restleistungsvermögen verfügen.

Indikation

Die Gehhilfe wurde zur Unterstützung der Mobilität von Personen geschaffen, die Probleme mit dem Stehen oder Gehen haben. Die Gehhilfe ermöglicht solchen Personen, die Rückkehr zu alltäglichen Tätigkeiten. Die Gehhilfe wurde mit dem Gedanken an Personen geschaffen, die infolge verschiedener Erkrankungen eine stabile Stütze beim Gehen brauchen. Anstelle klassischer Griffe wurde die Gehhilfe mit hohen Vorderarm-Stützen ausgestattet, was eine bessere Stabilität für den Nutzer bietet. Das Verwenden der Gehhilfe zu anderen Zwecken als eine Stütze beim Stehen, Gehen und Sitzen ist untersagt.

Kontraindikation

Die Gehhilfe sollte nicht durch Personen genutzt werden, die Gleichgewichtsprobleme haben, deren Muskulatur deutlich geschwächt ist, so dass Sie nicht im Stande sind eigenständig zu stehen oder gehen. Die Gehhilfe sollte durch einen Physiotherapeuten oder Arzt verordnet werden.



ACHTUNG! Durch die Ausstattung mit Unterarmlagen wird die Standsicherheit reduziert, daher ist eine Nutzung nur auf ebenen Böden im Innenbereich gestattet. Eventuelle Hindernisse, wie Türschwellen o.ä. müssen zum Überfahren angeglichen werden. z.B. durch Mobilex Schwellen- oder Gummi-Rampen.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- An allen Gelenken des Rollators besteht erhöhte Klemm- und Quetschgefahr
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion beider Radbremsen
- Benutzen Sie den Rollator nur im vollständig aufgeklappten Zustand und mit verriegeltem Klappmechanismus
- Benutzen Sie den Rollator nur im Innenbereich auf geradem, festen Untergrund
- Den Rollatorsitz nur bei verriegelten Bremsen benutzen
- Immer beide Bremsen gleichzeitig ziehen oder verriegeln
- Der Rollator "Tiger" darf nicht mit mehr als 150 kg insgesamt belastet werden
- Der Einkaufstasche darf maximal mit 5 kg belastet werden
- Es darf keine weitere Person auf dem Sitz mitgenommen werden
- Es dürfen keine Änderungen am Produkt ohne eine schriftliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden
- Blockieren Sie die Bremsen immer, wenn Sie die Gehhilfe nicht nutzen

3. Beschreibung

Produkt Beschreibung


Der Mobilex Rollator "Tiger" hat einen pulverbeschichteten Aluminiumrahmen und ist mit 4 Rädern ausgestattet. Sein leichter Aluminiumrahmen ermöglicht das Zusammenfallen, die Aufbewahrung und den Transport. Der Rollator lässt sich leicht manövrieren und bietet die nötige Stabilität. Die Vorderarmstützen sind höhenverstellbar. Zusätzlich ist er mit einem werksseitig montierten Sitz und einer Einkaufstasche ausgestattet.

Lieferumfang und Montagehinweise

Der Mobilex Rollator "Tiger" wird verpackt in einem Karton ausgeliefert.

Lieferumfang:

- ✓ 1 Rollator
- ✓ Diese Gebrauchsanweisung

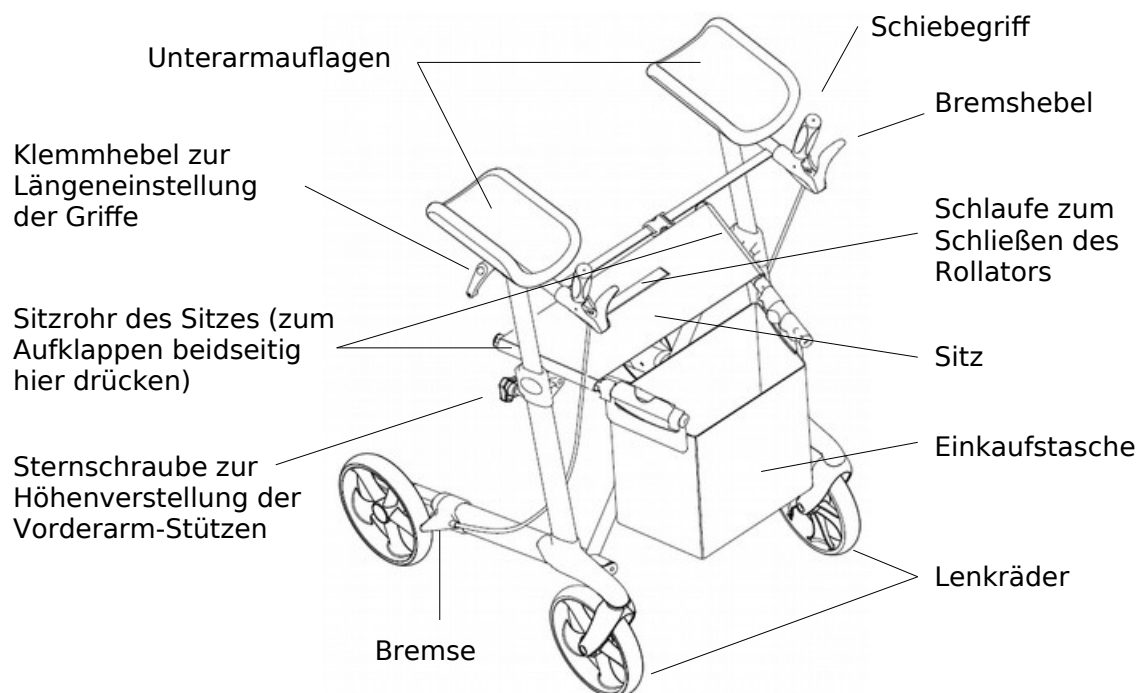

Erste Kontrolle

Nachdem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben, prüfen Sie zuerst, ob nichts fehlt und ob sich alle auf der Zeichnung sichtbaren Teile vorhanden sind. Sollten Sie bemerken, dass irgendwelche Teile fehlen, kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Händler.

Ausklappen der Gehilfe

- Ergreifen Sie beide Sitzrohre und drücken Sie diese nach unten bis der Rahmen aufgeklappt ist und Sie ein "Klick" hören. Der Klappmechanismus der Gehilfe ist nun verriegelt. Prüfen Sie sicherheitshalber ob der Rahmen aufgeklappt ist, indem Sie versuchen die Gehilfe zusammenzudrücken.
- Schliessen Sie den Gurt, der die beiden Schiebegriffe verbindet (*siehe Bild rechts*). Prüfen Sie an der aufgeklappten Gehilfe, ob dieser Gurt blockiert ist.
- Gehen Sie sicher, dass die Klemmhebel der Höhenverstellung entsprechend fest angezogen wurden.
- Prüfen Sie nach dem Aufklappen, ob sich beide Griffe auf selber Höhe befinden und ob sie stabil sind.





Das Benutzen einer defekten Gehhilfe ist strengstens untersagt. Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob alle Teile der Gehhilfe funktionstüchtig sind. Werden die oben genannten Empfehlungen nicht befolgt, können Gesundheitsschäden entstehen.

Zusammenklappen der Gehhilfe

- Lösen Sie erst den Gurt die zwischen beide Schiebegriffe befestigt ist.
- Ziehen Sie die Entriegelungsschleufe am Sitz bis sich der Rahmen nach innen klappt.
- Die Gehhilfe ist nun zusammengeklappt.

Höheneinstellung der Vorderarm-Stützen

- Lösen Sie erst den Gurt der zwischen beiden Schiebegriffen befestigt ist.
- Lösen Sie den Knebelgriff, indem Sie diesen nach links drehen.
- Die Höhe einstellen.
- Den Klemmhebel nach rechts drehen.
- Schnallen Sie den Gurt wieder an

Beide Griffe sollten immer auf derselben Höhe eingestellt sein. Richtig eingestellte Stützen sollten sich ungefähr auf Ellenbogenhöhe des Nutzers befinden, wenn dieser aufrecht mit locker herabgelassenen Armen steht.

Drehen der Vorderarmstützen (nur Modell 312202).

- Lösen Sie die Handschraube unter der Armstütze
- Jetzt lässt sich die Armstütze in zwei Stufen um 22,5 Grad nach innen drehen
- Nach Erreichen der gewünschten Position, die Handschraube wieder festziehen



Einstellung der Länge der Schiebegriffe.

- Lösen Sie erst den Gurt der zwischen beiden Schiebegriffen befestigt ist.
- Lösen Sie den Klemmhebel, indem Sie diesen nach links drehen.
- Die Länge einstellen.
- Den Klemmhebel nach rechts drehen.
- Schnallen Sie den Gurt wieder an

Betätigen der Bremsen (Abbremsen)

- Zum Abbremsen ziehen Sie beide Bremshebel zu sich.
- Je stärker die Bremsgriffe betätigt werden, um so stärker ist die Bremswirkung.
- Um GESTOPPT zu bleiben halten Sie die Bremsgriffe angezogen.
- Um den Rollator zu BEWEGEN lösen Sie die Bremsen. Sie werden automatisch freigegeben.



*Aktivieren Sie immer die Feststellbremsen, wenn Sie den Rollator nicht benutzen!
Lösen Sie die Feststellbremsen niemals, wenn Sie auf dem Rollator sitzen!*

Wenn Sie den Rollator auf unebenen Wegen abstellen, müssen die Feststellbremsen immer aktiviert werden!

Feststellen und Lösen der Bremsen

- Um den Rollator zum Stehen zu bringen, ziehen Sie die Bremshebel zu sich.
- Zum Parken ziehen Sie die Bremshebel zu sich, bis Sie ein „Klickgeräusch“ hören.
- Der Rollator darf zum Sitzen nur bei festgestellten Bremsen verwendet werden.
- Bevor Sie wieder losfahren, stellen Sie sich in die Fahrtrichtung und lösen Sie die Bremshebel durch leichtes Schieben nach vorne.



Beim Parken sind die Bremsen immer zu blockieren.

Die Sitzfläche darf nie ohne blockierten Bremsen verwendet werden!

Lehnen Sie sich beim Sitzen nie nach hinten. Es wird empfohlen, nur den vorderen Sitzbereich zu nutzen und sich nicht auf die Tasche zu setzen oder nach hinten zu lehnen.

Funktionsbeschreibung

Durch den klappbaren Rahmen kann der Rollator platzsparend zusammengeklappt werden. Die Schiebestangen (Lenker) lassen sich durch die stufenlose Höhenverstellung an Ihre Körpergröße anpassen. Die Sitzfläche ermöglicht Ihnen, Ruhepausen einzulegen.

Optionen / Zubehör Für den Mobilex Tiger Rollator ist verschiedenes Zubehör lieferbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Handhabung beim Transport

Es wird empfohlen, das Produkt zusammengeklappt zu transportieren. Seine Bauart ermöglicht ein einfaches Auf- und Zusammenklappen. Während des Transports aufpassen, dass sich das Produkt in einer stabilen Position befindet, ohne dass er sich verschieben könnte.

Anwendung

Stellen Sie sich mittig hinter die Hinterräder. Legen Sie Ihre Unterarme in die Auflagen und umfassen die Handgriffe. Die Unterarm-Auflagen nehmen die Last von Ihren Handgelenken. Die Bremsen sind speziell entwickelt, so dass nur ein geringer Kraftaufwand notwendig ist.

4. Technische Daten

Mobilex Rollator Tiger HMV Nr. 10.50.04.1209	Standard Art.Nr. 312201	Mit drehb. Armauflagen Art.Nr. 312202
Schiebestangen höhenverstellbar	95 cm - 120 cm	95 cm - 120 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	62 / 22,5 cm	62 / 22,5 cm
Innere Breite zwischen den Handgriffen	46 cm	46 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	66 cm
Gewicht (+ Tasche 380 g)	9,5 kg	9,5 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsen	2 feststellbar mit Parkfunktion	
Radgrößen	Vorne und hinten: 200 x 35 mm	

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich am unteren Rahmenteil

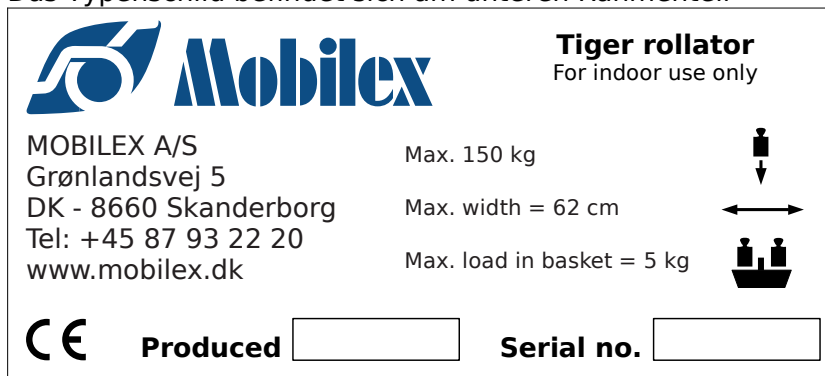


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen und korrosionsgeschützten Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen (mind. 1x jährlich) von einem Fachmann kontrollieren zu lassen. Diese Prüfung sollte folgende Kontrollen umfassen: Sichtprüfung aller Rahmenteile auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion, sowie insbesondere Kontrolle von:

- ✓ Rollator Fahrgestell
- ✓ Schiebestangen (Lenker), Griffe und Verbindungsgurt
- ✓ Bremshebel und Bremszüge
- ✓ Lenkgabeln und Lenkräder
- ✓ Bremsräder
- ✓ Sitzfläche und Verriegelungsmechanik
- ✓ Einkaufstasche
- ✓ Alle Verbindungselemente (z. B. Muttern, Schrauben, Nieten ...) auf Vollständigkeit, Funktion und einwandfreien Sitz prüfen

- ✓ Funktion der Bremse prüfen auf:
 - Abbremsen bei der Fahrt
 - Feststellen der Bremsräder

Reinigung der Räder

Es wird empfohlen, die Räder mit warmen Wasser und sanftem Reinigungsmittel zu reinigen. Achten Sie auch das entsprechende Schmiermittel der Lager, indem Sie diese mit einem Schmiermittel zeitweise oder wenn die Räder zu quietschen anfangen, besprühen.

6. Wiederverwendung

Der Rollator ist zum Wiedereinsatz geeignet. Vor einer Wiederverwendung muss der Rollator gereinigt und desinfiziert werden. Für eine Freigabe sind alle unter Punkt 5: "Wartung und Pflege" angeführte Kontrollen durchzuführen.

7. Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	mögliche Ursache	was ist zu tun
der Rollator lässt sich nur schwer lenken oder schieben	Verschmutzungen zwischen Rädern und Gabeln	etwaige Verschmutzungen oder Haare zwischen Rad und Gabel entfernen
die Bremsen greifen nicht oder greifen nur einseitig	Bremsklötze abgenutzt oder Bremsen schlecht eingestellt	Einstellung der Bremsen kontrollieren, evtl. Bremsklötze wechseln (→ Servicecenter)
der Sitz rastet beim Aufklappen nicht richtig ein	Verriegelungsmechanik nicht richtig eingestellt oder defekt	Einstellung der Verriegelungsmechanik kontrollieren oder austauschen (→ Servicecenter)

8. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

9. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

10. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

Mobilex Arthritis Rollator "Tiger" Art. Nr. 312201, 312202

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:



- Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte

Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S



.....
Unterschrift

Skanderborg, am 03.08.2018