

VELA TANGO 200

FÜR AKTIVE MENSCHEN



Die VELA Tango Serie ist Design massig umgestaltet worden, so dass die Stühle jetzt mehr Modern und vollendet erscheinen. Die Kapazität von dem Stuhl ist auf 160 Kg erhöht worden. Der Fußring kann jetzt als Einstiegshilfe benutzt werden, natürlich ohne dass der Stuhl nach vorne kippt. Der Stuhl ist mehr benutzerfreundlich geworden auf Grund der neuen Schnappgriffe.

Die VELA Tango-Stühle setzen auf Ergonomie, Sicherheit und die bekannte hohe VELA-Qualität. Sie wurden gemäß der Nordischen Anforderungsspezifikation für Arbeitsstühle entwickelt.

Die VELA Tango 200-Stühle sind etwas breiter und höher Rücken als die Stühle der VELA Tango 100-Serie. Der VELA Tango 200 wurde besonders für Menschen entwickelt, die zusätzliche Stütze und Komfort brauchen.

Ein zusätzlicher Fokus auf die Sicherheit ist durch die stärkeren Armlehnen gewährleistet, dies macht den Stuhl noch Sicherer als Hilfe zum Ein- und Aussteigen.

Der Fußring kann jetzt auch als Hilfe bei dem Einstieg in den Stuhl helfen. Etwas was die Benutzer der Stühle mehr geborgen macht. Die Kapazität der Stühle ist erhöht worden und Benutzer bis 160 Kg können jetzt den Stuhl in Gebrauch nehmen.

Kontakt

Falls Sie weitere Informationen über den VELA Tango 200 wünschen, rufen Sie bei VELA in Dänemark an unter +45 9634 7600, schicken Sie eine E-Mail an mail@vela.dk oder besuchen Sie im Internet die Seite www.vela.eu.

TECHNISCHE INFORMATION

	VELA Tango 200	VELA Tango 200E	VELA Tango 200EA
Höheneinstellung durch	Gas, 500N	Strom, Anschluss in rechter oder linker Armlehne	Strom, Anschluss in rechter oder linker Armlehne
Sitz, CY	47 x 49 cm	47 x 49 cm	47 x 49 cm
Sitzwinkel	-6° / +3°	-6° / +3°	-6° / +3°
Sitztiefe	33-49 cm	33-49 cm	33-49 cm
Rückenlehne, CY	43 x 45 cm	43 x 45 cm	43-45 cm
Rückenlehnenwinkel	-20° / +6°	-20° / +6°	-20° / +6°
Armlehnenkissen (PU)	9 x 30 cm	9 x 30 cm	9 x 30 cm
Armlehnenhöhe	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
Abstand zwischen Armlehnen	41-55 cm	41-55 cm	41-55 cm
Sitzhöhe	40-55 cm 42-57 cm 47-67 cm 47-62 cm 52-67 cm 38-48 cm	200mm: 300mm: 40-60 cm 45-75 cm 42-62 cm 47-77 cm 44-64 cm 49-79 cm 46-66 cm 51-81 cm	200mm: 300mm: 40-60 cm 45-75 cm 42-62 cm 47-77 cm 44-64 cm 49-79 cm 46-66 cm 51-81 cm
Stufenweise Einstellung	-2 / +10 cm	-2 / +4 cm	-2 / +4 cm
Arthrodeseklappe	-	-	0°-25°
Untergestell	55 x 55 cm	55 x 55 cm	55 x 55 cm
Gewicht	23 kg	28 kg	29 kg
Kapazität	160 kg	160 kg	160 kg

VELA bietet eine große Auswahl an Zubehör:

- Platte für S-Fußstütze
- Elektrische Fußstütze
- Elektrisch verstellbare Beinstütze
- Ausklappbarer Fußring
- Stoßbügel
- Tischchen aus Acryl
- T-Griff für Handzug der Bremse
- Verlängerungsteil für Bremse
- Bremspedal
- Elektrische Brems
- Griff für Gichtkranke mit Druckkontakt
- Armlehnen, speziell
- Inkontinenz-Sitzüberzug
- Schonüberzug, Sitz
- Körperstützen

Konstruktion:


- Gewölbtes Stahlgestell aus Profilrohr, sodass alle Räder auch bei ungleichmäßigem Boden Kontakt haben
- Jedes Rad ist mit Radzapfen befestigt
- Außenrohr aus lackiertem Stahl mit Führung für die stufenweise Einstellung
- Höhenverstellung mit Teleskopgriff

- Stromkreis 24VDC mit integrierter Motorüberwachung
- Klangsignal (Pfeiflaut) bei zu niedriger Batteriespannung (<10V)
- Batterien: 12VDC Ah versiegelte Gelbatterie x 2
- Netzteil: 230VAC/24VDC 400mA MED (EN 60601-1)
- Sitzmechanik vollmechanisch

Der VELA Tango 200 ist in 9 Phoenix-Farben oder in 4 AMBLA-Kunstlederbezügen lieferbar.

- Inkontinenz-Überzug in 4 Farben und 2 Qualitäten lieferbar
- Schonüberzug in allen Phoenix-Farben

Phoenix:

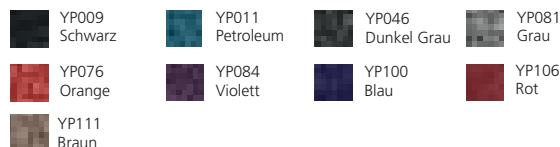

Phoenix erfüllt auch alle Anforderungen bei Feuersicherung und Verschleißbeständigkeit.

Ambla:

