

B500 advanced

Vielseitig, zuverlässig, sicher

Jetzt auch mit
Junior- und XL-Sitz





Das Leben geniessen

Auf meinen Rollstuhl ist Verlass!

„Das wichtigste in meinem Leben ist, viel Zeit mit der Familie und meinen Freunden zu verbringen.“ Tomislav hat klare Prioritäten im Leben.

Der 28jährige Tetraplegiker C3/C4 sitzt seit einem Autounfall vor vier Jahren im Rollstuhl. In seinem Lebensmut und seinem starken Willen lässt er sich von nichts erschüttern.

Sein Rollstuhl ist für ihn von grosser Bedeutung „Der beste Rollstuhl ist der, den ich gar nicht bemerke; der Rollstuhl, der mir Freiheiten gibt.“ Wo seine Familie und seine Freunde sind, da will auch Tomislav sein. Das muss der Rollstuhl möglich machen.

Freiheit ist ohnehin ein wichtiger Begriff für Tomislav: „Freiheit bedeutet für mich ganz einfach, das Leben geniessen zu können. Über nichts nachdenken zu müssen. Einfach raus kommen und die Sonne geniessen.“

Seinen Rollstuhl hat er sich genau ausgesucht. „In meinem Rollstuhl fühle ich mich wohl, muss auch auf längeren Wegen keine Sekunde an ihn denken.“ Kein Wunder: Der B500 ist auch im Detail genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten und leicht zu steuern. „Dem kann ich einfach blind vertrauen.“

„Ich möchte das Leben mit meiner Familie und Freunden geniessen, ohne mir über irgend-etwas Gedanken machen zu müssen. Auch nicht über meinen Rollstuhl.“ Tomislav, 28 Jahre



„Freiheit bedeutet für mich ganz einfach,
das Leben genießen zu können. Über
nichts nachdenken müssen. Einfach raus
kommen und die Sonne genießen.“

Tomislav, 28 Jahre

Höchst persönlich – der modulare B500 advanced

Natürlich überzeugt der B500 advanced mit allen Vorzügen: mit den den Bedürfnissen angepassten Steuerungen enAble® 50 sowie mit ihrer Flexibilität und Modularität.

Der B500 advanced ist überaus fahrsicher und servicefreundlich, verfügt über diverse komfortable Steuerungsoptionen und ist im Innen- und Aussenbereich einsetzbar.

Mit optional erhältlichen Modulen kann der B500 advanced genau nach den individuellen Wünschen ausgebaut werden die sein Fahrer wirklich braucht: Mit erweiterten elektrischen Sitzoptionen, elektrischer Sitzkantelung bis 45°, Contour- und Recaro®-Sitzen oder elektrischer Beleuchtung. Flexibel eben. Und höchst persönlich.

Zusätzlich wählbare Module

- Elektrische Sitzoptionen, z. B. 45°-Kantelung
- Standardsitz Junior
- Standardsitz XL (auch als Contoursitz XL erhältlich)
- Motorleistung bis zu 10 km/h
- Sonder- und Umfeldsteuerungen
- und vieles mehr

Die Liebe zum Detail macht den Unterschied

Menschen mit körperlichen Einschränkungen wissen ganz genau, dass es gerade auf die kleinen Details ankommt, wenn sie ihren Alltag problemlos bewältigen wollen. Sie sind auf einen Rollstuhl angewiesen, der ihre individuellen Bedürfnisse optimal erfüllt.

B500 advanced



Der Alleskönner,
Der sichere, service-
freundliche, modulare,
komfortable, variable
Elektrorollstuhl.

mit Standardsitz
und Spritzschutz





mit XL-Sitz


mit Recaro-Sitz



B500 advanced mit Junior-Sitz, teleskopierbarem Rahmen und Seitenverkleidung



Hier einige Details auf einen Blick

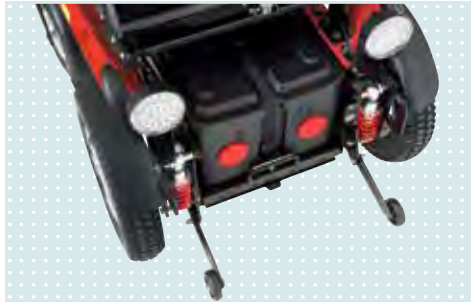

Federung der Hinterräder



Bedeinggerät (Steuerung) enAble 50
mit integrierten 2 Anschlüssen für Buddy-Batten.



Standardsitz Junior
Sitzbreite 340–400 mm
Sitztiefe 340–400 mm



Selbskontaktierende Frontbeleuchtung
Ermöglicht eine einfache Abnahme des Seitenteils.



Standardsitz XL
Sitzbreite 500–560 mm
Sitztiefe 420–500 mm
Contoursitz XL
Sitzbreite 500–560 mm
Sitztiefe 400–480 mm



LED-Heckbeleuchtung
Neue, moderne LED-Heckbeleuchtung für höhere Effizienz und grössere Lebensdauer



Lenkradgabel und -felge
Die designoptimierte Lenkradgabel und -felge verleihen ein dynamisch, modernes Aussehen.



Batterieschubfach



Teleskopierbarer Rahmen



Federung der Lenkräder

Sonder- und Umfeldsteuerung mit der enAble® 50

Noch individueller geht es nicht

Mithilfe der innovativen enAble® 50 Software können Sie als Fachhändler die Steuerung des B500 den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Anwenders anpassen, sodass ihm die Gestaltung seines Alltags leichter fallen wird. Sein Kopf wird frei für Neues: für die Arbeit, für soziale Kontakte und die Freizeitgestaltung.

Die enAble® 50 ermöglicht eine exakte Abstimmung der Fahrparameter auf den jeweiligen Rollstuhl. Sie bietet ausserdem eine so genaue Anpassung an die motorischen Fähigkeiten, wie keine andere Steuerungssoftware. Beispielsweise können Sie die Sensibilität des Eingabemoduls erhöhen, damit der Anwender auch mit wenig Kraft den Rollstuhl bewegen kann.

Ein weiteres Beispiel: Die Intensität der Joystick-Auslenkung können Sie als Fachhändler durch Einrichtung der X/Y-Achse einfach festlegen. Somit kann der Joystick auf die motorischen Fähigkeiten des Nutzers angepasst werden. Das Ergebnis: besonders präzises Fahren.

Was die Steuerung noch bietet? Frei programmierbare Ausgänge zur Ansteuerung der verschiedensten Funktionen. Ein klar strukturiertes Farb-Display mit hoher Auflösung. Es kann individuell am Rollstuhl positioniert werden. Über das Eingabegerät bedient der Anwender das Menü, stellt Fahrfunktionen ein, nimmt Sitzeinstellungen vor und kann über verschiedene Schnittstellen sein Umfeld kontrollieren.





Technische Details	B500
Radius Wendekreis	900 mm
Gesamtlänge	1080 mm*
Gesamtbreite	645 mm
Leergewicht	95 kg
Sitzbreite	340–560 mm
Sitzhöhe	450–570 mm
Rückenhöhe	550 mm (einstellbar auf 500 mm oder 450 mm)
Maximale Steigfähigkeit	17 %
Reichweite	ca. 35 km
Hindernisüberwindungen	50 mm (mit Kantensteighilfe: 100 mm)

* Bei Standardrahmen

• Hinweis

Der B500 Advanced, ausgestattet mit dem KFZ-Fixierungsset, ist für den Transport im Behindertentransportwagen geeignet.




Viele Rahmenfarben Für eine bunte Auswahl

(dies ist nur eine kleine Auswahl, weitere Farben sehen Sie auf dem Bestellformular)



Cremeweiss

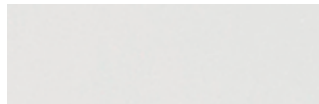

Verkehrsweiss



Verkehrsblau



Marine Blue



Silber metallic



Sparkle granny smith



Sparkle red



B500 advanced | Optionen

	B500 advanced
Steuerung	
enAble®50	●
Motoren	
10km/h	●
Zubehör Fahrgestell	
Elektrische Beleuchtung	o
Spritzschutz komplett	o
Batterien	
Gel-Batterien 63 Ah (C5)	●
Ladegerät	●
Fussrasten	
Kunststoff Fussplatten	●
Aluminium Fussplatten	o
Aluminium Fussplatten durchgehend	o
Elektrische Sitzoptionen	4 möglich
Sitzkantelung 45°	o
Rückenwinkelverstellung	o
winkelverstellbare Fussstützen	o
Sitzhöhenverstellung 400 mm, 130 kg Zuladung	o
Sitzhöhenverstellung 300 mm, 180 kg Zuladung	o
Mechanische Sitzoptionen	
mechanische Sitzkantelung 0°/3°/6°	●
mechanisch verstellbare Fussstützen	o
Standardsitz-System	
Standardsitz klein/gross	●
Standardsitz Junior	●
Standardsitz XL	●
Zubehör Sitzsystem	
Abduktionskeil abnehmbar	o
Abduktionskeil abklappbar	o
Adapter für Montageset für Kopfstütze	o
Recaro®-Sitze	
Recaro® N-Joy	o
Recaro® N-Joy +	o
Recaro® Rücken LT	o
Recaro® Rücken LX	o
Recaro® Sitzfläche O	o
Recaro® Sitzfläche W	o
Recaro® Sitzfläche F	o
Contoursitze	
Contoursitz klein/gross	o
Contoursitz XL	o
Zubehör Fussstützen	
Seitliches Beinpolster bei winkelverstellbaren Fussstützen	o
Fixationsbänder für Aluminium Fussplatten	o
Armlehnen	
Armlehnen mit Kleiderschutz (teleskopierbar)	●
Armlehne mit Ausschnitt für Rückenrohr	●



B500 advanced | Optionen

	B500 advanced
Sitzschalenadapter	
Sitzschalenadapter Mygo 2	o
Adapter Leckey KIT	o
Sitzschalenadapter NuTec	o
Sitzschalenadapter Trapez	o
Sitzschalenadapter Parallel neu (nur bei Standardsitz klein)	o
Federungssystem	
Federung der Antriebsräder	●
Federung Lenkräder	o
Gurte	
Beckengurt	●
Brustgurt	o
Hosenträgergurt	o
Bedienpulthalter	
Bedienpulthalter Standard	●
Bedienpulthalter wegschwenkbar	●
Bedienpulthalter höhenverstellbar, wegschwenkbar	●
Bedienpulthalter nach unten verstellbar	●
Steuerungsoptionen	
Tischmittelsteuerung	o
Tastenmodul	o
2-Schalter Adapter	o
Sondersteuerungen	o
Reifenprofil	
Rillen	●
Stollen	●
Lenkräder Rillen, Antriebsräder Stollen	●
Reifenfarbe	
Grau	●
Schwarz (nur bei Stollen)	●
Bereifung	
Luftbereifung	●
Pannensichere Bereifung der Lenkräder	o
Pannensichere Bereifung aller Räder	o
Lenkraddurchmesser	
9"	●
10"	●
Antriebsraddurchmesser	
14"	●
Zubehör Lenkräder	
mechanische Lenkarretierung	o
Kantensteighilfe	o

Legende: ● Grundausrüstung o Aufpreisoption



Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch

strack

Patienten-
und Pflegebedarf

Otto Bock Suisse AG
Luzerner Kantonsspital 10
6000 Luzern 16
Tel 041 455 61 71 / Fax 041 455 61 70
www.ottobock.ch / suisse@ottobock.com