



**Mit dem Testsieger
Raus ins Grüne!**

GEMINO



GEMINO

DIE ROLLATORENFAMILIE

Übersicht Modelle:

GEMINO 60

Der Robuste



GEMINO 30

Der Testsieger



GEMINO 30 SpeedControl

Die Innovation



GEMINO 30 walker

Der Unterstützende



GEMINO 20

Das Basismodell





GEMINO 60 DER ROBUSTE

Möchten Sie einen Rollator, der sich Ihrer Lebenssituation perfekt anpasst und Sie selbst auf anspruchsvollem Untergrund begleitet? Dann sollten Sie sich für den Gemini 60 mit seinen großen und weichen Rädern entscheiden. Mit ihm brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen, welche Wege Sie nehmen: Sie werden sehen, mit dem Gemini 60 geht alles viel leichter, denn er ermöglicht Ihnen ein aktives Leben!

1 Der breite Radstand sorgt für außerordentliche Stabilität und durch die max. Belastbarkeit von 150 kg ist der Rollator auch ideal für schwergewichtige Personen.

2 Das weiche Material der Räder ermöglicht ein besonders ruhiges Laufverhalten, das Sie bei jedem Schritt spüren werden.

3 Der extra große Abstand zwischen den Handgriffen bietet Ihnen viel Platz zum Sitzen.





Mit dem Gemini 60 können Sie einfach losgehen und das Leben genießen! Durch die großen Vorderräder gibt er Ihnen maximale Sicherheit und kann auf nahezu jedem Untergrund eingesetzt werden. Bodenunebenheiten wie Türschwellen, Bordsteinkanten, Kopfsteinpflaster oder Waldwege lassen sich bequem überfahren.

Der Gemini 60 ist ein praktischer Begleiter im Alltag! Und wenn Sie ihn gerade nicht benötigen, macht er sich ganz schmal. Durch die Kreuzstrebe mit der Doppelverriegelung und die innovative Falk-Klick-Technik rastet er beim Zusammenfallen elegant ein, steht in zusammengeklapptem Zustand und kann so platz sparend verstaut werden.

ABMESSUNGEN

	GEMINO 60	GEMINO 60 M
Schiebegriffhöhe vom Boden	76 - 95 cm	73 - 83 cm
Gesamtlänge	74 cm	74 cm
Gesamtbreite	64 cm	64 cm
Breite zwischen den Schiebegriffen	51 cm	51 cm
Sitzhöhe	62 cm	53 cm
Höhe gefaltet	84 cm	80 cm
Länge gefaltet	74 cm	74 cm
Breite gefaltet	23 cm	23 cm
Wendekreis	95 cm	95 cm
Vorderräder	28 x 4,2 cm	28 x 4,2 cm
Hinterräder	23 x 4,2 cm	23 x 4,2 cm
Gewicht ohne Korb	8,5 kg	8,2 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg!	150 kg!
Maximale Belastbarkeit des Korbes	10 kg	10 kg
Empfohlene Körpergröße des Nutzers	150 - 200 cm	135 - 170 cm



GEMINO 30

DER TESTSIEGER

Möchten Sie einen ganz ausgezeichneten Rollator, der völlig neue Maßstäbe setzt? Der Ihre Erwartungen in punkto Sicherheit, Qualität, Komfort und Design noch übertrifft? Dann sollten Sie sich für den Gemini 30 entscheiden, denn der Testsieger des Verbrauchermagazins Öko-Test wird Akzente in Ihrem Leben setzen und Ihnen viel Freude bereiten!



reddot design award
best of the best 2011

- 1** Die besonders leichtgängigen Bremsen lassen sich durch die breiten Bremsgriffe mit Antirutsch-Pads selbst mit wenig Restkraft sicher bedienen.
- 2** Durch die Höhen-Schnellverstellung mit Memory-Funktion kann die Handgriffhöhe ganz einfach auf Sie angepasst werden.
- 3** Die rundum integrierten Reflektoren gewährleisten, dass man Sie im Scheinwerferlicht von allen Seiten frühzeitig sehen kann.





Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat im August 2011 insgesamt 10 Rollatoren intensiv geprüft. Neben der Handhabung wurden auch die Stabilität und Sicherheit sowie die Inhaltsstoffe untersucht. Der Gemini 30 war Gesamtsieger im Test und wurde als einziger Rollator in allen drei Prüfkategorien mit SEHR GUT beurteilt!

Es macht Freude, mit dem Gemini 30 unterwegs zu sein! Der stoß- und kratzfest eloxierte Rahmen sorgt dafür, dass er auch künftig in Top-Form bleibt. Bringen Sie Farbe ins Spiel und wählen Sie den Rollator in Ihrer Lieblingsfarbe aus. Je nach Modell ist er in bis zu 7 Farben erhältlich, die Sie auf den folgenden Seiten sehen können.

ABMESSUNGEN	GEMINO 30	GEMINO 30 M	GEMINO 30 S
Schiebegriffhöhe vom Boden	78 - 100 cm	69 - 88 cm	65 - 77 cm
Gesamtlänge	65 cm	65 cm	68 cm
Gesamtbreite	60 cm	60 cm	55 cm
Breite zwischen den Schiebegriffen	47 cm	47 cm	42 cm
Sitzhöhe	62 cm	55 cm	48 cm
Höhe gefaltet	80 cm	76 cm	69 cm
Länge gefaltet	65 cm	65 cm	68 cm
Breite gefaltet	23 cm	23 cm	23 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm	79 cm
Vorder- / Hinterräder	20 x 3,6 cm	20 x 3,6 cm	20 x 3,6 cm
Gewicht ohne Korb	7,1 kg	7,0 kg	6,6 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg	130 kg	125 kg
Maximale Belastbarkeit des Korbes	5 kg	5 kg	5 kg
Empfohlene Körpergröße des Nutzers	150 - 200 cm	135 - 170 cm	125 - 165 cm

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe aus!

Stellen Sie Ihren Leichtgewichts-Rollator nach Lust und Laune zusammen. Kombinieren Sie ihn mit einer farbigen City-Tasche, die Ihre Einkäufe vor Wind & Wetter und fremden Blicken schützt.



Titanium



Champagne



Midnight Blue



Black



Pink



Apple Green

Farben je Modell:

	GEMINO 60		GEMINO 30			GEMINO 30 SpeedControl			GEMINO 30 Walker		GEMINO 20		
	60	60 M	30	30 M	30 S	30	30 M	30 S	30	30 M	20	20 M	20 S
Titanium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Champagne			✓	✓									
Midnight Blue			✓	✓	✓			✓					
Black			✓										
Pink			✓		✓			✓					
Apple Green			✓	✓									
Silbergrau, lackiert											✓	✓	✓

City-Taschen:



Körbe für Gemino 30 S:





GEMINO 30

SpeedControl

DIE INNOVATION

Möchten Sie einen Leichtgewichts-Rollator, der Ihnen maximale Sicherheit beim Gehen ermöglicht? Dann sollten Sie sich für den Gemini 30 SpeedControl mit dem völlig neuen und innovativen Bremssystem entscheiden! Die Fliehkraftbremsen an den Hinterrädern bremsen bei einer Erhöhung der Gehgeschwindigkeit automatisch mit. Sofern Sie nur langsam gehen oder der Weg ansteigt, ist der Bremswiderstand nicht zu spüren.

1 Durch die Höhen-Schnellverstellung mit Memory-Funktion kann die Handgriffhöhe ganz einfach an Sie angepasst werden.

2 Die falt-Klick-Technik sorgt dafür, dass der Rollator in zusammengefaltetem Zustand steht und platz sparend transportiert werden kann.

3 Die Bremskraft des SpeedControl Systems lässt sich in drei Stufen einstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bremsen erfolgt kein Verschleiß an den Rädern.





Durch die dynamische Bremsfunktion ist ein aktives Bremsen nicht erforderlich: Sie erlangen eine aufrechte Körperhaltung und ein homogeneres Gangbild. Ihre Gehgeschwindigkeit wird gleichmäßig, Sie gehen sicher, entspannt und zugleich enger am Rollator. Ein Wegrollen des Rollators ist ausgeschlossen, was der Sturzprophylaxe dient.



Mit den Geschwistern zum Abenteuerspielplatz gehen? Oder lieber mit den Freunden ein leckeres Eis essen? Der GEMINO 30 S SpeedControl bietet Kindern alle Möglichkeiten, die Welt zu entdecken. Und dank des innovativen Bremssystems haben sie dabei immer maximale Sicherheit beim Gehen. So wird das Gehtraining zum reinen Vergnügen!

ABMESSUNGEN	GEMINO 30 SpeedControl	GEMINO 30 M SpeedControl	GEMINO 30 S SpeedControl
Schiebegriffhöhe vom Boden	78 - 100 cm	69 - 88 cm	65 - 77 cm
Gesamtlänge	65 cm	65 cm	68 cm
Gesamtbreite	60 cm	60 cm	55 cm
Breite zwischen den Schiebegriffen	47 cm	47 cm	42 cm
Sitzhöhe	62 cm	55 cm	48 cm
Höhe gefaltet	80 cm	76 cm	69 cm
Länge gefaltet	65 cm	65 cm	68 cm
Breite gefaltet	23 cm	23 cm	23 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm	79 cm
Vorder- / Hinterräder	20 x 3,6 cm	20 x 3,6 cm	20 x 3,6 cm
Gewicht ohne Korb	8,5 kg	8,4 kg	8,0 kg
Maximale Belastbarkeit	100 kg	100 kg	100 kg
Maximale Belastbarkeit des Korbes	5 kg	5 kg	5 kg
Empfohlene Körpergröße des Nutzers	150 - 200 cm	135 - 170 cm	125 - 165 cm



GEMINO 30

walker

DER UNTERSTÜTZENDE

Möchten Sie einen Leichtgewichts-Rollator, der Ihnen beim Gehen im Innenbereich zusätzlichen Halt und Unterstützung bietet? Dann sollten Sie sich für den GEMINO 30 Walker entscheiden. Die individuell anpassbaren Unterarmauflagen geben Ihnen viel Sicherheit und schonen zugleich Ihre Gelenke.

- 1** Die breiten Bremsgriffe mit Antirutsch-Pads sorgen dafür, dass Sie die besonders leichtgängigen Bremsen auch mit wenig Restkraft ganz einfach bedienen können.
- 2** Die Unterarmauflagen können in Höhe und Tiefe individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden und geben Ihnen zusätzlichen Halt.
- 3** Dank der **Falt-Klick-Technik** steht der Rollator in zusammengeklapptem Zustand und lässt sich platz sparend verstauen.





Durch die Unterarmauflagen ist der Gemino 30 Walker ideal für das Gehtraining von Patienten, die die Beine noch nicht voll belasten dürfen. Um den Alltag zu erleichtern, gibt es viel praktisches Zubehör. So können Sie z. B. mit dem Tablett Ihre Speisen und Getränke sicher transportieren.



Für maximale Sicherheit kann der Rollator mit dem innovativen SpeedControl Bremssystem ausgestattet werden, das über eine dynamische Bremsfunktion verfügt. Die Fliehkraftbremsen an den Hinterrädern bremsen bei einer Erhöhung der Gehgeschwindigkeit automatisch mit. Sie erlangen eine aufrechte Körperhaltung, gehen sicher, entspannt und zugleich enger am Rollator.

ABMESSUNGEN	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 30 M WALKER
Schiebgriffhöhe vom Boden	98 - 115 cm	84 - 100 cm
Gesamtlänge	65 cm	65 cm
Gesamtbreite	61 cm	61 cm
Breite zwischen den Schiebegriffen	25,5 cm	25,5 cm
Sitzhöhe	62 cm	55 cm
Höhe gefaltet	97 cm	89 cm
Länge gefaltet	65 cm	65 cm
Breite gefaltet	35,5 cm	35,5 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm
Vorder- / Hinterräder	20 x 3,6 cm	20 x 3,6 cm
Gewicht ohne Korb	10,6 kg	10,4 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg	130 kg
Maximale Belastbarkeit des Korbes	5 kg	5 kg
Empfohlene Körpergröße des Nutzers	150 - 200 cm	135 - 170 cm



GEMINO 20 DAS BASISMODELL

Wenn Sie einen hochwertigen Rollator suchen, der Ihnen ein ganz ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis bietet, sollten Sie sich für den Gemini 20 entscheiden. Die erstklassigen Materialien sorgen für eine hervorragende Stabilität und machen ihn zum absoluten Leichtgewicht, was Sie bei jedem Schritt spüren werden.

- 1** Durch die Höhen-Schnellverstellung mit Memory-Funktion kann die Handgriffhöhe ganz einfach auf Sie angepasst werden.
- 2** Die besonders leichtgängigen Bremsen lassen sich durch die breiten Bremsgriffe mit Antirutsch-Pads selbst mit wenig Restkraft sicher bedienen.
- 3** Die rundum integrierten Reflektoren gewährleisten, dass man Sie im Scheinwerferlicht von allen Seiten frühzeitig sehen kann.






Es macht Freude, mit dem Gemini 20 unterwegs zu sein, denn er verfügt über alle technischen Details, mit denen der Gemini 30 (Testsieger des Verbrauchermagazins Öko-Test) ausgestattet ist. So können Sie sicher sein, dass Sie einen Rollator in einer ganz ausgezeichneten Qualität erhalten!



Die Kreuzstrebe mit der Doppelverriegelung sorgt für eine hohe Stabilität und viel Komfort: Durch die Falt-Klick-Technik rastet der Gemini 20 beim Zusammenfallen elegant ein und steht auch in zusammengeklapptem Zustand. Dank seiner kompakten Form können Sie ihn platz sparend verstauen.

ABMESSUNGEN	GEMINO 20	GEMINO 20 M	GEMINO 20 S
Schiebegriffhöhe vom Boden	78 - 100 cm	69 - 88 cm	65 - 77 cm
Gesamtlänge	65 cm	65 cm	68 cm
Gesamtbreite	60 cm	60 cm	55 cm
Breite zwischen den Schiebegriffen	47 cm	47 cm	42 cm
Sitzhöhe	62 cm	55 cm	48 cm
Höhe gefaltet	80 cm	76 cm	69 cm
Länge gefaltet	65 cm	65 cm	68 cm
Breite gefaltet	23 cm	23 cm	23 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm	79 cm
Vorder- / Hinterräder	20 x 3,6 cm	20 x 3,6 cm	20 x 3,6 cm
Gewicht ohne Korb	7,1 kg	7,0 kg	6,6 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg	130 kg	125 kg
Maximale Belastbarkeit des Korbes	5 kg	5 kg	5 kg
Empfohlene Körpergröße des Nutzers	150 - 200 cm	135 - 170 cm	125 - 165 cm

Technische Daten und Modelle im Vergleich

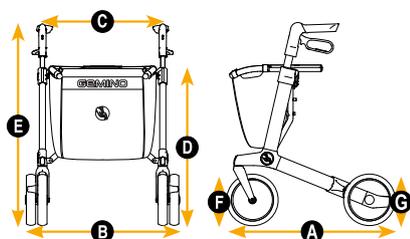

MODELL	GEMINO 60		GEMINO 30		
	60	60M	30	30M	30S
Einsatzbereich	Im Außenbereich bei anspruchsvollem Untergrund (z. B. Kopfsteinpflaster, Waldwege), im Innenbereich bei Schwellen in der Wohnung. Ideal für eine aktive Nutzung / schwergewichtige Personen.		Im Innen- und Außenbereich, vor allem in der Stadt und auf normalem Untergrund. Optimal für den täglichen Gebrauch.		
Besonderheiten	Außerordentlich hohe Standfestigkeit, besonders große und weiche Räder, extra breiter Sitz, äußerst belastbarer Korb.		Testsieger des Verbrauchermagazins Öko-Test. Äußerst beweglich durch kleinen Wendekreis. In vielen Lieblingsfarben erhältlich.		
Empfohlene Körpergröße des Nutzers	150 - 200 cm	135-170 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	125 - 165 cm
Maximale Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	130 kg	125 kg
Maximale Belastbarkeit des Korbes	10 kg	10 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Gewicht ohne Korb	8,5 kg	8,2 kg	7,1 kg	7,0 kg	6,6 kg
Gesamtlänge A	74 cm	74 cm	65 cm	65 cm	68 cm
Gesamtbreite B	64 cm	64 cm	60 cm	60 cm	55 cm
Breite zwischen den Schiebegriffen C	51 cm	51 cm	47 cm	47 cm	42 cm
Sitzhöhe D	62 cm	53 cm	62 cm	55 cm	48 cm
Schiebegriffhöhe vom Boden E	76 - 95 cm	73 - 83 cm	78 - 100 cm	69 - 88 cm	65 - 77 cm
Höhe gefaltet	84 cm	80 cm	80 cm	76 cm	69 cm
Länge gefaltet	74 cm	74 cm	65 cm	65 cm	68 cm
Breite gefaltet	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Vorderräder F	28 x 4,2 cm		20 x 3,6 cm		
Hinterräder G	23 x 4,2 cm		20 x 3,6 cm		
Wendekreis	95 cm	95 cm	84 cm	84 cm	79 cm
Auch ideal für die Kinderversorgung			✓		
HMV-Nummer	10.50.04.1195	10.50.04.1196	10.50.04.1156	10.50.04.1177	10.50.04.1178



GEMINO 30 SpeedControl
30 30M 30S

Im Innen- und Außenbereich, für maximale Sicherheit beim Gehen. Sorgt für eine aufrechte Körperhaltung und ein homogeneres Gangbild. Optimal für die Sturzprophylaxe, da der Rollator nicht wegrollen kann.

SpeedControl System brems bei Erhöhung der Gehgeschwindigkeit automatisch mit. Bremskraft ist in drei Stufen einstellbar. Durch die Fliehkraftbremsen erfolgt kein Verschleiß an den Rädern.

150 - 200 cm	135 - 170 cm	125 - 165 cm
100 kg	100 kg	100 kg
5 kg	5 kg	5 kg
8,5 kg	8,4 kg	8,0 kg
65 cm	65 cm	68 cm
60 cm	60 cm	55 cm
47 cm	47 cm	42 cm
62 cm	55 cm	48 cm
78 - 100 cm	69 - 88 cm	65 - 77 cm
80 cm	76 cm	69 cm
65 cm	65 cm	68 cm
23 cm	23 cm	23 cm
	20 x 3,6 cm	
	20 x 3,6 cm	
84 cm	84 cm	79 cm

✓

GEMINO 30 walker
30 30M

Im Innenbereich. Für Nutzer, die zusätzlichen Halt und Unterstützung benötigen. Ideal für das tägliche Gehtraining.

Tiefen- und höhenverstellbare Unterarmauflagen schonen die Gelenke.

150 - 200 cm	135 - 170 cm
150 kg	130 kg
5 kg	5 kg
10,6 kg	10,4 kg
65 cm	65 cm
61 cm	61 cm
25,5 cm	25,5 cm
62 cm	55 cm
98 - 115 cm	84 - 100 cm
97 cm	89 cm
65 cm	65 cm
35,5 cm	35,5 cm
	20 x 3,6 cm
	20 x 3,6 cm
84 cm	84 cm

GEMINO 20
20 20M 20S

Im Innen- und Außenbereich, vor allem in der Stadt und auf normalem Untergrund. Optimal für den täglichen Gebrauch.

Basismodell mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Verfügt über alle technischen Details des Gemino 30.

150 - 200 cm	135 - 170 cm	125 - 165 cm
150 kg	130 kg	125 kg
5 kg	5 kg	5 kg
7,1 kg	7,0 kg	6,6 kg
65 cm	65 cm	68 cm
60 cm	60 cm	55 cm
47 cm	47 cm	42 cm
62 cm	55 cm	48 cm
78 - 100 cm	69 - 88 cm	65 - 77 cm
80 cm	76 cm	69 cm
65 cm	65 cm	68 cm
23 cm	23 cm	23 cm
	20 x 3,6 cm	
	20 x 3,6 cm	
84 cm	84 cm	79 cm

✓

beantragt

10.50.04.1182

10.50.04.1183

10.50.04.1179

10.50.04.1180

10.50.04.1181





GEMINO



Stand 01/2016 · © 2016 Sunrise Medical HCM GmbH · Alle Rechte vorbehalten.

RB GEMINO_DE 2016_02.01