

KUBIVENT THERA-VISCO


Decubitus Therapie- und Prophylaxe-Kissen mit DUAL-System

Das Prinzip

- Zwei Lagen (jeweils 4 cm hoch)
Oberseite: aus viscoelastischem Schaumstoff
Unterseite: Würfelschicht in zwei Härten
- Würfel eingehängt in ein flexibles Gitternetz
- Die viscoelastische Schicht reagiert auf Körperwärme und Gewicht
- Dadurch Anpassung an Körperform und Stabilisierung der Sitzposition
- Die Zwischenräume des Gitternetzes bilden ein Kanalsystem, das für ständige Luftzirkulation und Wärmeaustausch sorgt.

Zusätzliche Druckentlastung

- Durch Würfelentnahme immer auf der Unterseite des zweilagigen Kissens
- Großflächig, d.h. größer als die zu entlastende Stelle

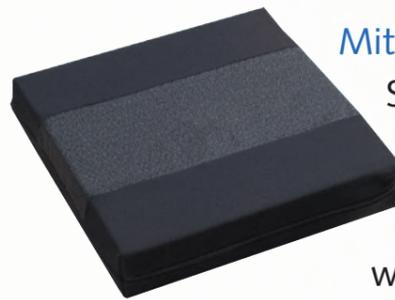

Mit Antislip-Ausstattung

Schwarzer Bezug aus elastischem Baumwoll-Mischgewebe mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C.