



### Optimale Positionierung durch bessere Anpassmöglichkeit

- Korrekte und angenehme Sitzposition hat höchste Priorität, wenn Nutzer längere Zeit im Rollstuhl verbringt
- Zielgerichtete Unterstützung und Bewahrung der Haltung durch die ergonomisch geformte Laguna 2 Rückenlehne

### Gesunde Sitzhaltung und Unterstützung

- Winkelverstellbarer Sitz und die mehrfach verstellbare Rückenlehne erlauben vielfältige Sitzpositionen
- Höhenverstellbare Rückenlehne Laguna für bessere Anpassung
- Höhenverstellbare Schiebegriffe und integrierte, praktische Kabelführung für eine angenehme und sichere Bedienung

### Körperlängenausgleich

- Körper des Nutzers bewegt sich parallel zum Rollstuhl dank der hohen Drehpunkte besonders im Knie- und Beckenbereich
- Scherkräfte werden minimiert und der Druck auf Körper und Becken verringert
- Bei Verstellung der Rückenlehne bleiben Kopfstütze und Seitenpelotten immer in der gleichen Höhe, für eine optimale Positionierung
- Umfangreiches Zubehör verfügbar

## Optionen und Merkmale



### Abgewinkelte Armlehne

Die Form der Armlehnenpolster leistet volle Unterstützung auch bei kompletter Sitzkantelung.



### Abnehmbare Rückenlehne

Die Rückenlehne ist mit Klemmbügeln an den abgerundeten Rückenlehnenrohren angebracht. Durch Lösen von nur vier Schrauben kann die Rückenlehne abgenommen werden.



### 6-Kant-Schlüssel

Alle nutzerrelevanten Einstellungen können mit dem mitgelieferten 6-Kant-Schlüssel vorgenommen werden. Der Schlüssel ist an der Rückenschale befestigt.

## Optionen und Merkmale



### Anpassbare Sitztiefe

Die Sitztiefe ist individuell einstellbar.



### Sitzbreite

Die Armlehnen- und Sitzbreite sind erweiterbar.



### Beinstützen

Die Beinstützen mit ihrem hohen Drehpunkt bieten dank ihrer stabilen Wadenstützen und der einfachen Winkelverstellung sehr gute Unterstützung.



### Abnehmbare Seitenpelotten

Für eine optimale Unterstützung des Oberkörpers.

## Technische Daten


Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Armlehnenhöhe	Länge der Fußstützen	Sitzwinkel	Rückenlehnenwinkel
<p>Rea* Clematis*</p> <p>390, 440, 490 mm (Sitzbreite) + 20 mm mit Armlehnenverbreiterung</p>	<p>420 - 480 mm</p>	<p>450 mm</p>	<p>600 - 710 mm (Ohne Sitzkissen)</p>	<p>230 - 340 mm</p>	<p>400 - 520 mm</p>	<p>-1° - 19°</p>	<p>-1° - 32°</p>

Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtgewicht	Max. Benutzergewicht	Transportgewicht	Crash-tested
<p>Rea* Clematis*</p> <p>SB + 210 mm SB + 260 mm (TBB)</p>	<p>960 - 1120 mm</p>	<p>1120 - 1480 mm</p>	<p>30 / 32 / 33,5 kg</p>	<p>Max 125 kg</p>	<p>20,5 / 21 / 21,5 kg</p>	<p>ISO 7176-19<sup>2</sup></p>

- Sitzbreite 390 (H 595 x L 840 x B 585 mm)  
Sitzbreite 440 (H 595 x L 840 x B 635 mm)  
Sitzbreite 490 (H 595 x L 840 x B 685 mm)
- Unsere Rollstühle entsprechen der ISO Norm 7176-19 sowie ISO 10542 und haben zusätzliche Eigenschaften, die erweiterte Benutzersicherheit bei der Fahrt in einem Kfz bieten. Generell sollten Rollstuhlbenutzer möglichst Fahrzeugsitze oder fahrzeugeitig installierte Rückhaltesysteme benutzen.


### Rahmenfarbe

Perlgrau

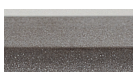

### Polsterung

Grau Dartex

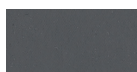

HMV-Nr.: 18.50.02.7026

Pflege-HMV-Nr.: 50.45.07.2001



Rea, das Rea Design und das DSS (Dual Stability System) sind eingetragene Marken von Invacare International.  
Detaillierte Informationen in der Bedienungsanleitung und unter [www.invacare.de](http://www.invacare.de). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.