

Relax²





Starke Optik, hervorragender Komfort und Multifunktionalität

Der neue Relax², die
perfekte Lösung für den
Wiedereinsatz...

- Robuster und zuverlässiger Aluminium-Rollstuhl
- Hoher Anteil an Gleichteilen mit weiteren Produkten der Breezy X-Familie (BasiX, RubiX) für maximale Wirtschaftlichkeit



Multifunktional...

Der neue Breezy RelaX² überzeugt durch hohe Einstellbarkeit und perfekte Funktionalität. Ob flexibel einstellbare Sitzhöhe oder Sitztiefe, individuell höhenverstellbarer Rücken oder stufenlos verstellbare Rückenlehne, ob variabel einstellbare Armauflage oder hochschwenkbare Fusstütze – beim RelaX² ist fast alles serienmässig. Darüber hinaus kann der RelaX² durch optionale Ausstattungsmöglichkeiten **individuell konfiguriert** werden.



Stufenlos winkelverstellbarer Rücken für eine perfekte Positionierung 0° - 35°
Sitzkantelung 0° - 25° / -3° - 22°



Stufenlos einstellbare Sitztiefe für variable Anforderungen (42 - 50 cm)



Höhenverstellbare Schiebegriffe mit einfacher Handhabung für optimalen Schiebekomfort


Hervorragender Komfort...

Der anatomisch geformte Rücken und Sitz, die tiefenverstellbaren Armpolster, sowie die komfortable Knieauflage sorgen für hohen Komfort und reduzieren die Gefahr von Druckstellen beim Nutzer. Die Sitzeinheit verhindert durch eine leichte Abduktion und einer seitliche Unterstützung das nach Vorne-Rutschen, da die Beine in optimaler Position gehalten werden.

Der RelaX² ist aber nicht nur in Sachen Komfort und Flexibilität ein echtes Vorbild, sondern setzt auch beim Thema **Sicherheit** Massstäbe. Wie die gesamte Breezy X-Family ist auch der neue Breezy RelaX² nach ISO 7176-19 **Crash-Test zertifiziert**.



Therapeutisch aufsteckbar mit Ellbogenpolstern (optional)

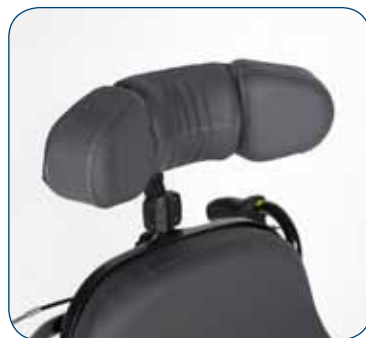

Dreiteilig einstellbare und abnehmbare Kopfstütze mit seitlicher Anpassbarkeit (optional)



Seitenpelotte individuell einstellbar (optional)

Konfigurierbar...








- 24" Polybereifung
- Trommelbremse für Begleitperson
- 16" Hinterräder mit Trommelbremse
- Therapeutisch mit Ellbogenpolstern
- Abduktionskeil
- Seitenpelotte individuell einstellbar
- Dreiteilig einstellbare Kopfstütze
- Positionierungsgurt
- Stumpfauflage
- Distanzkit Armauflage
- Anatomisch geformte Komfort-Armauflage



RelaX²

- Starke Optik
- Hervorragender Komfort
- Multifunktionalität

RelaX²:

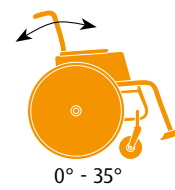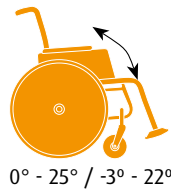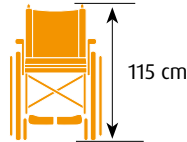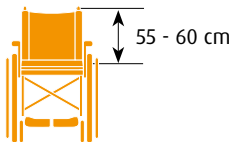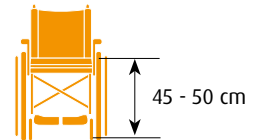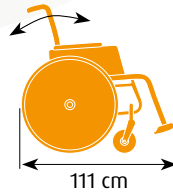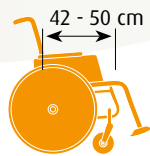

Technische Daten

Rahmenfarbe:	Silber	Gewicht des schwersten Teils:	18 kg
Polsterfarbe:	Dunkelgrau	Max. Neigung mit Anti-Kipp-Rad:	10°
Max. Zuladung:	130 kg	Maximaler Wendekreis:	96 cm
Gewicht:	ab 34 kg		

Weitere Detail-Informationen finden Sie im RelaX² Bestellblatt.



Strack AG
 Ebnatstrasse 125
 8200 Schaffhausen
 Tel. 0800 600 500
 Fax 0800 600 900
 www.strack.ch
 info@strack.ch

strack
 Patienten-
 und Pflegebedarf