

Tango®



A man wearing a light-colored hat, glasses, and a blue vest over a plaid shirt is sitting in a black Quickie Tango electric wheelchair. He is looking back over his shoulder towards the camera. The wheelchair is positioned on a path in a garden with green bushes and yellow flowers. In the background, there is a brick building with several windows.

Tango®

Der neue Elektrorollstuhl Standard!

Geeignet für den Innen- und Aussenbereich

Mit wenigen Handgriffen Komponenten austauschen und Anpassungen vornehmen. Einfache Adaptionen ohne Verzicht auf bewährte Qualität.

Einfaches und robustes Einstiegermodell im mittleren Segment

Schnell und einfach anpassbar und damit vielfältig einsetzbar

Weniger Service, niedrige Instandhaltungskosten = hohe Wirtschaftlichkeit



Der Quickie Tango ist für das Mehr an Sicherheit beim Transport nach ISO 7176-19 Crash getestet. Er ist damit zum Fahrzeug-Transport von Personen im Rollstuhl sitzend zugelassen. Was insbesondere für Fahrdienste, z. B. Fahrten zum Arzt, sehr wichtig ist, da die Patienten damit nicht zwingend in einen Autositz sitzen müssen.



Tango[®]

Der neue Elektrorollstuhl Standard!

Dank einer Vielzahl an Standardfunktionen, den leistungsfähigen Optionen, seiner einfachen Handhabung und seiner Wirtschaftlichkeit, ist der neue Quickie Tango die richtige Wahl für den Innen- und Aussenbereich.

Eine umfangreiche Standard-Konfiguration

- Manuelle Sitzneigungsverstellung
- Manuelle Rückenwinkelverstellung
- Sitz in Breite und Tiefe einstellbar
- Rückenhöhe einstellbar
- Rückenbespannung Velcro anpassbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Rücken für einen kompakten Transport abklappbar
- Gute Leistungen im Innen- und Aussenbereichen
- Kompakte Masse:
 - 58 cm mit 12" Antriebsrad
 - 60 cm mit 14" Antriebsrad



Grosse Auswahl an manuellen und elektrischen Optionen

Zusätzlich zu den Standards bietet der Quickie Tango eine breite Palette an manuellen und elektrischen Optionen. Zum Beispiel elektrische Rückenwinkelverstellung und elektrische Sitzneigung, um den Tango an die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen.

Die manuellen sowie die elektrischen Optionen können auch nach dem Kauf mit den entsprechenden Update-Sets angebaut oder wieder entfernt werden. Also bestens geeignet für den Wiedereinsatz!



Manuelle Fussstützen

Manuell hochstellbare Fussstützen

Elektrische Rückenwinkelverstellung

Manuelle Rückenwinkelverstellung: Gasdruckfeder unterstützt von -3° bis 30°

Elektrische Rückenwinkelverstellung: Joystick gesteuert -3° bis 30°

Elektrische Sitzneigung

Manuelle Sitzneigungsverstellung über Aktuator. Einstellbar 3° bis 25°

Elektrische Sitzneigung von 3° bis 25° über das Bedienpult steuerbar

Wertvolle Standard-Ausrüstung

Der Quickie Tango bietet eine umfassende Standardkonfiguration. Vielseitige Verstellbarkeit, anpassbare Optionen, Fahrkomfort und die Ausrüstung für den sicheren Transport.



Manuelle Sitzneigungsverstellung

Die Sitzneigung kann manuell (mittels Werkzeug) von 0° bis 9° verstellt werden



Manuelle Rückenwinkelverstellung

Der Rückenwinkel ist von -3° bis 12° (in 3° Schritten) ohne Werkzeug anpassbar



Rückenbespannung und -höhe

Die Rückenbespannung ist Velcro anpassbar und die Rückenhöhe kann auf 45, 47.5 und 50 cm eingestellt werden



Sitztiefeeneinstellung

Die Rückeneinheit kann für die Sitztiefeeneinstellung von 42.5 bis 50 cm (2.5 cm Schritten) verstellt werden

Sitzbreiteneinstellung

Sitzbreite über Armauflagen von 40 bis 50 cm anpassbar



Rückenlehne nach vorne klappbar

Für einen kompakten und platzsparenden Transport

Armauflagen höhenverstellbar: Die Standard Armauflage einfach abgestützt kann auch in der Höhe verstellt werden
Fussstützen in der Breite verstellbar: Die Fussstützen können in der Breite um 4 cm nach aussen gesetzt werden



Licht & Blinker

Optionale Lichtanlage und Blinker für die Sicherheit unterwegs!



Spritzschutz für die Antriebsräder

Spritzschutz als Option. Schützt den Benutzer und den Rollstuhl.



Federung der Antriebsräder

Die Antriebsräder sind standardmässig gefedert, um den Fahrkomfort in den Aussenbereichen zu garantieren

Befestigungspunkte

Integrierte und leicht zugängliche Befestigungspunkte hinten und vorne. Für den sicheren Transport im Rollstuhl sitzend

Einfacher Service

Einfache Wartung der Batterien






Komfort Sitzeinheit

Optional auch mit Komfort Sitz und Rücken für eine optimale Positionierung und gute Sitzstabilität



Standard Kopfstütze

Für die Standard Rückenbespannung

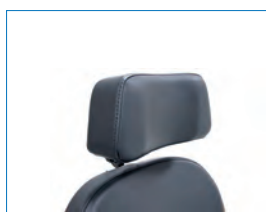

Komfort Kopfstütze

Für den Komfort Rücken



Elektronik

Einfache jedoch effiziente Elektronik erleichtert die Handhabung von Steuerung und Optionen

VR2 programmierbare Elektronik 60A

- VR2 Kontrolleinheit steuert bis zu 2 Antriebe über den Joystick
- Bedienpult mit LED-Anzeige ohne Licht und Blinker
- Bedienpult mit LED-Anzeige mit Licht und Blinker
- Bedienpult seitlich abschwenkbar



Bordstein Steighilfe - Für Kanten bis zu 10 cm

Weitere Optionen

- Rahmenfarbwahl Brillant Silber, Brillant Blau und Brillant Rot
- Antriebs- und Lenkradwahl 12" - 8" oder 14" - 9"
- Stockhalter


Tango®




Sitzeinheit - Anpassmöglichkeiten

Sitztiefe	42.5, 45, 47.5, 50 cm	Sitzneigung elektrisch	3° bis 25°
Sitzbreite	40 bis 50 cm	Rückenhöhe	45 / 47.5 / 50 cm
Sitzhöhe	43 cm (bei 3° Neigung)	Rückenwinkel manuell	-3° bis 12°
Sitzneigung manuell	0°, 3°, 6°, 9°	Armauflage	27 bis 36 cm


Bodenfreiheit

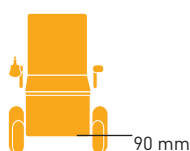

Gesamtbreite
58 cm bei 12" Antriebsrad
60 cm bei 14" Antriebsrad

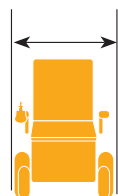


Dynamische Stabilität
Max. Steigfähigkeit

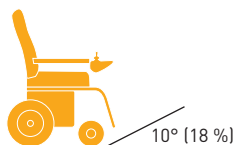

Gesamtlänge inkl. Fussstützen
110 cm



Max. Kantensteigfähigkeit
(mit Bordstein Steighilfe)

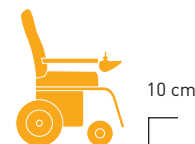

Technische Daten (Standardkonfiguration)

Geschwindigkeit	6 kmh / 10 kmh	Steuerung	VR2
Reichweite	bis 25 km (ISO 7176-4)	Max. Nutzergewicht	125 kg
Batterien	50 Ah	Gesamtgewicht inkl. Batterien	100 kg
Wendekreis	130 cm	Crash getestet nach	ISO 7176-19
		Tarifposition	501 000

Weitere Informationen über die Konfiguration, Optionen und Zubehör siehe Bestellblatt
Technische Änderungen, Preisanpassungen, Druckfehler vorbehalten



Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900
www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf