

ottobock.

eSupport

Der Servoantrieb für mehr
Komfort und Freiheit



Quality for life



Abbildung zeigt eSupport am Avantgarde

So viel Selbstständigkeit wie möglich – so viel Unterstützung wie nötig

Der eSupport ist individuell auf den Nutzer einstellbar. Er ist sicher, ausdauernd und zuverlässig und erhöht spürbar den Komfort. Der eSupport ist sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich einsetzbar. Seine beiden Fahrprogramme lassen sich ganz nach den Bedürfnissen des Kunden konfigurieren. Mit dem Geschwindigkeitsassistenten, der Stabilisierung des Geradeauslaufes und der Servounterstützung bietet er alles für eine optimale Anpassung an den Nutzer. Seine hohe Reichweite von ca. 30 km eröffnet neue Dimensionen und hält genügend Reserven im Alltag vor. Und dank der kurzen Ladezeiten ist er schnell wieder einsatzbereit. Mit dem geringen Gesamtgewicht sowie der einzelnen Komponenten wurde der eSupport transportfreundlich gestaltet. Der Rollstuhl bleibt zudem wie gewohnt faltbar oder kann problemlos in seine Komponenten zerlegt und transportiert werden.

Robust und zuverlässig, einfach in Bedienung und Handhabung – diese Eigenschaften zeichnen den eSupport als individuellen Kraftverstärker aus.

Hauptmerkmale

- Verstärkt die vorhandene Armkraft des Nutzers
- Geradeauslaufstabilisierung
- Antrieb und Elektronik sind in die Antriebsräder integriert
- Individuelle Anpassung der Restkraftverstärkung auf den Nutzer
- Effizienter Antrieb mit Lithium-Ionen-Batterie
- Einfache Adaption
- Faltbar auch mit Antrieb



• eSupport am Ventus



• eSupport am Avantgarde CV

• **Kompatibel mit Rollstühlen der Serien:**

Avantgarde, Ventus, Start
weitere Rollstühle auf Anfrage


Artikel-Nr.: 492E148=00000_K




• Umschalter Indoor-/Outdoor-Modus



• Einfacher Transport

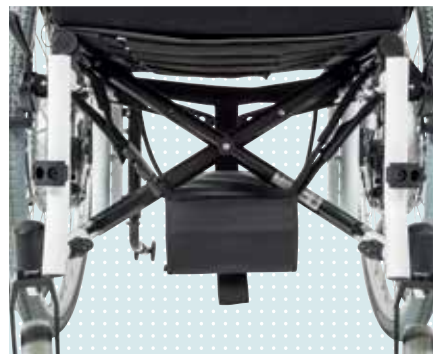

• Niedriger Schwerpunkt durch versteauten Batterie-Pack unter dem Sitz

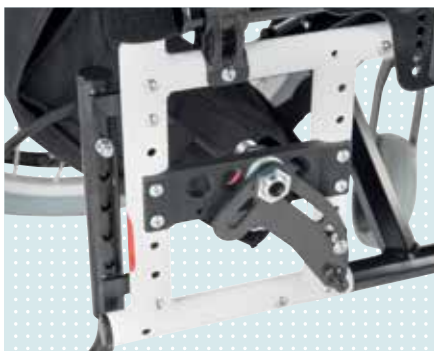

• Adapterplatte



• Kippschutz



• Nabenantrieb

Grundmodell

- Zwei Antriebsräder (pro Antriebsrad 6,9 kg)
- Eine wieder aufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Ein Ladegerät
- Zwei Antriebsadapter mit Drehmomentenstütze
- 24"-Luftbereifung
- Gummierte Greifreifen
- Anbau der Batterie
- Batterietasche
- Kippschutz standardmässig angebaut

Optionen

- Lithium-Ionen-Batterie
- Ladegerät Lithium-Ionen-Batterie
- Speichenschutz transparent (24")

Technische Daten

Geschwindigkeit	6 km/h
Motorenleistung	AC-Servomotor 24V 110 W x 2
Batterie	Lithium-Ionen 11,4 Ah
Ladezeit	4,5 h
Reichweite bis zu	30 km
Gewicht 24"-Antriebsrad ca.	6,9 kg
Gewicht Batterie ca.	3,6 kg
Gesamtgewicht ohne Rollstuhl ca.	17,6 kg
Max. Benutzergewicht	125 kg

Weitere Optionen entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt.

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900
www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf