

## Pflegebett Inovia



## Pflegebett Inovia

### > Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, vierteteilt, mit leicht zu reinigenden und robusten Stahl-Lamellen. Liegehöhenverstellung von ca. 22 - 77 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Rollen paarweise in jeder Liegeflächenposition feststellbar. Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne. Sichere Arbeitslast: 225 kg. Holzumbau in Buche Dekor/Buche massiv.

Fußteil mit Griffleiste aus Massivholz. Holzumbau mit integrierten Seitengittern, Schutzhöhe ca. 43 cm für Matratzen bis 23 cm Höhe. Holzumbau in innovativer/wohnlicher Optik, trotz 55 cm Höhenverstellbereich niedrige Holzhaube im Fußbereich. Linak-Antriebssystem mit 24 Volt-Antriebstechnik, spannungsführende 230 Volt Bauteile außerhalb des Bettes verlagert, selektiv sperrbarer Handschalter mit Einzel-funktions-Sperrungen.

### > Bestell-Nummer

50.5522.24 Pflegebett „Inovia“  
19.1400.1 Aufrichter

### > Maße

Länge 222 cm  
Breite 104 cm

Alternativ auch in 100 cm Liegeflächenbreite lieferbar

### > Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)

(Technische Änderungen vorbehalten)



Serviertablett



Schaumlederbezug für Seitengitter



Leselampen



Geteilte Seitengitter (Beispiel)

ohne Abbildung:

- Bettverlängerung
- Wandabstandshalter
- Holzumbau in Kirsche oder anderen Dekoren

# Inovia – Das Pflegebett mit innovativen Ideen



Griffleiste aus Massivholz

225 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Seitengitter Schutzhöhe von ca. 43 cm für Matratzen bis max. 23 cm



24 Volt-Antriebssystem mit selektiv-sperbarem Handschalter



Fußtieflagerung

Trotz 55 cm Höhen-Verstellbereich niedrige Holzhaube im ansprechenden Wohndesign



Unterschenkellehne manuell einstellbar



Paarweise Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition




Liegehöhenverstellung von ca. 22 - 77 cm, Verstellbereich = 55 cm

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern



auswandernde Rückenlehne

Einfach zu reinigende Liegeflächen-Lamellen

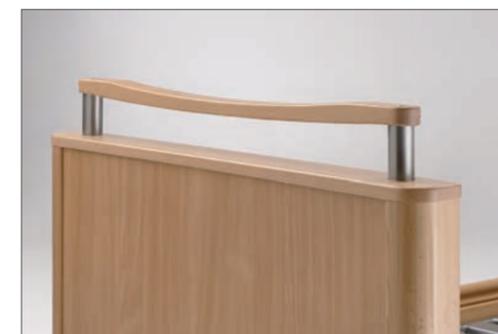

ergonomisch geformte Griffleiste

## Ihre Vorteile:

- **Liegehöhenverstellung von ca. 22 - 77 cm**  
Der innovative Verstellbereich von 55 cm ermöglicht die Nutzung des Pflegebettes als ein Niedrig-Einstiegsbett oder als ein Standard-Pflegebett. Eine Unterscheidung nach der Nutzung ist nicht mehr erforderlich. Ein Bett für alle Fälle.

- **Wirtschaftlichkeit**  
Das Preis-/Leistungsverhältnis ist ausgesprochen günstig. Inovia ist auch die wirtschaftliche Alternative zu hochpreisigen Niedrig-Einstiegsbetten im Markt.

- **24 Volt-Antriebssystem serienmäßig**  
Die Wartungsintervalle können auf 2 Jahre verlängert werden (s. Gebrauchsanweisung). Ableitstrommessungen am Pflegebett im Intervall von 10 Jahren. Bedingungen hierfür können bei Burmeier erfragt werden. Bewohner werden optimal geschützt, da alle spannungsführenden 230 Volt Bauteile außerhalb des Bettes liegen.

- **Sichere Arbeitslast von 225 kg**  
Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.
- **Seitengitterschutzhöhe ca. 43 cm**  
Matratzen und Dekubitussysteme bis 23 cm können auch ohne adaptierbare Seitengittererhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in den meisten Fällen.