

STEBRETT RFH 20.100



Technische Daten

Funktion	stufenlose elektrische Stehfunktion von 0 bis 85°
Antrieb	elektrischer Linearmotor
Steuerung	elektrischer Handschalter
Polsterung	hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung
Bezug	wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder
Rollen	verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit
Abmessungen	Breite: 73 cm Länge: 205 cm minimale Raumhöhe: 210 cm Gewicht: 85 kg
Hebevermögen	sichere Arbeitslast 170 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 135 kg

STEBRETT RFH 20.200



Technische Daten

Funktion	stufenlose elektrische Stehfunktion von 0 bis 85° elektrische Höhenverstellung von 44 bis 84 cm
Antrieb	elektrische Linearmotoren
Steuerung	elektrischer Handschalter
Polsterung	hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung
Bezug	wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder
Rollen	verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit
Abmessungen	Breite: 73 cm Länge: 205 cm Gewicht: 121 kg minimale Raumhöhe: 216 cm
Hebevermögen	sichere Arbeitslast 170 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 135 kg

STEBBRETT RFH

Das Stehbrett ermöglicht neben den bekannten Behandlungsliegenfunktionen ein stufenloses Aufrichten des Patienten aus der liegenden Position bis maximal 85°. Der Patient wird durch drei Haltegurte im Knie-, Becken- und Brustbereich fixiert. Das Gerät erfüllt durch seine hochwertigen Komponenten höchste Qualitätsstandards und zeichnet sich durch sehr gute Standfestigkeit und lange Lebensdauer aus.



*Ausführung
mit positiv und negativ
verstellbarem Kopfteil*



*Ausführung
mit verstellbarer Rückenlehne*

Das Stehbrett gewinnt im ergo- und physiotherapeutischen Bereich auf Grund seiner Vielfältigkeit immer mehr an Bedeutung. Selbstverständlich kann es ebenso als Behandlungsliege genutzt werden.

Ausstattungsöglichkeiten:

- Fahrgestellerhöhung zur besseren Unterfahrbarkeit
- einzeln winkel- und längenverstellbare Fußplatten mit verschiedenen Oberflächen wie Gumminoppenbelag, lackiert oder gepolstert
- Armstützen
- Therapietisch aus Holz oder Plexiglas
- elektrisch verstellbares Kopfteil von 50° positiv bis 40° negativ
- Nasenausschnitt, auch mit Abdeckung
- ein- oder beidseitig verstellbare Pelotten zur Kontraktur-Korrektur
- Liegeflächenschlitz zur Einzelfixierung der Beine
- Kopffixierung
- abweichende Liegeflächenmaße
- höheres Patientengewicht
- 18 verschiedene Standard-Lederfarben

Das Stehbrett ist ein vielseitiges Hilfsmittel zur Patientemobilisierung, speziell in den Fachbereichen der Neurologie, Orthopädie und Chirurgie.

Bei nachfolgenden, verbreiteten, Krankheitsbildern kann sich der Einsatz eines Stehbrettes positiv beschleunigend auf das Therapieziel auswirken:

- Apoplex (Schlaganfall) mit Halbseitenlähmung
- Multiple Sklerose
- Morbus Parkinson
- Wachkoma u.a.

Da ein selbständiges Stehen aus eigener Kraft oft nicht mehr möglich ist, ist das regelmäßige Training mit Hilfe des Stehbrettes unverzichtbar um spürbare Behandlungseffekte zu erzielen.

Einige Beispiele:

- wirkungsvolles Herz- und Kreislauftraining
- Unterstützung bei der Entleerung der oberen Harnwege
- Anregung des Knochenstoffwechsels (Osteoporoseprophylaxe)
- Bekämpfung von Muskelverkürzungen und Tonusregulation
- Verdauungsunterstützung
- Spitzfußtherapie und -vorbeugung
- Förderung der Tiefensensibilität
- regelmäßige ADL-Übungen



Liegeflächenschlitz zur Einzelfixierung

Art.-Nr. 20.029.00.000




Armstützen

Art.-Nr. 20.024.00.000

STEBRETT RFH



winkel- und längenverstellbare Fußplatten
Art.-Nr. 20.021.00.000

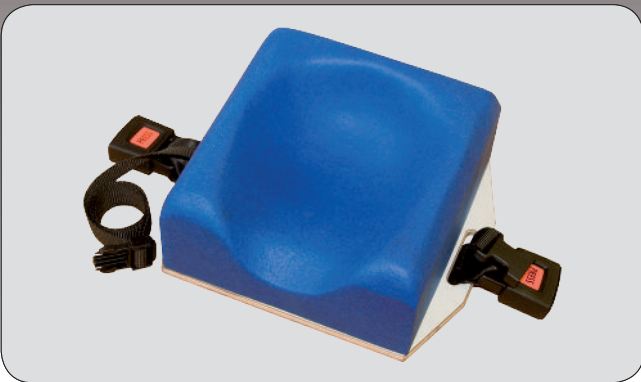

Kopffixierung
Art.-Nr. 20.010.03.000



Therapietisch Holz
Art.-Nr. 20.025.00.000

Therapietisch Plexiglas
Art.-Nr. 20.030.00.000



3-fach verstellbare Hüft- und Oberkörperpelotten
Art.-Nr. 20.033.00.000