




Wechseldrucksystem
zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Produktinformation

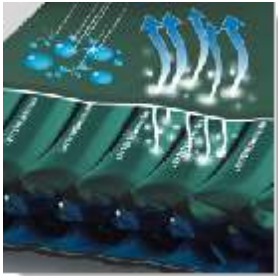

Soft-Care-Text™ Bezug



Nylon-Luftstromkissen



Steuereinheit/ Motor

- großzelliges Wechseldruck-Auflagesystem mit 17 modular aufgebauten Luftzellen aus Polyurethan beschichtetem Nylon
- 3 statische Zellen im Kopfbereich
- verbessertes und angenehmes Mikroklima durch 9 laserperforierte Zellen (Luftstromkissen)
- integrierte Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung
- antiallergener Bezug aus Soft-Care-Text™: atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig, Reibungs- und Scherkräfte werden minimiert, hoher Liegekomfort durch die sehr weichen und angenehmen Eigenschaften des Bezuges
- umlaufender Reißverschluss mit Abdeckung zur sicheren Fixierung des Bezuges und Schutz gegen Verunreinigung der Luftkammern
- CPR-Lasche zur einfachen und schnellen Entlüftung bei Reanimation
- nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb der Steuereinheit mit „Soundless-Air-Room-Technologie“™
- sichere Verbindung von stahlfederverstärkten Luftzufuhrschläuchen und Motor durch spezielle Konnektoren
- abknicksichere Luftzufuhrschläuche
- einfache Einstellung der Patientengewichte von 40 bis 110 kg mittels Drehknopf
- Anzeige des Betriebszustandes durch farbige Leuchtdioden
- optischer Alarm bei zu niedrigem Druck
- luftbefüllt ist die Auflage ca. 14 cm hoch, dadurch ist ein optimales Einsinken des Patienten möglich, durch die vergrößerte Auflagefläche erreicht die SLK I® eine effektive Druckentlastung
- verbesserte elektrische Sicherheit für Patienten und Anwender durch hochwertiges EPR Netzkabel
- VDE-Messpunkt zur Durchführung der VDE 0751-1

Anwendungsgebiet

- Dekubitusprophylaxe und Dekubitustherapie bis Stadium 2 (nach Seiler) unter Berücksichtigung sonstiger Einflussfaktoren
- Steigerung der Durchblutung in der Haut und Steigerung des venösen Rückflusses (reaktive Hyperämie)

Technische Daten

- Steuereinheit: 220 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Maße Aggregat: 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- Maße Auflage: 14 x 90 x 200 cm (H x B x L)

Lieferumfang

- SLK I® Auflage mit Soft-Care-Text™ Bezug und Steuereinheit
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss