

Pflegebadesystem TR 1700



Spezifikation

Länge	1685 mm
Breite	695 mm
Benutzergewicht max.	150 kg
Arbeitshöhe Wanne	660 - 960 mm
Steuerung	Manuelle Bedieneinheit für Höhenverstellung
Netzanschluss	230 V, 50 Hz

Höhenverstellbares Pflegebad TR 1700 Volle Funktionalität für limitierte Platzverhältnisse

Die TR 1700 Pflegebadewanne ist speziell dafür ausgelegt, einen begrenzten Platz optimal auszunutzen ohne auf Funktionalität und Effizienz zu verzichten. Sie ist ideal für Spitäler, Pflegeheime und Privathaushalte mit limitierten Platzverhältnissen, die jedoch eine voll funktionsfähige Pflegebadewanne benötigen.

Die Pflegebadewanne lässt sich in der Höhe verstellen, um die beste Arbeitshöhe zu finden. Das Pflegepersonal braucht sich bedeutend weniger zu bücken und muss nicht schwer heben, was das Risiko von Rückenschäden stark reduziert. Der Freiraum unterhalb der Wanne ermöglicht den Einsatz verschiedenster Liftersysteme und vereinfacht die Bodenreinigung.

Der Thermostat der TR 1700 Pflegebadewanne überwacht die Temperatur beim Badewassereinfluss und bei der Dusche.



Die Höhenverstellung der TR 1700 Pflegebadewanne wird über eine manuelle Bedieneinheit gesteuert, welche von beiden Seiten der Wanne aus bedient werden kann.



Kombiniert mit dem mobilen Patientenlifter TR 9650 entsteht ein leistungsstarkes System, das viel Sicherheit bietet für das Bewegen und Handling des Patienten sowie für den Betreuer.

Während des Bades braucht der Patient zu keinem Zeitpunkt den Komfort und die Sicherheit des Sitzes zu verlassen.

TR 1700

Pflegewanne höhenverstellbar

strack
Patienten-
und Pflegebedarf

Merkmale

Die TR 1700 Pflegebadewanne fährt schnell und leise aufwärts. Die Handsteuerung für die Auf- und Abwärtsbewegung kann von beiden Seiten der Wanne aus bedient werden.

Die Excenter-Ablaufgarnitur wird durch Drehen des Überlaufventils geöffnet. Es ist nicht nötig, in das Wasser hineinzufassen.

Der Thermostat mit Verbrühschutz reguliert den Badewassereinfluss wie auch die Temperatur des Duschwassers.

Die TR 1700 Pflegebadewanne wird mit einer Patientenbrause mit Schlauch geliefert. Die Duschbrause verfügt über einen weichen und einfach zu reinigenden Düsenkopf aus Gummi, der einen angenehm weichen Wasserstrahl erzeugt.



Die Pflegebadewanne besteht aus hochwertigen Materialien, welche auch die Reinigung und Pflege der Wanne selbst vereinfachen. Der Wannenkörper besteht aus weissem, glasfaserverstärktem Kunststoff, der widerstandsfähige Rahmen ist aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.

Der Wannena Ablauf kann wahlweise am Boden oder an der Wand angeschlossen werden.

Verstellbare Füße erhöhen die Sicherheit und den Komfort auf unebenen Untergründen.



Die TR 1700 Pflegebadewanne verfügt über verstellbare Füße für bessere Sicherheit und Komfort auf unebenen Untergründen.

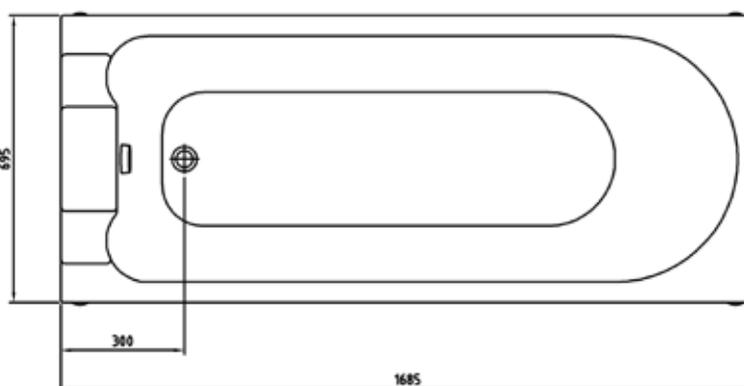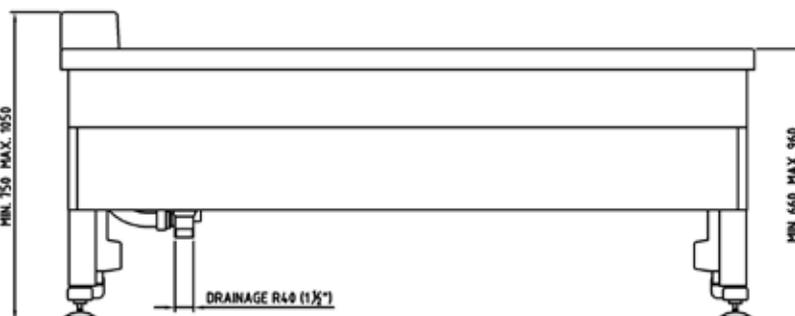

Modell:

TR 1700 Standard

Optionen:

Die Pflegewanne ist auch ohne Armaturen lieferbar

CE Registriertes Medizinprodukt Klasse I
MDD 93/42EEC

Irrtum vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. /STR_201001_004_de

Strack AG
Ebnetstrasse 125, 8200 Schaffhausen

Gratis anrufen 0800 600 500
Gratis Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch