

Ruhe und Aufstehsessel



strack

TOPRO

Ruhe und Aufstehsessel

KOMFORTABLE ENTSPANNUNG IM TRENDIGEN DESIGN


Erleben Sie Komfort und Stil mit der neuen Generation der Aufsteh- und Entspannungssessel von TOPRO. Ob beim Sitzen, Ausruhen oder Fernsehen – unsere hochwertigen Sessel bieten außergewöhnlichen Komfort. Die eingebaute Aufstehhilfe unterstützt Ihre Mobilität in genau dem Maß, wie Sie es wünschen und hebt Sie sicher in den Stand oder lässt Sie sanft in die gewünschte Sitz – oder Liegeposition absinken.



Mit Ihrem Komfort im Blick wurden unsere Sessel entwickelt, um außergewöhnliche Unterstützung für Rücken und Beine zu bieten – dank ergonomisch geformter Sitzflächen, Fuß- und Rückenlehnen.

Die TOPRO Aufsteh- und Relaxsessel fördern die Durchblutung, indem sie das Hochlagern der Beine ermöglichen, wodurch Schwellungen reduziert und das Risiko einer tiefen Venenthrombose (TVT) verringert werden. Zudem bieten sie eine wichtige Lenden- und Haltungsverstärkung, die besonders für Menschen mit Rückenschmerzen oder Arthritis von Bedeutung ist.

Unsere Aufsteh- und Relaxsessel sind in einer Vielzahl moderner Farben und hochwertiger Polsterstoffe erhältlich, mit Funktionen, die Ihren Komfort und Ihre Sicherheit zusätzlich verbessern.

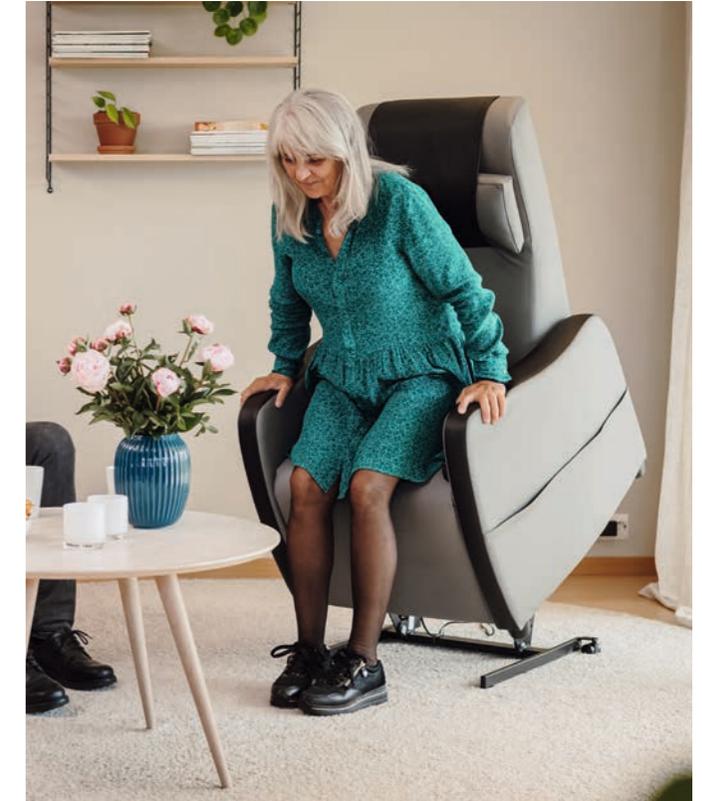

Comfort Basic

AUFSTEHEN UND BEQUEM ENTSPANNEN




Der TOPRO Comfort Basic Ruhe- und Aufstehsessel vereint Gemütlichkeit mit einem hohen Maß an Komfort. Mit seinem Elektromotor gewährleistet er robuste Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen. Er ist erhältlich in der Farbe Tiefschwarz sowie zweifarbig in Blaumarine mit marineblauem Kunstleder an den Armlehnen.

- > Die Fernbedienung mit großen Tasten ist einfach zu bedienen.
- > Der ergonomisch gestaltete Sitz bietet komfortable und sichere Unterstützung für den Rücken und die Beine.
- > Zwei Räder hinten machen den Stuhl bei Bedarf leicht beweglich.
- > Der Stuhl ist mit einem Motor ausgestattet, um Ihnen sicher beim Übergang von einer Sitz- zu einer Liegeposition zu helfen.
- > Ein bequemes Nackenkissen im gleichen Stoff und Farbe wie der Stuhl kann separat bestellt werden.

Die Tasten der Fernbedienung

- A. Aufrecht sitzen + Aufstehunterstützung
- B. Zurücklehnen + Hinsetzunterstützung

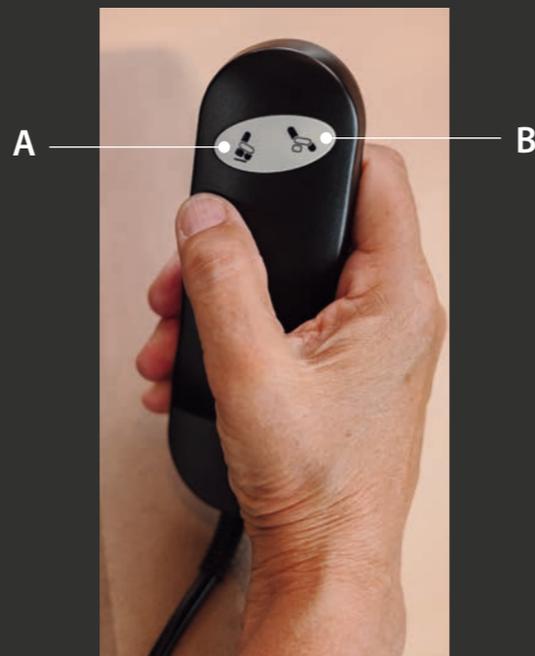

Comfort Basic

AUFSTEHEN UND BEQUEM ENTSPANNEN



Farb- und Polsteroptionen



Kunstleder, schwarz



Kunstleder, zweifarbig marine / schwarz

Zubehör



Kopfstütze, schwarzes Kunstleder

Technische Daten

Belastbarkeit	120 kg
Sesselbreite	67 cm
Sesselhöhe	115 cm
Sesseltiefe	81 cm
Sitzhöhe	51 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	53 cm
Höhe Rückenlehne	76 cm
Artikel-Nr.	8453 + Variantencode

Comfort Plus

LEICHTIGKEIT UND KOMFORT ZU HAUSE




Der TOPRO Comfort Plus Ruhe- und Aufstehsessel ist unser Spitzenmodell mit viel Komfort. Mit einem Doppelmotor bietet er Verstellbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Er ist in einer Reihe stilvoller Optionen erhältlich: Mikrofaser in Beige und Anthrazit, Samt in Schwarz und Kunstleder in Tiefschwarz, Grau und Cremeweiß. Darüber hinaus sind auch zweifarbigen Varianten mit Kunstleder schwarz an der Kopfstütze und an den Armlehnen erhältlich.

- > Die Fernbedienung verfügt über große, einfach zu bedienende Tasten und kann bei Bedarf in der Seitentasche verstaut werden.
- > Ein bequemes Nackenkissen ist standardmäßig enthalten und kann höhenverstellt werden, um den Bedürfnissen des Benutzers gerecht zu werden.
- > Der ergonomisch gestaltete Sitz bietet komfortable und sichere Unterstützung für Rücken und Beine.
- > Zwei hintere Räder machen den Sessel bei Bedarf leicht beweglich.
- > Der Doppelmotor ermöglicht die unabhängige Verstellung der Rückenlehne und der Fußstütze und sorgt so für individuellen Komfort.
- > Eine Akku-Option kann separat bestellt werden und ermöglicht eine flexible Positionierung des Stuhls.

Die Tasten der Fernbedienung

- A. Fußstütze anheben
- B. Fußstütze senken + Aufstehhilfe
- C. Rückenlehne neigen
- D. Rückenlehne anheben
- E. Aufstehhilfe
- F. Setzhilfe + Fußstütze anheben

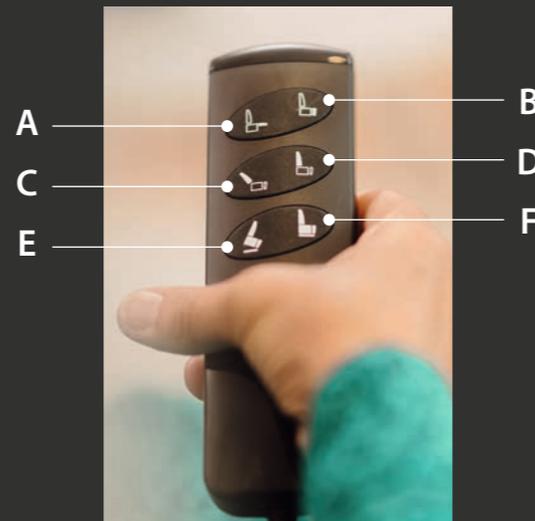

Comfort Plus

LEICHTIGKEIT UND KOMFORT ZU HAUSE



Farb- und Polsteroptionen



Mikrofaser, beige



Kunstleder, cremeweiß



Kunstleder, schwarz

Varianten mit Duo Farbe / Polsterung



Kunstleder, grau / schwarz



Mikrofaser / Kunstleder, anthrazit / schwarz



Microsamt / Kunstleder, schwarz

Technische Daten

Belastbarkeit	120 kg
Sesselbreite	76 cm
Sesselhöhe	116 cm
Sesseltiefe	90 cm
Sitzhöhe	52 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	52 cm
Höhe Rückenlehne	76 cm
Artikel-Nr.	8454 + Variantencode
Zubehör	TOPRO Comfort Plus Battery

Comfort XL

AUFSTEHEN UND SICH BEQUEM ZURÜCKLEHNEN



Der TOPRO Comfort XL ist einer der bequemsten und anpassungsfähigsten Ruhe- und Aufstehsessel von TOPRO. Er wurde speziell entwickelt, um Nutzern mit einer größeren Statur optimalen Komfort zu bieten und ihre Mobilität sowie Unabhängigkeit zu fördern. Die Aufstehfunktion ermöglicht ein sicheres Aufstehen mit minimalem Kraftaufwand und entlastet dabei Gelenke und Muskeln. Die Relaxfunktion erlaubt es, die bequemste Position für Entspannung, Lesen oder Schlafen zu finden. Der Comfort XL Sessel ist in Kunstleder in den Farben Grau und Cremeweiß erhältlich.

- > Die Fernbedienung verfügt über große, einfach zu bedienende Tasten und kann bei Bedarf in der Seitentasche verstaut werden.
- > Der ergonomisch gestaltete Sitz bietet komfortable und sichere Unterstützung für Rücken, Arme und Beine.
- > Der Sessel ist mit vier Motoren ausgestattet, die eine unabhängige Verstellung der Rückenlehne und der Fußstütze ermöglichen. Zudem kann die Zero-Gravity-Position nach hinten geneigt werden, um die Durchblutung zu fördern und individuellen Komfort zu gewährleisten.
- > Die Schwerelosigkeitsfunktion hilft, Druckgeschwüre zu vermeiden, da die Sitzneigung den Druck auf das Gesäß beim Sitzen wirksam reduziert.



Die Fernbedienungstasten



Comfort XL

AUFSTEHEN UND SICH BEQUEM ZURÜCKLEHNEN



Technische Daten

Belastbarkeit	250 kg
Sesselbreite	99 cm
Sesselhöhe	111 cm
Sesseltiefe	90 cm
Sitzhöhe	50 cm
Sitzbreite	75 cm
Sitztiefe	50 cm
Höhe Rückenlehne	70 cm
Artikel-Nr.	8455XL + Variantencode



Farb- und Polsteroptionen



Kunstleder, grau



Kunstleder, cremeweiß



Der TOPRO Cortina besticht durch ein elegantes, modernes Design und bietet Gemütlichkeit, Komfort und Sicherheit. Die Aufsteh- und Hinsetzhilfe sorgt für sanfte und sichere Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen. Dieses Modell verfügt über eine integrierte Sitzheizung für zusätzlichen Komfort, falls Ihnen oft kalt ist. Zudem ist es mit einer Schwerelos-Funktion ausgestattet, die hilft, Druckgeschwüre zu vermeiden. Die praktische Drehfunktion ermöglicht eine Rotation um 180 Grad.

- › Ausgestattet mit drei Motoren, bietet der Cortina höchsten Komfort und eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten für die unabhängige Verstellung von Rückenlehne und Fußstütze. Dadurch kann jeder seine persönliche Lieblingsposition zum Sitzen, Entspannen, Liegen oder Fernsehen finden.
- › Die Fernbedienung verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und kann bei Bedarf in der Seitentasche verstaut werden.
- › Die Kopfstütze lässt sich leicht von Hand verstellen, was besonders für Personen mit beispielsweise abgerundeten Schultern vorteilhaft ist.
- › Die integrierte Aufsteh- und Hinsetzhilfe bietet sanfte und sichere Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen.
- › Die Schwerelos-Funktion hilft, Druckgeschwüre zu vermeiden, da die Sitzneigung den Druck auf das Gesäß beim Sitzen effektiv reduziert.
- › Neben Zeitschriften und Büchern können die seitlichen Taschen auch zur Aufbewahrung eines Telefons oder der Fernbedienung genutzt werden.
- › Auf der linken Seite sind zudem zwei USB-Anschlüsse integriert, um ein Telefon, Tablet oder eine Leselampe aufzuladen.
- › Der ergonomisch gestaltete Sitz bietet eine bequeme und sichere Unterstützung für Rücken und Beine.

Farb- und Polsteroptionen



Velours, Graphit

Kunstleder, Titan

Kunstleder, Schwarz

Die Fernbedienungstasten

Aufrecht sitzen

Bringt den Sessel vom Liegen oder Hinsetzen aus dem Stand, in eine aufrechte Sitzposition.

Ruhen

Führt den Sessel in die gewünschte Liegeposition.

Richtig positionieren

Individuelle Einstellung der Fußstützen.

Schwerelos-Funktion

Stellen Sie die Sitzkantung nach Ihren Bedürfnissen ein und entlasten Sie sich.

Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.



Sitzheizung

Schalten Sie die Sitzheizung im Lenden- und Sitzbereich ein und aus.

Rückenlehne

Stellen Sie die Rückenlehne individuell ein.





Entspannung in der bequemen Ruheposition.



Die Schwerelos-Funktion – eine Wohltat für Kreislauf und Venen.



Schnelle Ausrichtung zum Zentrum des Geschehens durch 180°-Drehung.



Das Kopfteil der Lehne kann einfach verstellt werden.



An den USB-Steckplätzen können Handy, Tablet und Leselampe geladen werden.



Die Fußstütze kann unabhängig von der Rückenlehne eingestellt werden.

Details und Funktionen



Sichere Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen.

Technische Daten

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	80 cm
Sesselhöhe	122 cm
Sesseltiefe in Liegeposition	165 cm
Sitzhöhe	50 cm
Sitzbreite	52 cm
Sitttiefe	49,5 cm
Höhe Rückenlehne	80 cm
Artikel-Nr.	8861H + Variantencode

Bologna

KOMFORT UND FUNKTION

Die multifunktionale TOPRO Bologna Ruhe- und Aufstehsessel vereint Komfort und modernes Design. Er wurde speziell für den Einsatz in Pflegeheimen, betreuten Wohneinrichtungen und für Menschen entwickelt, die zu Hause Pflege benötigen.

- › Ideal geeignet für den einfachen und sicheren Transfer im Sitzen oder Liegen, durch herab-senk-bare Armlehnen.
- › Sesselhöhe um 20 cm verstellbar und damit gut für die Pflege oder das Essen am Tisch geeignet.
- › Vier Motoren für höchsten Komfort; vom Sitzen bis zum Aufstehen und Herz-Waage-Position.
- › Die für gute Kraftübertragung ideal positionierten Schiebegriffe an der Rückenlehne erleichtern das Verschieben des Sessels mit Person innerhalb der Räumlichkeiten.
- › Beide Hinterräder sind mit Bremsen ausgestattet.
- › Hochwertiger Kunstlederbezug, der sich leicht reinigen lässt und zudem feuerresistent ist.
- › Die Fernbedienung ist rechts und links montierbar.


Für den zusätzlichen Komfort sind optional erhältlich:

- › Batterien für größere Mobilität im Haus.
- › Tragbarer Funkalarm.
- › Einstellkissen zum Anpassen der Sitztiefe oder -höhe und Lumbalkissen in Sesselfarbe.


Farb- und Polsteroptionen



Kunstleder, Sand

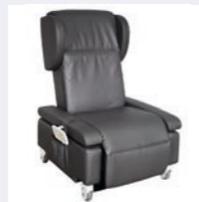

Kunstleder, Titan

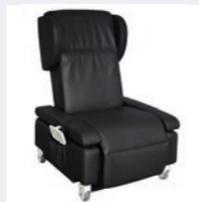

Kunstleder, Schwarz

Tastensperre

Ermöglicht eine individuelle Freischaltung/Sperrung der einzelnen Tasten.

Alarm

Löst ein akustisches Warnsignal im Raum aus. Optional auch mit Funkalarm.

Höhenverstellung

Passt den Sessel an die jeweilige Höhe von Betten und Stühlen an.

Sicherungspin

Schützt vor Verletzungen; bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.

Transportfunktion

Die Fußstütze wird ausgefahren, um einen optimalen Transport zu ermöglichen.

Aufsteh-Alarm

Akustisches Warnsignal ertönt, sobald der Nutzer aufsteht. Optional mit Funkalarm.



Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Herz-Waage-Position

Dient der Entlastung der Venen.



Bologna

KOMFORT UND FUNKTION



Die Höhenverstellung um bis zu 20 cm bietet viele Möglichkeiten beim Transfer.

Technische Daten

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	78.1 cm
Sesselhöhe	118 cm
Sesseltiefe in Liegeposition	179 cm
Sitzhöhe	51-71 cm
Sitzbreite	53 cm
Sitztiefe	54.6 cm
Höhe Rückenlehne	77 cm
Artikel-Nr.	HC13015 + Variantencode



Die Armlehnen sind für den Transfer absenkbar.



Die Kopflehne ist vom Pfleger separat und leicht anpassbar.



Sitzhöhe und Sitztiefe sind durch das einlegbare Kissen aus Memoryschaum einfach anpassbar.



Details und Funktionen



Einklettbares Lumbalkissen, variabel in der Höhe.



Armlehngriffe zur Erleichterung beim Aufstehen.



Bremsbare Räder hinten.

Premium Ruhe- und Aufstehsessel:

Verkäufer:



TOPRO Industri AS

Rambekkevegen 1

2816 Gjøvik

Norwegen

Tel. (+47) 61 13 46 00

info@topromobility.com

www.topromobility.com

Vertrieb durch:



TOPRO GmbH

Torellstraße 1 (Besuchsadresse, nicht für Waren)

10243 Berlin

Deutschland

Tel: +49 (0) 8141 88 89 39-0

Fax: +49 (0) 8141 88 89 39-22

E-Mail: cs@topro.de

www.topromobility.com



Mehr entdecken



topromobility.com

TOPRO bürgt für höchste Qualität und bietet 2 Jahre Garantie.

Qualitätssicherungsnormen

EN ISO 9001 – Qualität

EN ISO 14001 – Umwelt

EN ISO 13759 – Möbel – Antriebsmechanismus

Händler