

Bad & WC.

Für die ganz
persönliche Freiheit.



Wir gestalten Mobilität.

Intelligente Hygiene – Made in Germany.

Oft sind es ja die alltäglichen Dinge, die Menschen mit Bewegungseinschränkungen und auch deren Helfer herausfordern – gerade in Bereichen wie Bad & WC sind deshalb verschiedene Hilfsmittel sinnvoll und im wahrsten Sinne des Wortes hilfreich.

Unter den beiden Marken »**DIETZ SmartCare**« im Premiumsegment und »**TOMTAR**« ist die Bad & WC Produktpalette darauf ausgerichtet, den ganz individuellen Ansprüchen der Kundinnen und Kunden in vollem Umfang zu genügen und gleichzeitig den Anforderungen von Pflege und Reha in der täglichen Versorgung gerecht zu werden. Entscheidende Faktoren sind dabei Funktionalität, Ergonomie und eine optimale Bedienbarkeit.

Mit innovativen Konzepten und intelligenten Lösungen, leistet DIETZ damit einen wichtigen Beitrag für einen mühelosen Alltag und berücksichtigt das Recht der betroffenen Personen auf Würde, Respekt und Wahrung der Intimsphäre.



SilverLine-Technologie.




Innovative Lösungen, Inspiration: Natur.

Gesundheitsschutz ist ein zunehmend wichtiger Aspekt in der Alltags-hygiene. Die patentierte SilverLine-Technologie hilft dabei. Sie erzielt mit den hinzugefügten Silberpartikeln eine antibakterielle, auch gegen multiresistente MRSA-Keime aktive Wirkung bei allen SilverLine-Hygiene-produkten. 99,9 Prozent der Keime und Erreger werden zuverlässig vernichtet. So unterstützt die SilverLine-Technologie aktiv die Vorbeugung bakterieller Infektionen.

Bionik als Basis für Ihren optimalen Gesundheitsschutz.

Biologie und Technik, kurz: Bionik. Das bedeutet abgucken bei den Profis. Denn wer genau hinschaut, entdeckt überall in der Natur Lebewesen oder Stoffe, die sich durch einzigartige, äußerst nützliche Eigenschaften auszeichnen. Was die Natur uns vormacht, übertragen unsere Experten in die Technik. Bei der Entwicklung unserer Produkte setzen wir auf innovative Materialien und intelligente Technologien nach dem Vorbild der Natur – und gestalten so den täglichen Schutz Ihrer Gesundheit für Sie noch einfacher und komfortabler.

Die SilverLine-Technologie ist eine gemeinsame Entwicklung von DIETZ SmartCare und dem Fraunhofer Institut für Chemische Technologie.

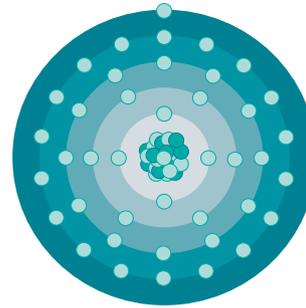

Silberionen.

Antibakterielles Material.

Durch fortschrittliche Additiv-Technologie gelang es dem Fraunhofer-Institut, Silberpartikel in das Kunststoffmaterial einzubetten. Dadurch wird eine antibakterielle, **auch gegen multi-resistente MRSA-Keime** aktive Wirkung erzielt und bakteriellen Infektionen vorgebeugt. 99,9 Prozent der Keime und Erreger werden zuverlässig vernichtet.

Ihr Vorteil.

Durch diese patentierte SilverLine-Technologie unterstützen alle SilverLine-Produkte von DIETZ SmartCare aktiv Ihren Gesundheitsschutz.



Lotuseffekt.

Die Natur als Vorbild.

Die Oberflächen- und Materialstruktur unserer DIETZ SmartCare-Produkte ist wasser- und schmutzabweisend – ähnlich dem Lotuseffekt, der das Abperlen von Wassertropfen auf den Blättern der Lotusblume umschreibt. Schmutzpartikel bleiben im Wasser gebunden, haften nicht an der Produktoberfläche und werden mit dem Wasser einfach weggespült.

Made in Germany.

KANJO SilverLine

Badewannenlifter



- **Batterietechnologie:**
Lithium-Ionen mit 4 Zellen
- **Handschalter mit Schnellladetechnologie** (1 h Ladezeit)
- **Höchste Kapazität vorhanden:**
7 Zyklen bei 140 kg
- **Ladegerät mit ultimativer Schaltnetzteiltechnologie**
- **Unschlagbare Fahrgeschwindigkeit:**
30–40 % schneller als vergleichbare Modelle



inkl. Bezügen in Aquamarin, antibakteriell

KANJO SilverLine

Sitzfläche T x B x H (mm)	500 x 375/710 (m. Seitenklappen) x 65–455
Rückenlehne B x H (mm)	350 x 680
Standfläche B x T (mm)	220 x 530
Max. Belastbarkeit (kg)	140
Gewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,9

Der KANJO SilverLine bietet die perfekte Hygiene beim Baden. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen und per Knopfdruck einstellbare Liegepositionen ermöglichen entspannten Badekomfort.

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte
- Handsteuerung »POWER«
- Belastbar bis 140 kg

Modell mit Handsteuerung »Power«

- 4-Zellen-Lithium-Ionen
- Schnellladetechnologie (1 h Ladezeit)
- Höchste Kapazität: 7 Zyklen bei 140 kg
- Ultimative Schaltnetzteiltechnologie
- Fahrgeschwindigkeit: 30–40 % schneller als vergleichbare Modelle



KANJO Power / Eco

KANJO XL

Badewannenlifter

Der KANJO in den beiden Leistungsklassen »Eco« und »Power« schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen und per Knopfdruck einstellbare Liegepositionen ermöglichen entspannten Badekomfort. Die dazu wählbaren Bezüge aus reißfestem Material in Blau bieten ein zusätzliches Plus an Komfort.

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte
- Belastbar bis 140 kg

KANJO XL

- Erhöhte Belastbarkeit bis 170 kg

	KANJO Power /Eco	KANJO XL
HMV-Nr.	04.40.01.0060	04.40.01.0065
Sitzbreite (mm)	375/710 (mit Seitenklappen)	375/710 (mit Seitenklappen)
Sitztiefe(mm)	500	500
Sitzhöhe (mm)	65-455	65-455
Rückenlehne B x H (mm)	350 x 680	350 x 680
Standfläche B x T (mm)	220 x 530	220 x 530
Max. Belastbarkeit (kg)	140	170
Gewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,8	11,5



KANJO Power/Eco
mit Bezügen in Blau



KANJO Power/Eco
ohne Bezüge



KANJO XL
mit vollflächigen
Bezügen in Blau

KANJO Power / Eco KANJO XL

Badewannenlifter

Handsteuerung für alle Modelle.

Mit Öse zum leichten Einhängen in die dafür vorgesehenen Aussparungen an der rechten oder linken Seite der Rückenlehne.

Wahlweise mit der Handsteuerung

- »Power« mit 4-Zellen-Lithium-Ionen
- »Eco« mit 3-Zellen-Lithium-Ionen



Ausführungen

Badewannenlifter

KANJO »Power« ohne Bezüge
KANJO »Power« Standardbezüge in Blau
KANJO »Eco« ohne Bezüge
KANJO »Eco« Standardbezüge in Blau
KANJO XL Vollflächige Bezüge in Blau

Drehhilfe Dreh- und Übersetzhilfe

für Badewannenlifter

Der Drehteller wird einfach auf den Sitz des Badewannenlifters gelegt. Man nimmt von außerhalb der Badewanne die Sitzposition ein, hebt die Beine an und senkt sie nach einer Drehung bequem in die Wanne und wieder zurück.

Bei der Dreh- und Übersetzhilfe gleitet der Drehteller auf einer flexiblen Transferschiene zwischen Badewannenrand und Badenwannenlifter, was das Einsteigen in die Wanne nochmals einfacher und sicherer macht.



Drehhilfe, blau



Dreh-/Übersetzhilfe, blau

	Drehhilfe	Dreh-/Übersetzhilfe
HMV-Nr.	22.29.01.0023	22.29.01.0022
Farbe	Blau	Blau
Gesamtmaße L x B x H (mm)	320 x 320 x 22	411 x 320 x 22
Sitzfläche (Ø in mm)	320	320
Max. Belastbarkeit (kg)	140	140
Gewicht (kg)	1,1	1,3

TAYO SilverLine

Duschstuhl



Stuhl mit Armlehnen und Sitzpad

Das Premium-Modell »TAYO SilverLine« bietet zusätzlich zur TAYO Serie folgende Vorteile:

- Bakterien haben keine Chance dank Silber-Ionen
- 99,9% aller Keime & Erreger werden zuverlässig vernichtet
- Softtouch Oberfläche mit Lotus-Effekt ist sehr leicht zu reinigen
- Keine unangenehme Geruchsentwicklung

TAYO SilverLine

Farbe	Lichtgrau / Stuhlbeine Schwarz
Sitzbreite (mm)	420
Sitzhöhe (mm)	440-590
Gesamtmaße (B* x L) (mm)	530-545 x 500-520
Max. Belastbarkeit	130
Gewicht (kg)	4,58

* Min. bis max. Auszug der Beine **ohne Armlehnen

TAYO

Duschhocker/-stuhl Serie



Stuhl mit Armlehnen



Hocker mit Armlehnen



Hocker

Die neue Duschhocker/-stuhl-Serie »TAYO« überzeugt in einem modularen Design mit sinnvoll gestalteten Komponenten. Das einfache Stecksystem erlaubt alle Varianten, ob mit oder ohne Armlehnen, als Stuhl oder als einfacher Hocker. Der Hygieneausschnitt lässt sich durch ein Umstecken der Rückenlehne nach vorne oder hinten ausrichten. Alle Modelle können optional mit einem abnehmbaren Sitzpad und Abdeckkappen für die nicht verwendeten Rückenlehnen-Aussparungen im Sitz ausgestattet werden.



Sitzpad (optional)

Hautfreundliches Sitzpolster mit mittlerer Aussparung, über die das Wasser leicht abfließen kann. Einfach zu befestigen und wieder zu entfernen.



Abdeckkappen, 2er-Set (optional)

Zur formschlüssigen Abdeckung nicht benötigter Aussparungen in der Sitzfläche.

TAYO

HMV-Nr.	04.40.03.1028		04.40.03.2045
Variante	Hocker	Hocker/Arml.	Stuhl / Stuhl/Arml.
Farbe	Weiß / Stuhlbeine Silber matt		
Sitzbreite (mm)	420/500**		
Sitzhöhe (mm)	440-590		
Gesamtmaße (B* x L) (mm)	530-545 x 500-520		
Max. Belastbarkeit	130		
Gewicht (kg)	3,3	3,92	3,96 4,58

TAYO & TAYO SilverLine

Duschhocker dreieckig

Abgestimmt auf ergonomische Anforderungen vermittelt der TAYO Duschhocker mit Sattelsitz höchsten Komfort bei kompakten Maß. Der sowohl vorne und hinten einsetzbare Hygieneausschnitt erleichtert die tägliche Körperpflege.



TAYO dreieckig SilverLine



TAYO dreieckig

TAYO & TAYO SilverLine

Duschhocker rund

Kompaktes Maß, hochsicherer Stand: Der TAYO Duschhocker rund ist eine zuverlässige, stabile Unterstützung bei der täglichen Körperhygiene. Wahlweise mit Drehteller inklusive Softpad für noch mehr Komfort.



TAYO rund SilverLine



TAYO rund SilverLine
inkl. Drehteller und Pad



TAYO rund



TAYO rund inkl.
Drehteller und Pad

TAYO

Variante	dreieckig, SilverLine	dreieckig
Sitzbreite (mm)	380	
Sitztiefe (mm)	340	
Sitzhöhe (in mm)	440-590	
Standfläche * BxT (mm)	430-450 x 395-410	
Max. Belastbarkeit (kg)	130	
Gewicht (kg)	2,1	2,1

*Min. bis max. Auszug der Beine

TAYO

Variante	rund, SilverLine	rund, Silv.L., mit Drehh.	rund	rund, mit Drehhilfe
Sitzhöhe (mm)	440-590	450-600	440-590	450-600
Sitzfläche (Ø in mm)	320			
Standfläche* (Ø in mm)	440-470			
Max. Belastbarkeit (kg)	130			
Gewicht (kg)	2,1	2,7	2,1	2,7

TOMTAR DS / DH

Duschstuhl/-hocker



Bequem und sicher: In zwei Varianten garantieren der höhenverstellbare Duschstuhl und Duschhocker höchsten Komfort. Dabei sind sie nicht nur sehr ökonomisch, sondern auch effizient und platzsparend.

- Sicherer Stand, hohe Stabilität
- Glatte Oberfläche für leichte Reinigung
- Belastbar bis 100 kg



TOMTAR DH
Duschhocker, höhenverstellbar



TOMTAR DS
Duschstuhl, höhenverstellbar

TOMTAR DH

TOMTAR DS

Sitzfläche T x B x H (mm)	290 x 500 x 390-490	290 x 500 x 390-490
Maße L x B x H (mm)	380 x 500 x 420-520	420 x 500 x 720-820
Gewicht (kg)	2,0	2,8

TOMTAR

Comfort

Duschhocker



Starke Sicherheit: Mit seiner gepolsterten Sitzfläche bietet Ihnen der Duschhocker Schutz und Komfort auf höchstem Niveau.

- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Einfaches Handling durch geringes Eigengewicht
- Komfortable Polsterung
- Rutschfeste Gummifüße
- 5-fach höhenverstellbar
- Belastbar bis 160 kg



Comfort Duschhocker

Comfort Duschhocker

HMV-Nr.	04.40.03.1010
Sitz T x B x H (mm)	405 x 440 x 460-560
Maße L x B x H (mm)	500 x 550 x 630-730
Gewicht (kg)	3,7



SmartFix

Toilettensitzerhöhung

Komfortable Hygiene. Minutenschnell montiert.

Im Handumdrehen ergonomisch und hygienisch von oben fest an der Keramik montiert!

Individuell anpassbare Sitzsicherheit.

Die Toilettensitzerhöhung SmartFix kann in der Höhe um 80, 120 oder 150 Millimeter angepasst werden. Die seitlich befestigten Armlehnen dienen der Sicherheit und dem Komfort. Sie können bei Bedarf nach oben abgeklappt werden und erleichtern so den Transfer der Nutzer*innen.

	SmartFix	SmartFix	SmartFix
Modell	SilverLine	mit Armlehnen	ohne Armlehnen
Sitzhöhe (mm)	80/120/150	80/120/150	80/120/150
Armlehnenhöhe (mm)	200	200	-
Öffnung L x B (mm)	255 x 195	255 x 195	255 x 195
Maße L x B x H (mm)	497 x 560 x 377	497 x 560 x 377	497 x 445 x 177
Gewicht (kg)	4,2	4,2	2,82
Arml. belastbar bis (kg)	60	60	-
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120



SmartFix SilverLine mit Armlehnen.



SmartFix mit Armlehnen

SmartFix ohne Armlehnen

- Erhöhung um 80, 120 oder 150 mm
- Schnellmontage von oben auf die Keramik
- Für alle üblichen WC-Becken
- Anatomisch geformte Sitzmulde mit großen Hygieneausschnitten vorn und hinten
- Belastbar bis 120 kg
- Bei geschlossenem Deckel als bequeme Sitzgelegenheit nutzbar

Relaxon SilverLine

Toilettensitzerhöhung



Flexible Sicherheit: Die Relaxon Toilettensitzerhöhungen bieten höchsten Sitzkomfort bei einer sehr einfachen Montage. So müssen Sie auch auf Ihren Reisen nicht auf die gewohnte Sicherheit bei der Alltagshygiene verzichten.

- Aufsatz aus hochwertigem Kunststoff
- Anatomisch geformter Sitz
- Für alle üblichen WC-Becken
- Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- Schnellmontage ohne Werkzeug, reisefähig
- Belastbar bis 200 kg
- Erhöhung um 100 mm

Relaxon SilverLine

Sitzhöhe (mm)	100
Öffnung L x B (mm)	277 x 205
Maße L x B x H (mm)	400 x 370 x 100
Gewicht (kg)	1,4

Relaxon

Toilettensitzerhöhung



- Aufsatz aus hochwertigem Kunststoff
- Anatomisch geformter Sitz
- Für alle üblichen WC-Becken
- Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- Schnellmontage ohne Werkzeug, reisefähig
- Belastbar bis 200 kg
- Erhöhung um 100 mm
- Mit oder ohne Deckel erhältlich

Relaxon

	33.40.01.0069	33.40.01.0070
HMV-Nr.	33.40.01.0069	33.40.01.0070
Ausstattung	ohne Deckel	mit Deckel
Sitzhöhe (mm)	100	100
Öffnung L x B (mm)	277 x 205	277 x 205
Maße L x B x H (mm)	400 x 370 x 100	400 x 370 x 100
Gewicht (kg)	1,0	1,4

Bano

Badewannendrehstuhl



Der flexible Badewannendrehstuhl bietet erhöhte Bewegungsfreiheit und kann durch seine Verstellmöglichkeit auch in übergroßen Badewannen eingesetzt werden.

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Verstellbare Breite: 740–800 mm
- 90° drehbar
- Belastbar bis 120 kg



Bano

HMV-Nr.	04.40.02.3010
Sitz B x T (mm)	400 x 400
Gesamtmaß L x B x H (mm)	570 x 700–840 x 545
Max. Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	6,3

TOMTAR

9403-A / 9403-B

Badewannensitz



9403-B
Mit Rückenlehne



9403-A
Ohne Rückenlehne

Ganz nach Ihrem Format: Ergonomische Badewannensitze mit Hygieneausschnitt zur Verringerung der Wannensitztiefe bieten Ihnen bequemes und sicheres Badevergnügen.

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Große, ergonomisch gepolsterte Sitzfläche
- Intimausschnitt aus hochwertigem Kunststoff
- Belastbar bis 120 kg

9403-A

9403-B

HMV-Nr.	04.40.02.1006	04.40.02.2007
Sitz T x B (mm)	400 x 400	400 x 400
Einstellbreite (mm)	475–635	475–635
Gesamtmaß L x B x H (mm)	420 x 735–890 x 285	560 x 735–890 x 430
Gewicht (kg)	2,7	3,6

9400er-Serie



Duschstuhl, -hocker und -klappsitz

Ob als Duschstuhl, Duschhocker oder Duschklapsitz – die verschiedenen Ausführungen mit hoher Funktionalität werden den vielseitigen Anforderungen der Pflege mehr als gerecht.

- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Füße mit Gummikappen, 4-fach verstellbar
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Problemlose Reinigung
- Belastbar bis 120 kg



9400-A
Duschstuhl mit
Armlehnen, faltbar



9401-A
Duschstuhl mit
Armlehnen



9402-A
Duschhocker mit
Armlehnen



9404-A
Duschklapsitz zur
Wandmontage, faltbar

9400-A

9401-A

HMV-Nr.	04.40.03.2009	04.40.03.2010
Sitz T x B x H (mm)	400 x 400 x 460-530	400 x 400 x 460-530
Maße L x B x H (mm)	530 x 525 x 880-950	520 x 525 x 860-930
Gewicht (kg)	4	3,25

9402-A

9404-A

HMV-Nr.	04.40.03.1007	04.40.03.0016
Sitz T x B x H (mm)	400 x 400 x 460-530	400 x 400 x 470-570
Maße L x B x H (mm)	440 x 535 x 640-710	490 x 470 x 470-570
Gewicht (kg)	2,75	2,9

Levina 320-2 / 400-2



Duschoilettenstuhl

Für die gepflegte Hygiene: Die stabilen, leichten und komfortablen Duschoilettenstühle bieten Ihnen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Levina – auf einen Blick

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Vier 5"-Schwenkrollen (zwei Feststeller)
- Maximale Überfahrhöhe 435 mm
- Option: Höhenadapter 50 mm
- Einsatz für geschlossene Sitzfläche
- Abschwenkbare und abnehmbare Beinstützen
- Armlehne und Sitzfläche gepolstert
- Ergonomisch geformte Rückenlehne
- Belastbar bis 120 kg
- Levina 400-2: zusätzlich mit Antriebsrädern und Lenkrollen

Sonderzubehör

- Eimer aus hochwertigem Kunststoff



Levina 320-2



Levina 400-2

Levina 320-2

HMV-Nr.	18.46.03.1060
Sitz T x B x H (mm)	420 x 440 x 530
Seitenteilhöhe (mm)	225
Maße L x B x H (mm)	885 x 555 x 930
Gewicht (kg)	11,5

Levina 400-2

HMV-Nr.	18.46.03.0044
Sitz T x B x H (mm)	420 x 440 x 530
Seitenteilhöhe (mm)	225
Maße L x B x H (mm)	1020 x 635 x 930
Gewicht (kg)	17

TSU-2 / TSU-4

Toilettenstuhl universal

Der bewährte Toilettenstuhl garantiert Komfort und Schutz im Hygienebereich. Klappbare Armlehnen unterstützen die leichte Versorgung in der häuslichen und stationären Pflege.

Der »**TSU-4**« besitzt Feststellbremsen an allen vier Rädern, wohingegen der »**TSU-2**« ausschließlich über Feststellbremsen an den beiden Hinterrädern verfügt.

- Stabiler Rahmen
- Vier Schwenkrollen
- Überfahrhöhe 410 mm
- Sitzbrille mit integrierter Eimerhalterung
- Inklusive Eimer und Sitzpolster
- Belastbar bis 120 kg



TSU-2, mit Feststellbremsen an den beiden Hinterrädern

	TSU-2	TSU-4
HMV-Nr.	18.46.02.0064	
Sitz T x B x H (mm)	440 x 470 x 510	
Seitenteilhöhe (mm)	270	
Maße L x B x H (mm)	815 x 560 x 980	
Gewicht (kg)	12,9	13,1

Santilo

Badewannenbrett mit Haltegriff

Das anatomisch geformte Badewannenbrett schützt vor den Gefahren beim Ein- und Aussteigen und bietet zusätzliche Ablagefläche.

- Rutschhemmende Auflagen an der Unterseite
- Erhältlich in zwei Ausführungen: Länge 690 und 740 mm
- Belastbar bis 150 kg



	Santilo	
HMV-Nr.	04.40.02.0020	04.40.02.0021
Einstellmaß (mm)	300–530	380–650
Sitzfläche B x T (mm)	590 x 240	590 x 240
Gesamtmaß L x B x H (mm)	690 x 350 x 160	740 x 350 x 160
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150
Gewicht (kg)	2,2	2,7



Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder
Produktänderungen vorbehalten.

© DIETZ GmbH, Karlsbad

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung von DIETZ GmbH,
Karlsbad.

Stand 11/2022. V12



Adaptiv-Rollstühle / Manuelle Rollstühle

DIETZ Power Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehwagen / Gehhilfen

Scooter

Bad & WC

XL- und XXL-Produkte / Sonderanfertigungen

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
www.dietz-group.de

Ihr Sanitäts-Fachhaus

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch