

TR 1000

HÖHENVERSTELLBARER DUSCHSTUHL



Nutzlast bis 200 KG



Sanfte und große Höhenverstellung



Komfortable und einstellbare
Liegeposition



Neigungsverstellung nach vorne
sichert die leichtere Übernahme
von Rollstühlen und Liftern.


Praktisch, vielseitig, sicher und komfortabel....

Der höhenverstellbare Duschstuhl TR 1000 ist die ideale Lösung wenn es um das Duschen von pflegebedürftigen Menschen mit Hilfe von nur einer Pflegekraft geht. Das Duschen, die Haarwäsche, sowie die Pediküre werden mit dem TR 1000 für den Pflegebedürftigen und der Pflegekraft zu einer angenehmen und würdevollen Pflegeroutine. Die batteriebetriebene Höhenverstellung gewährleistet die optimale Einstellung der ergonomischen Arbeitshöhe beim Duschen. Eine Neigungsverstellung nach hinten, im Zusammenspiel mit der hohen Rückenlehne, sorgen beim Duschen für eine angenehme und komfortable Sitzposition. Die zusätzliche Neigungsverstellung nach vorne unterstützt die Übernahme der Person von einem Rollstuhl oder einem Lifter.

strack


TR 1000

HÖHENVERSTELLBARER DUSCHSTUHL

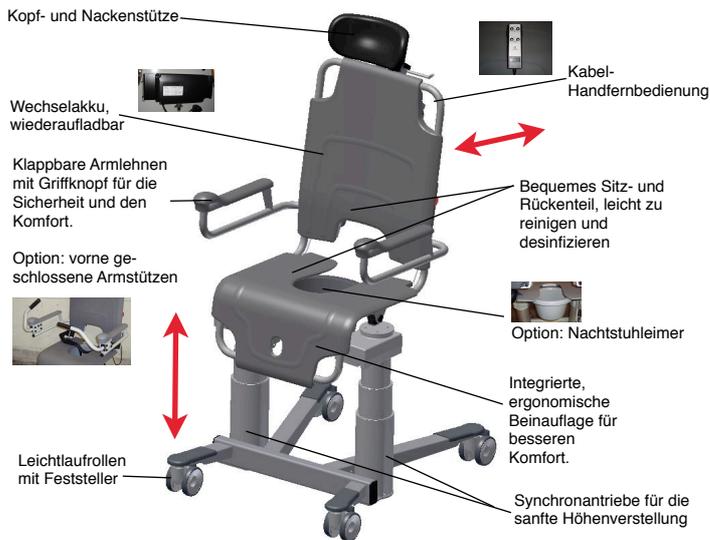

Technische Angaben	
Nutzlast	200 KG
Hubbereich	400 mm
Neigungsverstellung nach hinten	25 Grad
Neigungsverstellung nach vorne	7 Grad
Material	Pulverbeschichtetes, verzinktes Metall und Edelstahl
Leichtlaufrollen	Doppellenkrollen 100 mm, mit Bremse
Steuerung für die Höhen- und Neigungsverstellung	Kabel-Handfernbedienung
Batterie	24 Volt / 2Ah, wiederaufladbar


- Der höhenverstellbare Duschstuhl TR 1000 zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und ein leichtes, sowie sicheres Handling aus. Der Stuhl lässt sich nach dem Gebrauch leicht reinigen und desinfizieren.
- Die klare Designlinie gewährleistet einen leichten Zugang zur Sitzfläche, sowie einen unkomplizierten Transfer mit einem Gurt- oder Aufrichtlifter auf den Stuhl.
- Das Fahrgestell und die Sitzfläche bieten die Möglichkeit über Standard WC's zu fahren oder mit einem Nachtstuhlleimer (Option) zu arbeiten.
- Ein Haltegurt im Hüftbereich sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Transfer oder Duschen

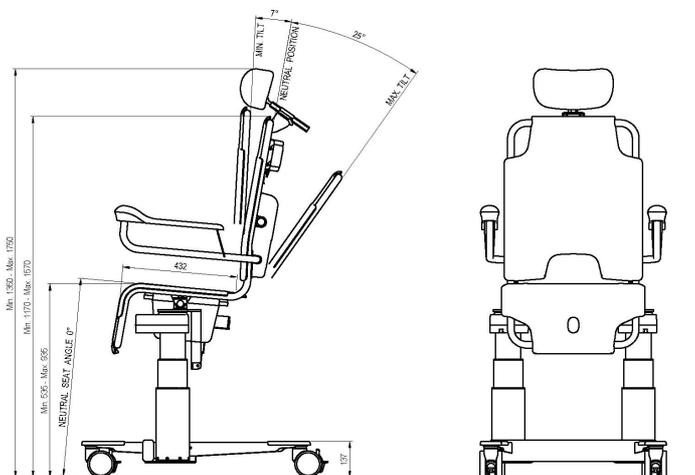

- Art.-Nr:**
- TR0001000 ELEKTRO-DUSCHSTUHL TR 1000**
mit vorne offene Armstützen inkl. Ladestation
- TR0001001 ELEKTRO-DUSCHSTUHL TR 1000**
mit geschlossenen Armstützen inkl. Ladestation

Optionen / Zubehör gegen Aufpreis:

- verstellbare Fußstütze
- Wandladegerät für Wechselakkus
- Nachtstuhlleimer mit Deckel

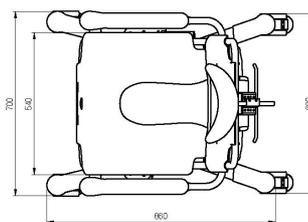

Hersteller: Werk
TR-Equipment AB, Schweden

CE Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1, MDD 93/42EEC.

Technische- und Design Änderungen sind vorbehalten

<p>Fachhändler:</p>	<p>strack Patienten- und Pflegebedarf</p> <p>Strack AG Ebnatstrasse 125 8200 Schaffhausen</p> <p>052 630 31 60 www.strack.ch info@strack.ch</p>	
---------------------	--	--

TRanspoRehaMed GmbH

Technik zur Unterstützung der Rehabilitation und Pflege von Menschen

Grünbaumstr. 89
42659 Solingen

Telefon 0212-645850-0
Telefax 0212-645850-50
info@transporehamed.de
www.transporehamed.de