


FONDO

Das Niedrigbett


Das Niedrigbett überzeugt vor allem durch die Funktion der extremen Absenkung des Bettgestells. Diese Funktion dient deshalb der Sturzprophylaxe und ist in besonderem Maße für Alzheimerpatienten bei der häuslichen Pflege und in Pflegeheimen geeignet.

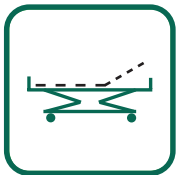

RÜCKENTEIL
0 - 70°



FUSSTEIL
0 - 30°

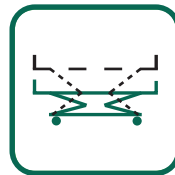

HÖHENVERSTELLUNG
67-640 mm



TRENDELENBURG-LAGERUNG

VORTEILE DES FONDO

- Ultra Low Position für Sturzprophylaxe
- Lieferung und Montage durch eine Person und ohne Werkzeug möglich

Erfüllt die Norm IEC 60601-2-52



TEKVOR CARE
We care for you



MECHANISCHE MERKMALE

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90 x 200 cm mit Matratzenführung an Kopf- und Fußteil
- Elektrische Höhenverstellung von 67-640 mm, Hub 573 mm
- Max. Patientengewicht: 170 kg bei einem Matratzengewicht von 10 kg / Sichere Arbeitslast: 180 kg
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°

WEITERE MERKMALE

- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 5 Positionen
- 4 Laufrollen mit Einzelradfeststellung
- 29 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX 4

VISUELLE MERKMALE

- Stahlteile lackiert in RAL 9023 (Perldunkelgrau)
- Holzinnenverkleidung

OPTIONEN

- Patientenaufrichter bis 80 kg
- Trendelenburg-/ Anti-Trendelenburgfunktion
- Leseleuchte
- Unterbettbeleuchtung für Kopf-/ und Fußende



TEKVOR CARE
We care for you