


JAGUAR

Indoor Rollator

strack Patienten-
und Pflegebedarf

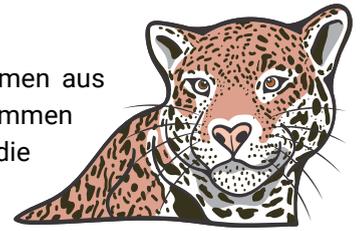

Der Rollator **Jaguar** hat einen Rahmen aus Aluminium und kann leicht zusammen gefaltet werden. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität, gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit. Standardmäßig verfügt der Rollator Jaguar über eine Tasche und ein abnehmbares Tablett. Die großen und leichtgängigen Räder sind mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet die mittels eines über die gesamte Rollatorbreite laufenden Bügels betätigt werden. Der Rollator ist nur für die Nutzung im Innenbereich zugelassen und ist für ein Benutzergewicht bis 100 kg getestet.

Indoor Rollator Jaguar	Art.Nr. 312410
<i>Max. Benutzergewicht</i>	100 kg
<i>Gesamtgewicht</i>	6,6 kg
<i>Länge gesamt (offen / gefaltet)</i>	66 cm / 26 cm
<i>Rollatorbreite</i>	54 cm
<i>Höhe gesamt</i>	83,5 - 102 cm
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar

