

Golvo™ 9000/LowBase™ Mobiler Lifter

Auf Vielseitigkeit ausgelegt



Golvo 9000



Golvo 9000 LowBase

Der Golvo 9000 Lifter bietet die funktionalen Vorteile eines Deckenlifters mit der Flexibilität eines mobilen Lifters. Zusammen mit dem umfangreichen Angebot an Liko-Zubehör ist der Golvo ideal für alltägliche Hebesituationen in den verschiedensten Pflegeumgebungen.

Funktionen und Vorteile

Die **vertikale Hebebewegung** mit dem flexiblen Hebeband ist ideal für horizontales Heben, Gehübungen und Anheben vom Boden

Die **parallele Breitenverstellung des Fahrgestells** sorgt für ein leichteres Heben der Patienten/Pflegebedürftigen auf/von Stühle(n), Betten und Böden

Die **LowBase-Version** ermöglicht im Vergleich zum Standardmodell noch mehr Freiraum unter niedrigen Betten oder Liegen

Armstützen dienen zur **Unterstützung von Patienten/Pflegebedürftigen während der Gehübung** und erleichtern Pflegekräften das Manövrieren des Lifters

Das **Benutzerdisplay** zeigt die Gerätenutzung an, u. a. die Anzahl der Hebevorgänge, Wartungsbedarf und Überlastungen

Optionale **Schnellwechsellaken**, damit die Pflegekräfte einen Hebebügel einfach und schnell austauschen oder eine Waage installieren können

Die **ergonomische Handsteuerung** für die Hebevorgänge zeigt sowohl Akkueinsatz als auch Überlastungen an

Umfangreiches Sortiment an Zubehör verfügbar, u. a. Hebegurte, Hebebügel und Waagen

Zwei Hubgeschwindigkeiten für die verschiedensten Hebesituationen

Golvo 9000/LowBase Mobiler Lifter




Hubarm



LowBase – Höhe des Fahrgestells



Handsteuerung

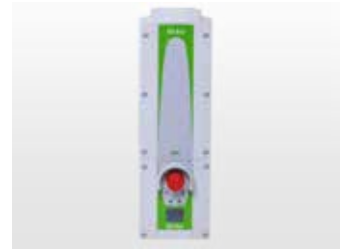

Steuereinheit

Technische Daten

Max. Tragfähigkeit	200 kg
Gewicht – 9000	
mit Bleiakku	41,6 kg
mit Lithium-Ionen-Akku	40,2 kg
Gewicht – 9000 LowBase	
mit Bleiakku	45 kg
mit Lithium-Ionen-Akku	43,6 kg
Höhe	
9000	2.090 mm
LowBase	2.090 mm
Schutzklasse	IPX4
Schutzklasse der Handsteuerung	IPX4
Optionen für Hebebügel	
Standard	Universalhebebügel 450 (450 mm)
Optional	Hebebügel Mini 220 Universalhebebügel 350 Universalhebebügel Twin 670 Kreuzbügel
Fahrgestell – 9000	
Höhe	105 mm
Länge	1.185 mm
Breite	735 bis 1.020 mm

Fahrgestell – 9000 LowBase	
Höhe	60/105 mm
Länge	1.185 mm
Breite	745 bis 1.028 mm
Fahrgestell – Breitenverstellung	elektrisch
Rollen	
vorn – 9000	75 mm Doppelaufrollen
vorn – LowBase	46 mm Doppelaufrollen
hinten	75 mm Doppelaufrollen
Material	Aluminium
Notanhebung	elektrisch
Notabsenkung	manuell und elektrisch
Hubgeschwindigkeit (ohne Last)	27 mm/s oder 37 mm/s
Hubintervall	1.245 mm
Max. Hubhöhe	1.816 mm
Lautstärke	52,8 dB(A)
Akkuoptionen	Bleigelakku oder Lithium-Ionen-Akku
Ladegerät	integriert
Handsteuerung	verkabelt
Produktnummer	
9000	2000045
LowBase	2000049

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das ungefähr 10.000 Angestellte auf der ganzen Welt beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen in über 100 Ländern konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, Patientenüberwachung und Diagnostik, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Auf der ganzen Welt verfolgen Menschen, Programme und Produkte von Hill-Rom nur ein Ziel: **Optimierte Ergebnisse für Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

www.hill-rom.com

Der mobile Golvo 9000 Lifter ist zum Heben und für den Transfer von Patienten/Pflegebedürftigen in unterschiedlichsten Pflegebereichen bestimmt.

Klasse I

Hersteller: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå – Schweden

Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Dok.-Nr.: 5DE183304-01, 31 März 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom