

FÜR GERADE
UND RUNDE
TREPPENHÄUSER

FLOW 2


ACCESS

strack Liftsysteme

**DER FLOW2
TREPPENLIFT MIT
EINROHRSCHIENEN-
SYSTEM IST
MARKTFÜHRER FÜR
RUNDE TREPPEN UND
DER CLEVERSTE
LIFT SEINER ART**

02

Der preisgekrönte Flow2 Treppenlift kann als einer der weltweit führenden Treppenlifte betrachtet werden. Der Flow2 wird auf Ihrer Treppe und nicht an Ihrer Wand angebracht, welches eine schnelle und einfache Installation in Ihrem Zuhause erlaubt.

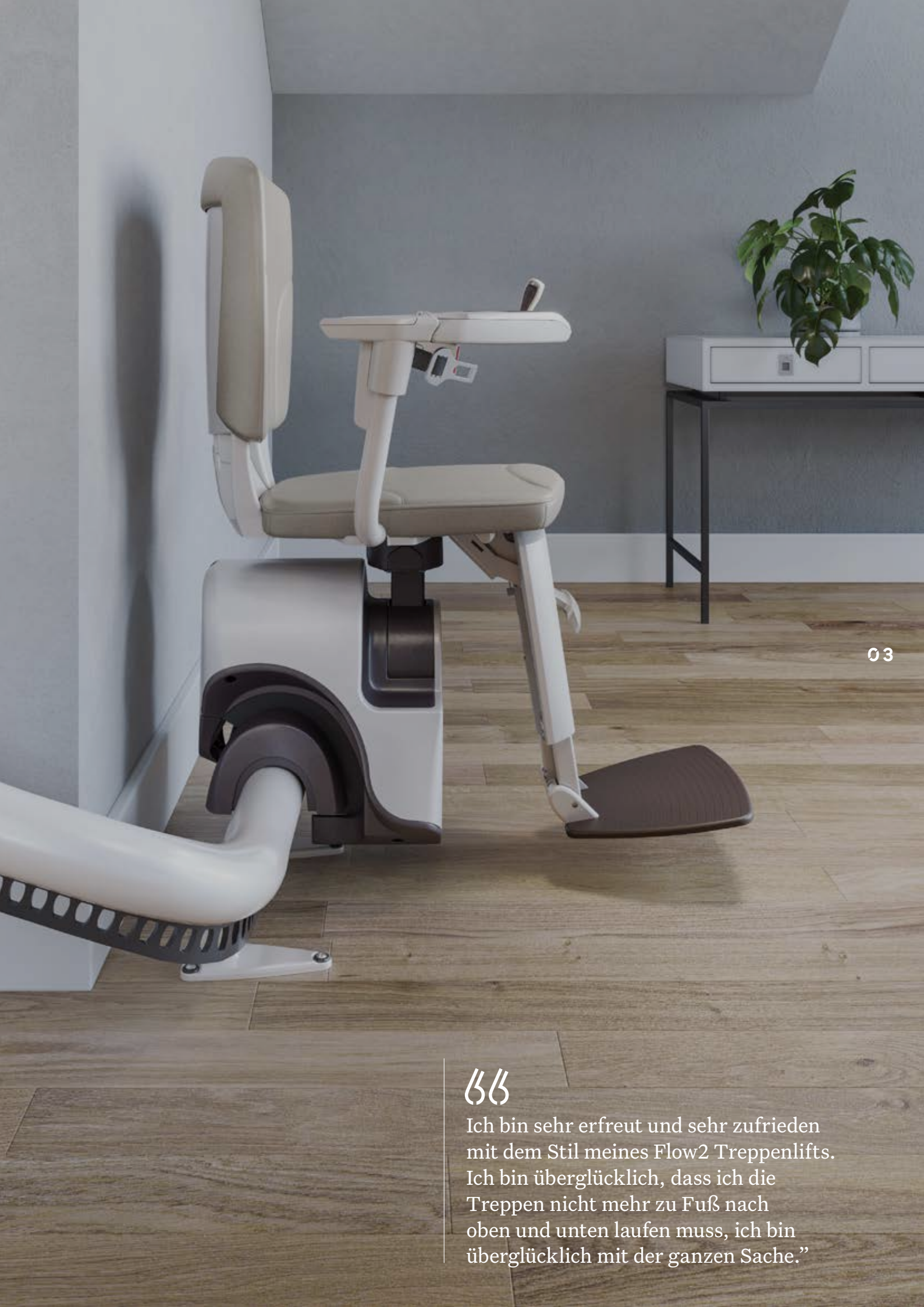

Ich bin sehr erfreut und sehr zufrieden mit dem Stil meines Flow2 Treppenlifts. Ich bin überglücklich, dass ich die Treppen nicht mehr zu Fuß nach oben und unten laufen muss, ich bin überglücklich mit der ganzen Sache.”

1

ES GEHT NUR UM SIE

Entworfen in Ihrem Sinne, hat der Flow2 einen ergonomisch geformten Sitz, der Ihnen eine angenehme und bequeme Fahrt bietet. Der Flow2 steht in einer Reihe von Oberflächen und Farboptionen zur Verfügung, mit denen Sie ihn an den Stil Ihres Hauses anpassen können. Wählen Sie aus Stoff-, Vinyl- und Ledersitzbezügen und einer Reihe von unterschiedlichen Schienenfarben aus.

2

KOMPAKT UND DISKRET

Wenn der Flow2 nicht in Gebrauch ist, kann er auf jeder Stufe auf nur 340 mm weggeklappt werden, um anderen Treppennutzern Platz zu gewähren. Der Flow2 hat eine einzige dezente Schiene, die eng an Ihrer Treppe anliegt und auf beiden Seiten der Treppe angebracht werden kann.

2

04

3

SICHERHEIT

Ihre Sicherheit ist von größter Bedeutung für uns. Der Flow2 Treppenlift ist nach Maschinenrichtlinien 2006/42/EG und EN 81-40 zertifiziert. Der Sitz ist in der Höhe verstellbar, so dass Sie am oberen und unteren Treppenabsatz sicher Ein- und Aussteigen können. Während der Fahrt bieten Ihnen der Sicherheitsgurt und die optionalen gebogenen Armlehnen Sicherheit auf dem Treppenlift.

3

Wenn der Flow2 während der Fahrt auf ein Hindernis trifft, wird er sicher zum Stillstand kommen. Der Treppenlift ist batteriebetrieben, was bedeutet, dass Sie ihn auch während eines Stromausfalls nutzen können.



Hergestellt mit der allerneuesten Technologie, kann der Flow2 an fast jeder Art von Treppe angebracht werden. Die “automatic swivel and levelling technology” (ASL, automatische Dreh- und Ausrichtetechnologie) ermöglicht es, den Flow2 auf Treppen ab 610mm Breite anzubringen. Diese Eigenschaft, die exklusiv dem Flow2 vorbehalten ist, ermöglicht es dem Treppenlift während der Fahrt zu drehen und macht ihn deshalb zu einem der anpassungsfähigsten Treppenlifte der Welt.



A close-up photograph of a white adjustable bed mechanism. The mechanism consists of a vertical white tube on the left, a central wooden slat, and a white U-shaped base on the right. The entire assembly is mounted on a light-colored wooden floor. The text 'ASL' is overlaid on the left side of the image.

ASL

FORTSCHRITTLICHE
DREH- UND
AUSRICHTE-
TECHNOLOGIE

ASL-Technologie ermöglicht es dem Flow2 Treppenlift, sich zu drehen und dabei während der Fahrt perfekt waagrecht zu bleiben. Durch das Drehen während der Fahrt, befinden Sie sich immer in der sichersten und bequemsten Position.



1

Der Sitz befindet sich immer in der richtigen Position, um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu ermöglichen

Der Flow2 dreht während der Fahrt, so dass das Ein- und Aussteigen aus dem Lift an jedem Ende der Treppe schnell und einfach ist. Am oberen Ende der Treppe kann sich der Sitz von der offenen Treppe weg drehen und einen sicheren Ausstieg aus dem Sitz ermöglichen.

2

Ständig darauf bedacht Ihnen Zeit zu sparen und für Sicherheit und Komfort zu sorgen

Die ASL-Technologie arbeitet während der Lift in Bewegung ist. Deshalb vermeiden Sie zusätzliche Stopps und Schwenkbewegungen zu Beginn, während, und am Ende der Fahrt. Das spart Zeit und sorgt für zusätzliche Sicherheit und Komfort. Der Lift bewegt sich tatsächlich in einem "Flow" (fließend).

3

Interne oder externe Schiene an der schmalsten und steilsten Treppe

Selbst in Fällen, wenn die Treppe eng und steil ist, kann der Flow2 näher an der Stufe, auf jeder Seite der Treppe, angebracht werden. Hierdurch bleibt das Treppenhaus für weitere Treppenhausnutzer weiterhin zugänglich.

4

Einzigartige Technologie, die man nur im Flow2 findet

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig - wenn Sie die ASL-Technologie wählen, dreht sich die Fußstütze mit dem Sitz um sicherzustellen, dass Ihre Beine und Füße in einer natürlichen und bequemen Position bleiben, um keine zusätzliche Belastung für Ihre Gelenke zu schaffen.



**DIE ASL-TECHNOLOGIE
ERMÖGLICHT ES,
DASS DIE SCHIENE
BEREITS AUF EINER
HÖHE VON 62 MM AUF
EINER VIELZAHL VON
TREPPENSTILEN UND
-KONFIGURATIONEN
ANGEBRACHT
WERDEN KANN**



OPTIONEN

10

ES GEHT NUR
UM SIE

Wenn Sie den Flow2 Treppenlift wählen, stellen Sie die beste Lösung für Ihre Treppe sicher. Mit einer einzigen diskreten Schiene kann dieser Treppenlift maßgefertigt und an jede Treppe angepasst werden.

SCHIENE



Standard Steilfahrt

Das Standard-Schienenende ist die perfekte Lösung, wenn es am unteren Ende der Treppe ein Hindernis gibt, wie beispielsweise eine Tür. Das Schienenende erfordert nur 175 mm Platz vor der untersten Stufe.



Vertikaler 'Kurzstart'

Wenn der Platz am unteren Ende noch begrenzter ist, kann der 'Kurzstart' angebracht werden, der nur 100 mm Platz vor der untersten Stufe benötigt.



Horizontaler Auslauf

Wenn Sie am unteren Ende der Treppe zusätzlichen Platz haben, ermöglicht der horizontale Auslauf, dass der Stuhl etwas entfernt von der untersten Stufe geparkt werden kann.



Parkkurve

Eine Parkkurve ermöglicht es, den Stuhl abseits der Treppe zu parken.

11

FARBE



Grau



Weiß/Grau



Beige/Braun




Braun/Grau

POLSTER

Vinyl



Rot

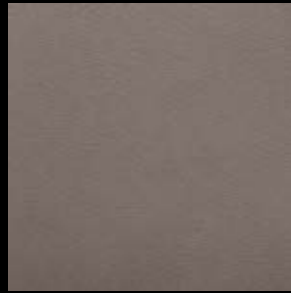

Grau



Kastanienbraun




Sisal


Stoff



Dunkelbraun

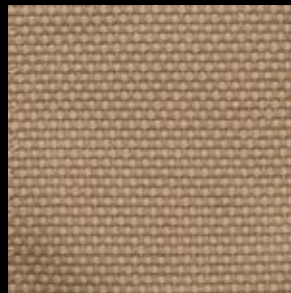

Beige

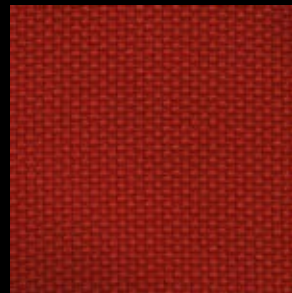


Rot

12

Elegant Leder



Aubergine-Beige

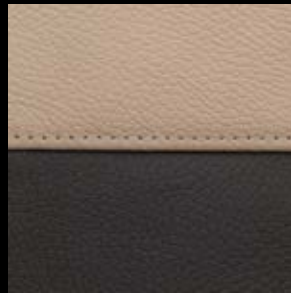

Beige-Grau



Braun-Beige



Braun-Cognac



Braun-Grau



Rot-Beige

Deluxe Leder



Beige



Dunkelbraun



Dunkelrot

ARMLEHNE



Gerade



Gebogen

13

EINFACHE BETDIENUNG



Joystick



Anrufsystem

FERNBEDIENUNG

14

SIE HABEN

ALLES UNTER

KONTROLLE

Über Fernbedienungen Unten sowie Oben des Treppenhauses kann Ihr Lift geholt oder bei Nichtbenutzung zur Parkposition geschickt werden.





CARS

THE WALKER STORY TELLER
THE FALKNER BOOK
THE WALKER STORY TELLER

Finnish
Architecture
with an Edge

THE WALKER STORY TELLER
THE FALKNER BOOK
THE WALKER STORY TELLER



DER FLOW2
TREPPENLIFT KANN
AUF TREPPEN AB
610 MM BREITE
UND MIT BIS ZU
70° STEIGUNG
ANGEBRACHT WERDEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATION


NACH DEN
HÖCHSTEN
STANDARDS
ZERTIFIZIERT

18

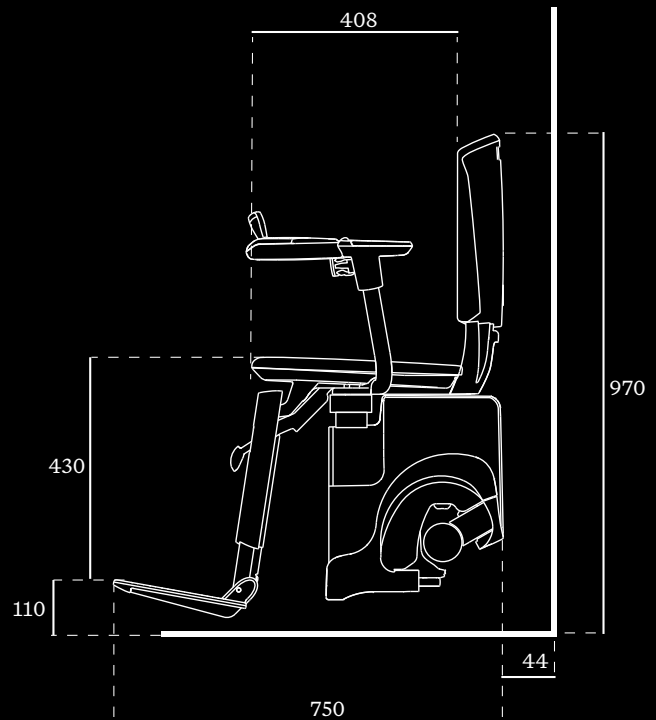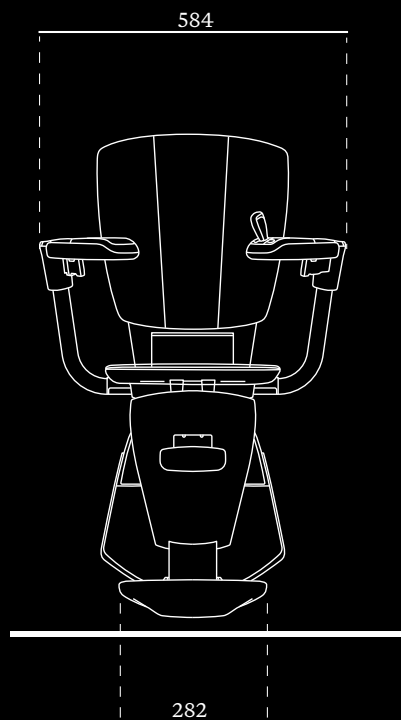

SPEZIFIKATION

Geschwindigkeit	Max 0,15 m/s
Antriebsart	Zahnstangenantrieb
Motorenleistung	350 W – Antriebsmotor 350 W – Horizontaler Motor
Gewichtskapazität	125 kg
Batterien	2 × 12V-Batterien; Gesamt 24V
Bedienung	Joysticksteuerung als Standard
Treppensteigung	Bis zu 70°
Zertifizierung	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 81-40
Automatischer Stopp	Ja
Fußauflage	Ja
Einziehbarer Sicherheitsgurt	Ja

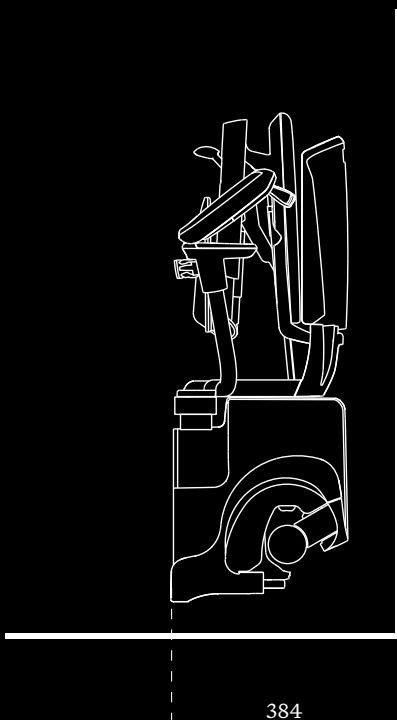


384



Der Flow2 Treppenlift ist eines der zuverlässigsten Produkte, mit denen ich das Vergnügen hatte zu arbeiten.”



**IHRE TREPPE
KANN WEITERHIN
VON ANDEREN
FAMILIENMITGLIEDERN
WIE GEWOHNT
GENUTZT WERDEN**

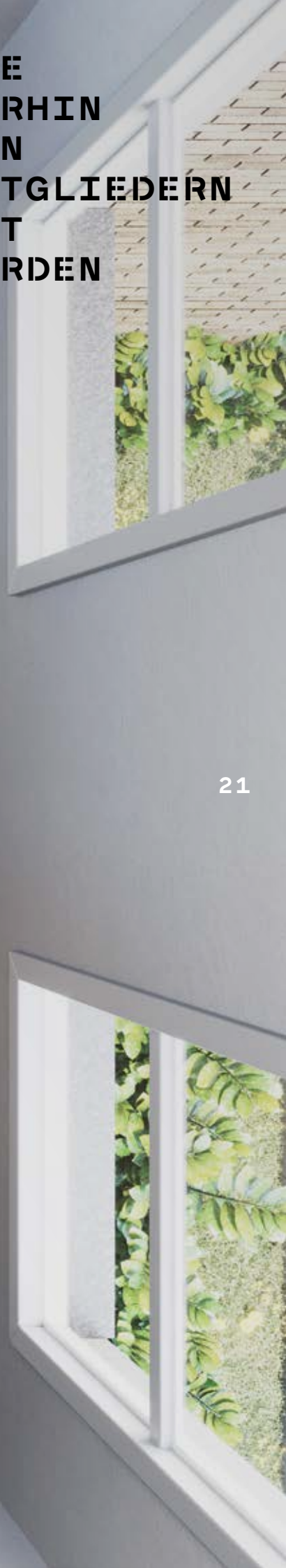

ÜBER

ACCESS



Access BDD ist ein Geschäftsbereich von thyssenkrupp Access Ltd. Wir ermöglichen Menschen auf der ganzen Welt komfortable Bewegung in Gebäuden durch ein Angebot von Treppenliften, Plattform- sowie Homeliften, die wir über ein Netzwerk von sorgfältig ausgewählten Geschäftspartnern vertreiben.

Wenn Sie sich für einen Homelift von Access BDD entscheiden, erhalten Sie ein qualitatives Spitzenprodukt, das durch fachmännischen Service und Beratung unterstützt wird.

Unsere Partner sind alle Spezialisten für Mobilitäts- oder Liftprodukte. Sie erhalten umfangreiche technische und kaufmännische Schulungen zu unseren Produkten. Ihr Access BDD-Partner führt Sie durch die Produktoptionen, um Sie dabei zu unterstützen, einen Homelift auszuwählen, der Ihre Anforderungen erfüllt und Ihrer Umgebung entspricht. Darüber hinaus erhalten Sie ebenfalls fachmännische Beratung, um sicherzustellen, dass Ihr neuer Homelift alle relevanten Richtlinien in Bezug auf Zugänglichkeit und Sicherheit erfüllt.

Unsere Produkte sind für einfache Montage und Wartung konzipiert, deren Abwicklung vollständig durch Ihren Access BDD-Vertragspartner erfolgt.

22





**SEIT 1976 VEREINFACHEN
WIR KOMPLEXE
AUSWAHLMÖGLICHKEITEN,
DAMIT SICH MENSCHEN
EINFACHER IN IHREN
WOHNÄRÄUMEN BEWEGEN KÖNNEN**

Access BDD ist
einer der führenden
europäischen Anbieter
von Treppenlift-,
Plattformlift- und
Homelift-Lösungen

Ihr lokaler Access BDD-Partner ist:



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch

