
EN
DE
FR

Instructions for Use
MOBIO Comfort Premium

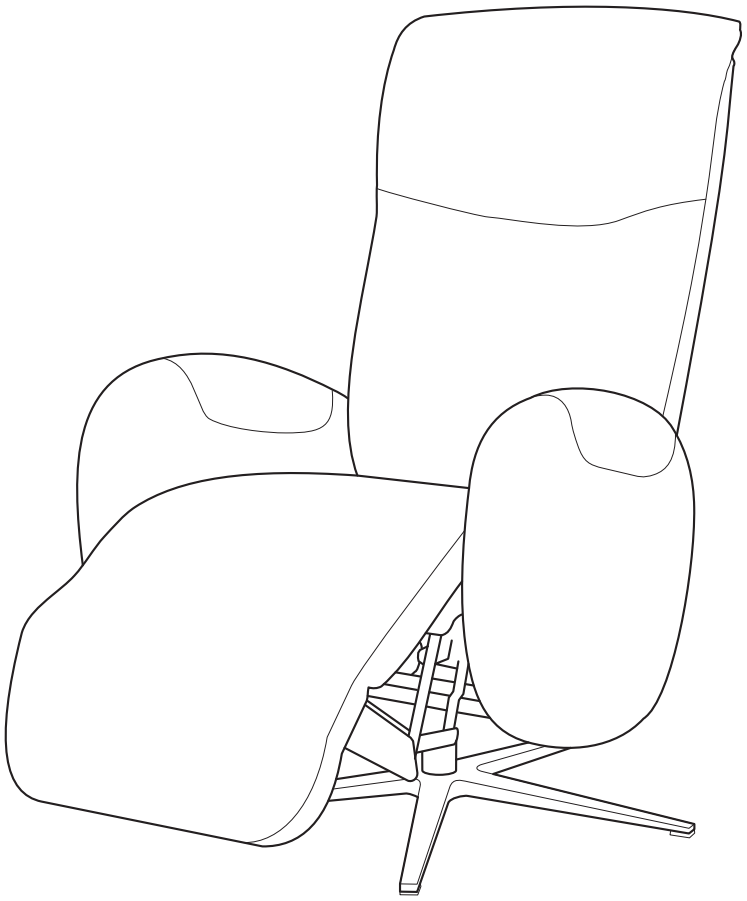

2 YEAR WARRANTY

EN

Illustrations
Dimensions
Technical data
Article numbers

DE


Illustrationen
Maße
Technische Daten
Artikelnummern

FR


Illustrations
Dimensions
Données techniques
Numéros d’article


Art. No. User Manual: 105145 – Revision A, 2025-09


Comfort Premium **8456**

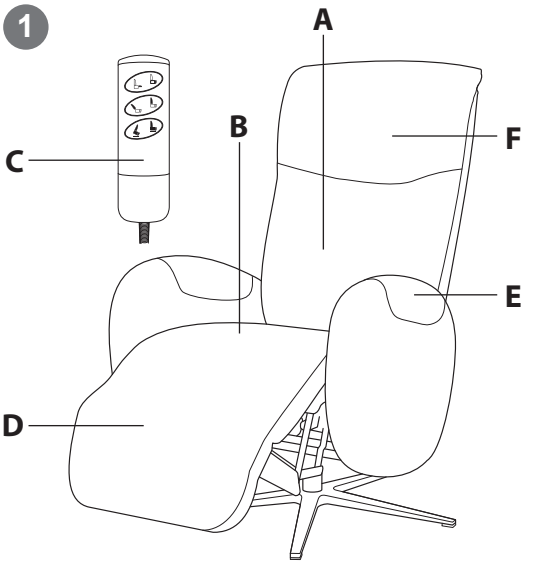



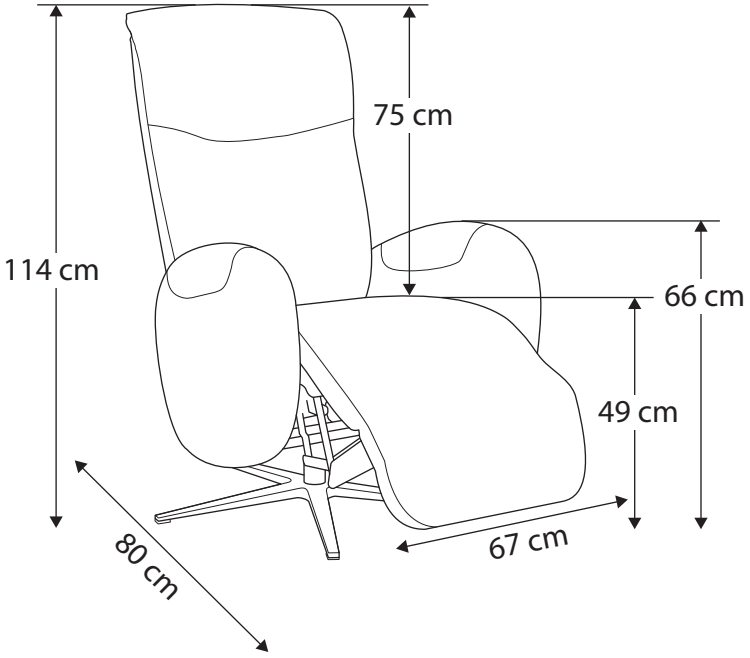


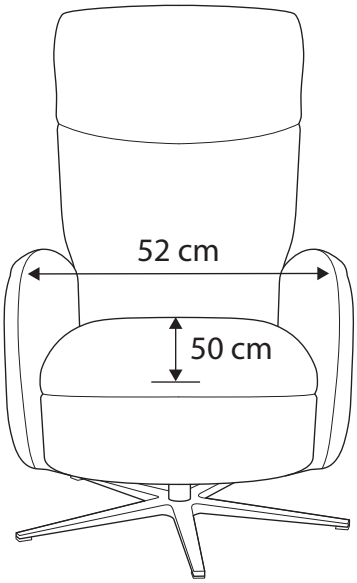

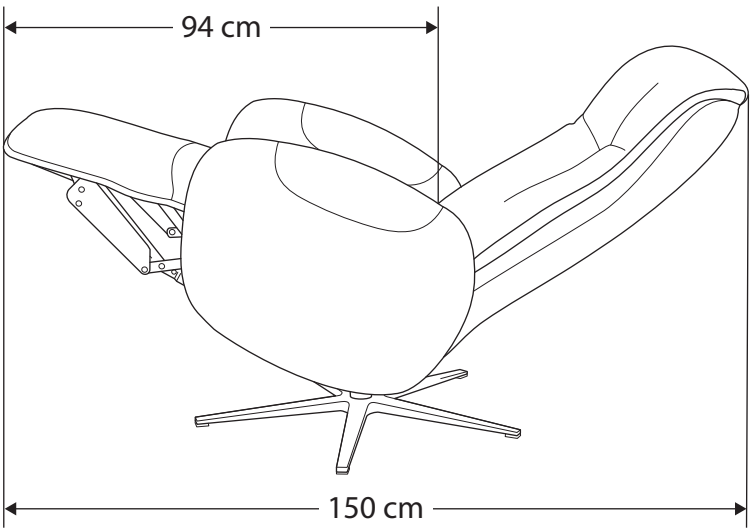




2

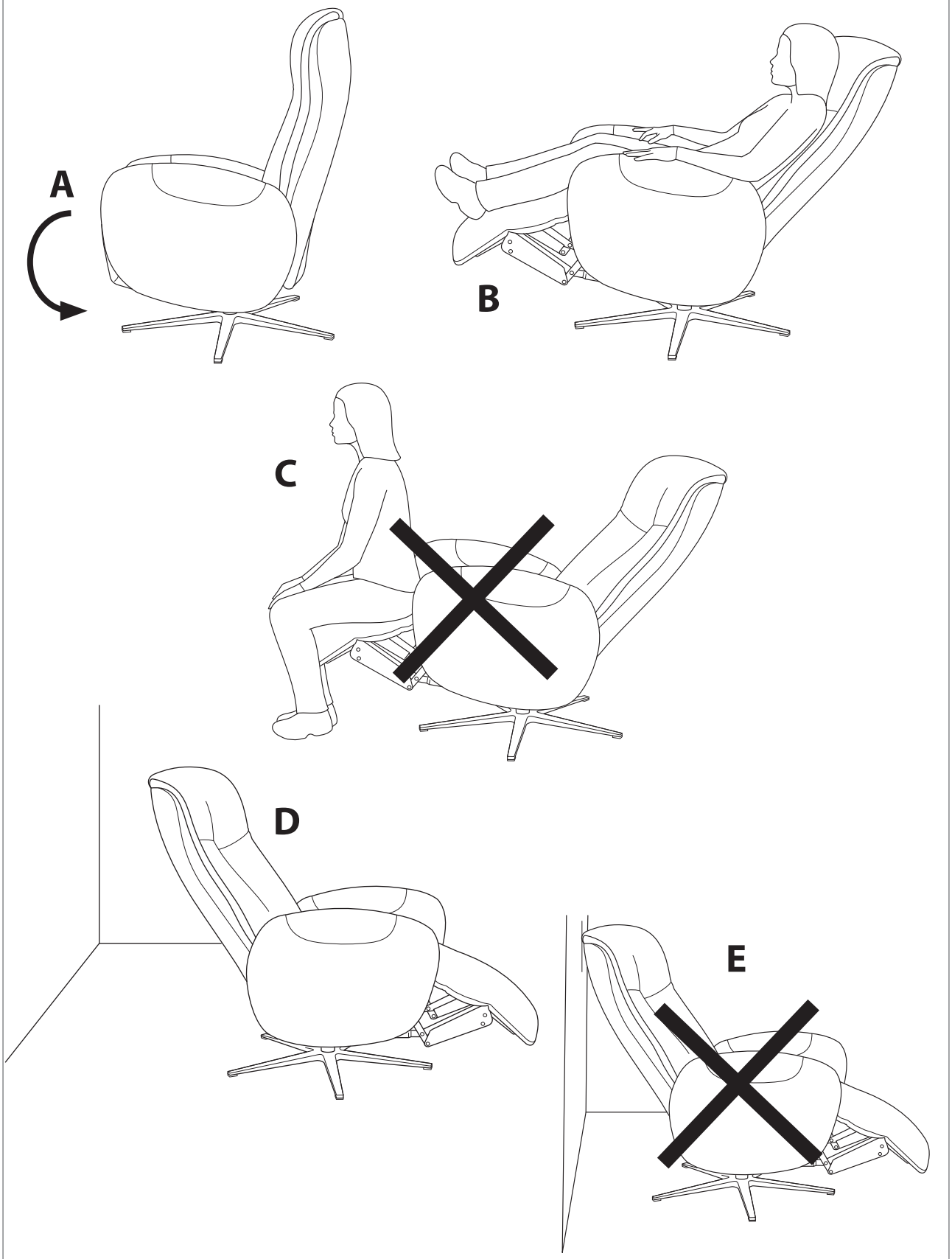

2

F

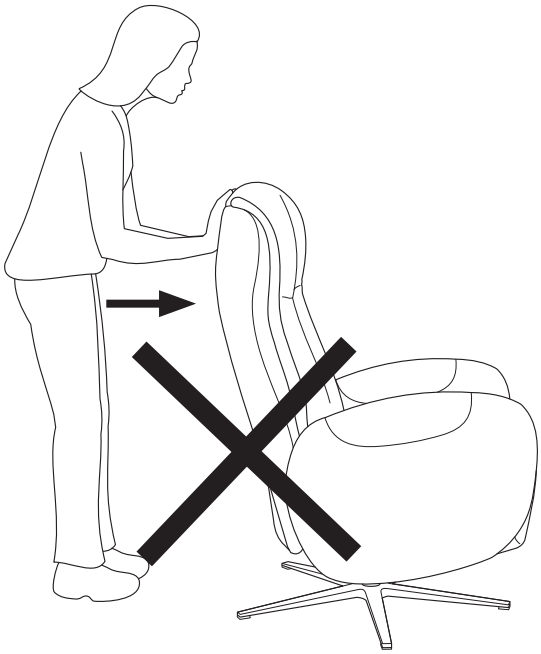


G



2


H

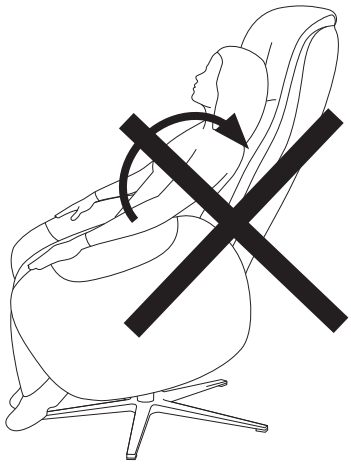


I



3

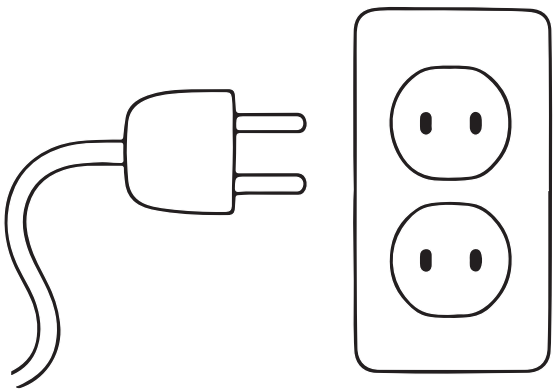

4

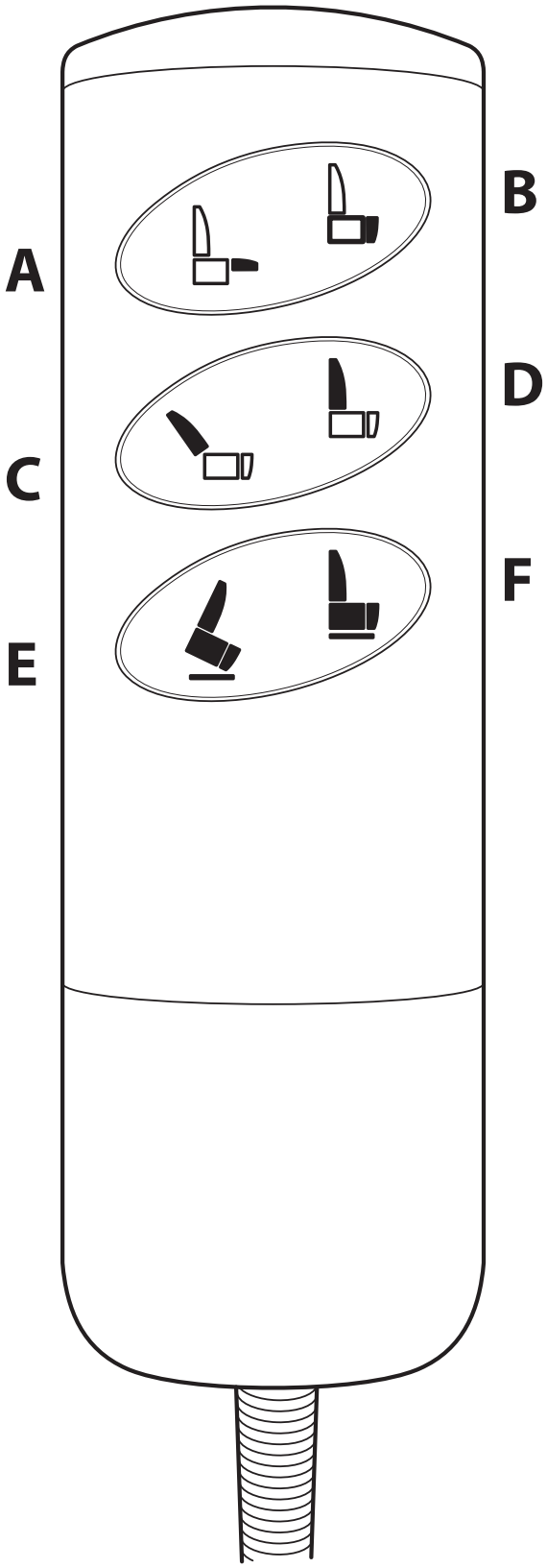

Congratulations on your new MOBIO rise and recline chair

Our stand-up and reclining chairs have been developed with a special focus on your comfort. Thanks to ergonomically designed seats and adjustable footrests and backrests, they offer optimum support for your back and legs. MOBIO stand-up and reclining chairs are available in a variety of modern colours and attractive upholstery. They have sophisticated functions that increase comfort and safety in everyday life. Please check your product as soon as you receive it. If you have any questions, please contact your specialist mobility shop or dealer. If you have any difficulties reading this user manual, an electronic version is available at **mobio.be**.

Intended use

MOBIO Comfort Premium is intended for able-bodied adults, and the chair should not be equated with wheelchairs, medical chairs or beds for disabled people. The chair is intended for indoor use and can only be used by one person at a time within the weight limit of 160 kg. The user must be able to operate the product without external assistance. The warranty is void if the product is damaged by a user who does not comply with these restrictions.

0 The grey numbered circles in this user manual refers to the numbered information graphic and illustrations inside the cover

1 Get to know your MOBIO product

A Back rest
B Seat
C Remote control
D Footrest
E Armrests
F Head rest

2 Safety ⚠

Never enter or exit the chair without first returning the footrest to its original position (A). The footrest is designed only for its intended use (B) and should never be used as a seat or for similar purposes (C), as the hardware of the product may be damaged.

The chair should be positioned in such a way that no obstacles can impede the operation of the lifting and reclining mechanism (D). Under no circumstances should the backrest or footrest be placed against a wall (E), due to the risk of significant damage that is not covered by the warranty.

The chair must be placed on a level floor.

Do not push the chair forward (F).

Do not pull the chair sideways by its armrests (G).

Always take the precaution by disconnecting the power supply to the chair when cleaning or moving it, or when children are present unsupervised.

The chair is not a toy and should not be used by children. Be sure to use the chair with caution in the presence of children or pets.

Never recline the backrest (H) while the chair is in a raised position (I) due to the risk of injuries.

Do not pull the remote-control cord more than necessary. Do not sit on the remote control or let it fall to the ground. Do not allow children to use the remote control.

Carefully ensure that the product is properly installed and connected to the power supply before use.

Do not modify the product, as this may compromise your safety and void the warranty.

Check that the connectors under the chair are securely in place and not disconnected due to household cleaning, such as with a broom or vacuum cleaner.

Keep the chair away from light or heat sources.

Art. No. User Manual: 105145 – Revision A, 2025-09

3 Installation

Wired Power Supply
To activate the motors, plug it into the power outlet. Once connected to the socket, you can operate the remote control.

4 Adjustments MOBIO Comfort Premium

- **A** Rise the footrest
- **B** Lower the footrest + Rise support
- **C** Recline the backrest
- **D** Rise the backrest
- **E** Stand up support
- **F** Sit down support + Rise the footrest

ⓘ The neck support can be adjusted manually as required.

Troubleshooting

Problem	Probable Cause	Solution
The chair is not working	No voltage	Check that the battery is connected to the motor(s) and that the electrical outlet is working
	Defective chair	Contact customer service
The chair suddenly becomes unresponsive, no movement takes place	The heat protection has been triggered	Leave the chair for 20 to 30 minutes and try again
	A cable has been disconnected	Check that the remote-control cord is connected
	The battery fuse may be out of order	Contact customer service

Please contact your supplier for further assistance if everything above has been checked and the chair still does not function properly.

Storage

For long-term storage, measures must be taken to protect and preserve the chair:
• Protect the chair from sunlight to counteract the natural process of colour fading by covering the chair.
• Store the chair in dry and well-ventilated rooms.

Cleaning

Protect the chair from all sources of direct light (sun, moon, halogen lamps, etc.) to avoid the risk of discolouration.

Use a vacuum cleaner and regularly wipe the chair without excessive friction to avoid damaging the upholstery. The vacuum cleaner will remove dry dust but not greasy dust that may adhere to the upholstery. Therefore, it is recommended to clean the chair every six months. Clean the parts in direct contact with the scalp and hands with water and a neutral soap. Avoid household detergents or products containing solvents or oils that can damage the upholsteries. Always test on a hidden part of the chair.

Oily materials	Use a dry cloth to absorb the oil and remove the stain. If this is not sufficient, apply a small amount of dish soap and gently rub with a damp cloth.
Coffee, tea and beer	Clean with hot water. If the stain persists, dab it with a soapy solution.
Chewing-gum	Place an ice cube wrapped in cloth to cool the gum. Then scrape it off very gently.
Ballpoint pen ink	Dampen a cotton swab with a little vinegar and run it over the stain.
Food stain and blood	Carefully remove the superficial part and moisten the stain with some water. Then dab with a cloth soaked in soapy water.

Tip: For tough stains, consult a stain removal specialist.

Inspection / Maintenance

The mechanism should be dedusted regularly and the fastenings checked and retightened as required (at least once a year).The mechanism may exhibit slight play during use and minor noises or creaking noises cannot be ruled out during operation. In such cases, it is recommended to apply a small amount of lubricant to the joints. some surface coatings – especially artificial leather – can squeak during operation. The use of talcum powder is recommended to minimise these effects.

Material

	MOBIO Comfort Premium	
Seat	Metal frame with metal springs High resilience foam 34 kg/m³	Memory foam seat mattress 52 kg/m3, thickness 2.5 cm
Back rest	Metal structure High resilience foam 26 kg/m³ Manual articulated headrest	Memory foam seat mattress 52 kg/m3, thickness 2.5 cm
Footrest	Panel structure High resilience foam 34 kg/m³	Memory foam seat mattress 52 kg/m3, thickness 2.5 cm
Armrest	Plywood structure Polyether foam 20 kg/m³	
Swivel Multi-position lifting mechanism, 3 motors, ZERO-GRAVITY Stawett (made in germany)		

Warranty

The MOBIO Comfort Premium is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of 2 years, please contact your local specialist mobility shop or dealer in the event of a warranty claim, the warranty only applies if the wheelchair is used correctly in accordance with the instructions in this user manual.

Exclusions from Warranty

Unintentional damages caused during delivery or installation of the product by the distributor or user.

Damages caused by misuse of the chair.

Changes in appearance caused by normal use and wear of the product.

Products in abnormally dirty condition and/or with unintentional or deliberate damage.

Damages resulting from prohibited use: sitting on the footrest or armrests, entering or exiting the chair without first folding the footrest, moving the product by pulling sideways on the armrest or the backrest, obstructing the free movement of the elements in the backrest or footrest, especially against a wall or furniture.

Presence of a mark on any part of the chair indicating it was placed against a wall, especially on the backrest, will invalidate the product warranty.

For the electrical part, damages caused by power surges or lightning, poor electrical installation, cutting or tearing of electrical wires, breaking connection plugs, unintentional disconnection of motors or remote controls.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen MOBIO Aufsteh- und Ruhesessel

Unsere Aufsteh- und Ruhesessel wurden mit besonderem Fokus auf Ihren Komfort entwickelt. Dank ergonomisch gestalteter Sitzflächen sowie verstellbarer Fuß- und Rückenlehnen bieten sie optimale Unterstützung für Rücken und Beine.
Die MOBIO Aufsteh- und Ruhesessel sind in einer Vielzahl moderner Farben und ansprechender Polsterungen erhältlich. Sie verfügen über durchdachte Funktionen, die Komfort und Sicherheit im Alltag erhöhen.
Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt unmittelbar nach Erhalt der Ware. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihr Fachgeschäft für Mobilität oder an Ihren Händler.
Sollten Sie Schwierigkeiten beim Lesen dieses Benutzerhandbuchs haben, steht eine elektronische Version auf **mobio.be** zur verfügung.

Verwendungszweck

MOBIO Comfort Premium ist für körperlich gesunde Erwachsene bestimmt und sollte nicht mit Rollstühlen, medizinischen Stühlen oder Betten für behinderte Menschen gleichgesetzt werden. Der Stuhl ist für den Innenbereich vorgesehen und darf nur von einer Person gleichzeitig innerhalb des Gewichtslimits von 160 kg verwendet werden. Der Benutzer muss in der Lage sein, das Produkt ohne fremde Hilfe zu bedienen. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von einem Benutzer beschädigt wird, der diese Einschränkungen nicht einhält.

0 Die grauen nummerierten Kreise in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die nummerierten Informationsgrafiken und Abbildungen im Innenteil des Umschlags

1 Lernen Sie Ihr MOBIO-Produkt kennen

A Rückenlehne
B Sitz
C Fernbedienung
D Fußstütze
E Armlehnen
F Kopfstütze

2 Sicherheit ⚠

Betreten oder verlassen Sie den Stuhl niemals, ohne die Fußstütze vorher in ihre ursprüngliche Position zurückzubringen (A). Die Fußstütze ist nur für den vorgesehenen Gebrauch bestimmt (B) und sollte niemals als Sitz oder für ähnliche Zwecke verwendet werden (C), da die Hardware des Produkts beschädigt werden kann.

Der Stuhl sollte so positioniert werden, dass keine Hindernisse den Betrieb des Hebe- und Rücklehnmechanismus behindern können (D). Unter keinen Umständen sollten Rücken- oder Fußstütze gegen eine Wand gestellt werden (E), da dies zu erheblichen Schäden führen kann, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Der Stuhl muss auf einem ebenen Boden aufgestellt werden.

Schieben Sie den Stuhl nicht nach vorne (F).

Ziehen Sie den Stuhl nicht seitlich an den Armlehnen (G).

Trennen Sie immer die Stromversorgung des Stuhls, wenn Sie ihn reinigen oder bewegen, oder wenn Kinder unbeaufsichtigt anwesend sind.

Der Stuhl ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern verwendet werden.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Stuhls in der Nähe von Kindern oder Haustieren.

Legen Sie die Rückenlehne (H) niemals zurück, während der Stuhl in einer angehobenen Position ist (I), da Verletzungsgefahr besteht.

Ziehen Sie das Kabel der Fernbedienung nicht mehr als nötig. Setzen Sie sich nicht auf die Fernbedienung und lassen Sie sie nicht zu Boden fallen. Lassen Sie Kinder die Fernbedienung nicht benutzen.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert und an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie es verwenden.

Modifizieren Sie das Produkt nicht, da dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen und die Garantie erlöschen lassen kann.

Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse unter dem Stuhl fest sitzen und nicht durch Hausreinigung, wie z.B. mit einem Besen oder Staubsauger, gelöst wurden.

Halten Sie den Stuhl von Licht- oder Wärmequellen fern.

3 Installation

Verdrahtete Stromversorgung
Um die Motoren zu aktivieren, stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Sobald die Verbindung zur Steckdose hergestellt ist, können Sie die Fernbedienung bedienen.

Einstellungen MOBIO Comfort Premium

- **A** Fußstütze anheben
- **B** Fußstütze senken + Aufstehhilfe
- **C** Rückenlehne neigen
- **D** Rückenlehne anheben
- **E** Aufstehhilfe
- **F** Unterstützung beim Hinsetzen + Fußstütze anheben

ⓘ Die Nackenstütze ist nach Bedarf manuell einstellbar.

Fehlerbehebung

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Der Stuhl funktioniert nicht	Keine Spannung	Überprüfen Sie, ob die Batterie mit dem/den Motor(en) verbunden ist und ob die Steckdose funktioniert
	Defekter Stuhl	Kontaktieren Sie den Kundendienst
Der Stuhl reagiert plötzlich nicht mehr, es erfolgt keine Bewegung	Der Überhitzungsschutz wurde ausgelöst	Lassen Sie den Stuhl 20 bis 30 Minuten ruhen und versuchen Sie es erneut
	Ein Kabel wurde getrennt	Überprüfen Sie, ob das Kabel der Fernbedienung angeschlossen ist
	Die Batteriesicherung könnte defekt sein	Kontaktieren Sie den Kundendienst

Bitte kontaktieren Sie Ihren Lieferanten für weitere Unterstützung, wenn alles oben Genannte überprüft wurde und der Stuhl immer noch nicht richtig funktioniert.

Aufbewahrung

Für eine langfristige Lagerung müssen Maßnahmen zum Schutz und Erhalt des Stuhls ergriffen werden:
Schützen Sie den Stuhl vor Sonnenlicht, um den natürlichen Prozess des Ausbleichens der Farbe zu verhindern, indem Sie den Stuhl abdecken.
Lagern Sie den Stuhl in trockenen und gut belüfteten Räumen.

Reinigung

Schützen Sie den Stuhl vor allen Lichtquellen (Sonne, Mond, Halogenlampen usw.), um das Risiko der Verfärbung zu vermeiden.

Verwenden Sie einen Staubsauger und wischen Sie den Stuhl regelmäßig ohne übermäßige Reibung ab, um die Polsterung nicht zu beschädigen. Der Staubsauger entfernt trockenen Staub, aber nicht fettigen Staub, der sich an der Polsterung festsetzen kann. Daher wird empfohlen, den Stuhl alle sechs Monate zu reinigen. Reinigen Sie die Teile, die in direktem Kontakt mit der Kopfhaut und den Händen stehen, mit Wasser und neutraler Seife. Vermeiden Sie Haushaltsreiniger oder Produkte, die Lösungsmittel oder Öle enthalten, die die Polsterung beschädigen können. Testen Sie immer an einer verdeckten Stelle des Stuhls.

Fetthaltige Materialien	Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um das Öl aufzusaugen und den Fleck zu entfernen. Wenn dies nicht ausreicht, tragen Sie eine kleine Menge Geschirrspülmittel auf und reiben Sie vorsichtig mit einem feuchten Tuch.
Kaffee, Tee und Bier	Reinigen Sie mit heißem Wasser. Wenn der Fleck bleibt, tupfen Sie ihn mit einer Seifenlösung ab.
Kaugummi	Legen Sie einen in Tuch gewickelten Eiswürfel auf das Kaugummi, um es abzukühlen. Kratzen Sie es dann sehr vorsichtig ab.
Kugelschreiber-Tinte	Befeuchten Sie ein Wattestäbchen mit etwas Essig und reiben Sie es über den Fleck.
Lebensmittelflecken und Blut	Entfernen Sie vorsichtig den oberflächlichen Teil und befeuchten Sie den Fleck mit etwas Wasser. Tupfen Sie dann mit einem in Seifenwasser getränkten Tuch.

Tipp: Bei hartnäckigen Flecken konsultieren Sie einen Fleckentfernungsspezialisten.

Inspektion / Wartung

Der Mechanismus sollte regelmäßig entstaubt und die Befestigungen bei Bedarf (mindestens einmal jährlich) überprüft und nachgezogen werden.
Während des Gebrauchs kann der Mechanismus leichtes Spiel aufweisen und kleinere Geräusche oder Knarrgeräusche sind im Betrieb nicht auszuschließen. In solchen Fällen wird empfohlen, eine geringe Menge Schmiermittel auf die Gelenke aufzutragen.
Einige Oberflächenbeschichtungen – insbesondere Kunstleder – können während des Betriebs quietschen. Zur Minderung dieser Effekte empfiehlt sich die Anwendung von Talkumpuder.

Material

	MOBIO Comfort Premium	
Sitz	Metallrahmen mit Metallfedern Hochwertiger Schaumstoff 34 kg/m³	Sitzmatratze aus Memory-Schaum 52 kg/m3, Dicke 2,5 cm
Rückenlehne	Metallstruktur Hochwertiger Schaumstoff 26 kg/m³ Manuell einstellbare Kopfstütze	Sitzmatratze aus Memory-Schaum 52 kg/m3, Dicke 2,5 cm
Fußstütze	Plattenstruktur Hochwertiger Schaumstoff 34 kg/m³	Sitzmatratze aus Memory-Schaum 52 kg/m3, Dicke 2,5 cm
Armlehne	Sperrholzstruktur Polyätherschaum 20 kg/m³	
Drehbarer Mehrpositions-Liftmechanismus, 3 Motoren, ZERO-GRAVITY Stawett (Made in Germany)		

Garantie

Für den MOBIO Comfort Premium besteht eine Garantie von 2 Jahren auf Material- und Herstellungsfehler.
Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr örtliches Fachgeschäft für Mobilität oder an Ihren Händler.
Die Garantie gilt nur bei sachgemäßer Verwendung gemäß den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch.

Garantieausschlüsse
Unbeabsichtigte Schäden, die während der Lieferung oder Installation des Produkts durch den Händler oder Benutzer verursacht wurden.

Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Stuhls verursacht wurden.

Optische Veränderungen durch normalen Gebrauch und Abnutzung des Produkts.

Produkte in außergewöhnlich schmutzigem Zustand und/oder mit unbeabsichtigten oder absichtlichen Schäden.

Unsachgemäße Behandlung: Sitzen auf der Fußstütze oder den Armlehnen, Betreten oder Verlassen des Stuhls ohne vorheriges Einziehen der Fußstütze, Bewegen des Produkts durch seitliches Ziehen an der Armlehne oder Rückenlehne, Blockieren der freien Bewegung der Elemente in der Rücken- oder Fußstütze, insbesondere gegen eine Wand oder Möbel.

Das Vorhandensein einer Markierung an irgendeinem Teil des Stuhls, die darauf hinweist, dass er gegen eine Wand gestellt wurde, insbesondere an der Rückenlehne, führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

Schäden an elektronischen Bauteilen, die durch Stromstöße oder Blitzschlag, schlechte elektrische Installation, Schneiden oder Reißen von elektrischen Kabeln, Brechen von Verbindungssteckern, unbeabsichtigtes Trennen von Motoren oder Fernbedienungen verursacht wurden.

Félicitations pour votre d'un nouveau fauteuil releveur et inclinable MOBIO

Nos fauteuils releveurs et fauteuils de repos ont été conçus en mettant l'accent sur votre confort. Ils offrent un soutien optimal pour le dos et les jambes grâce à leur assise ergonomique et à leur dossier et repose-pieds réglables. Les fauteuils releveurs et de repos MOBIO sont disponibles dans une large gamme de couleurs modernes et de rembourrages attrayants. Ils disposent de fonctions bien pensées qui augmentent le confort et la sécurité au quotidien. Veuillez vérifier votre produit immédiatement après réception de la marchandise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre magasin spécialisé dans la mobilité ou à votre revendeur. Si vous avez des difficultés à lire ce manuel d'utilisation, une version électronique est disponible sur **mobio.be**.

Utilisation prévue

Le modèle MOBIO Comfort Premium est destiné aux adultes valides, et le fauteuil ne doit pas être assimilé à un fauteuil roulant, un fauteuil médical ou un lit pour personnes handicapées. Le fauteuil est conçu pour un usage intérieur et ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois, dans la limite de poids de 160 kg. L'utilisateur doit être capable de faire fonctionner le produit sans assistance externe. La garantie est annulée si le produit est endommagé par un utilisateur ne respectant pas ces restrictions.

0 Les cercles numérotés en gris dans ce manuel d'utilisation se réfèrent au graphique d'information et aux illustrations numérotées à l'intérieur de la couverture.

1 Familiarisez-vous avec votre produit MOBIO

A Dossier
B Siège
C Télécommande
D Repose-pieds
E Accoudoirs
F Appui-tête

2 Sécurité ⚠

Ne montez jamais dans le fauteuil ni n'en descendez sans d'abord remettre le repose-pieds dans sa position d'origine (A). Le repose-pieds est conçu uniquement pour son usage prévu (B) et ne doit jamais être utilisé comme siège ou à des fins similaires (C), car le matériel du produit pourrait être endommagé.

Le fauteuil doit être positionné de manière à ce qu'aucun obstacle ne puisse entraver le fonctionnement du mécanisme de levage et d'inclinaison (D). En aucun cas, le dossier ou le repose-pieds ne doivent être placés contre un mur (E), en raison du risque de dommages importants non couverts par la garantie.

Le fauteuil doit être placé sur un sol plat.

Ne poussez pas le fauteuil vers l'avant (F).

Ne tirez pas le fauteuil latéralement par ses accoudoirs (G).

Prenez toujours la précaution de déconnecter l'alimentation du fauteuil lors du nettoyage ou du déplacement, ou en présence d'enfants non surveillés.

Le fauteuil n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants. Assurez-vous d'utiliser le fauteuil avec précaution en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

Ne jamais incliner le dossier (H) pendant que le fauteuil est en position relevée (I) en raison du risque de blessures.

Ne tirez pas le cordon de la télécommande plus que nécessaire. Ne vous asseyez pas sur la télécommande et ne la laissez pas tomber par terre. Ne laissez pas les enfants utiliser la télécommande.

Assurez-vous soigneusement que le produit est correctement installé et connecté à l'alimentation avant utilisation.

Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre votre sécurité et annuler la garantie.

Vérifiez que les connecteurs sous le fauteuil sont bien en place et non déconnectés en raison du nettoyage ménager, comme avec un balai ou un aspirateur.

Gardez le fauteuil à l'écart des sources de lumière ou de chaleur.

Art. No. User Manual: 105145 – Revision A, 2025-09

3 Installation

Alimentation filaire
Pour activer les moteurs, branchez-le dans la prise de courant. Une fois connecté à la prise, vous pouvez utiliser la télécommande.

4 Réglages MOBIO Comfort Premium

- **A** Relever le repose-pied
- **B** Abaisser le repose-pied + Relever le fauteuil
- **C** Incliner le dossier
- **D** Relever le dossier
- **E** Relever le fauteuil
- **F** Position assise + Relever le repose-pied

ⓘ L'appui-tête est réglable manuellement selon les besoins.

Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
La chaise ne fonctionne pas	Pas de tension	Vérifiez que la batterie est connectée au(x) moteur(s) et que la prise électrique fonctionne
	Chaise défectueuse	Contactez le service à la clientèle
La chaise ne répond plus soudainement, aucun mouvement n'a lieu	La protection contre la chaleur s'est déclenchée	Quittez la chaise pendant 20 à 30 minutes et réessayez
	Un câble a été débranché	Vérifiez que le cordon de la télécommande est connecté
	Le fusible de la batterie est peut-être en panne	Contactez le service à la clientèle

Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir une aide supplémentaire si tout ce qui précède a été vérifié et que le fauteuil ne fonctionne toujours pas correctement.

Stockage

Pour un stockage à long terme, des mesures doivent être prises pour protéger et préserver le fauteuil :
• Protégez le fauteuil de la lumière du soleil pour contrer le processus naturel de décoloration en recouvrant le fauteuil.
• Stockez le fauteuil dans des pièces sèches et bien ventilées.

Nettoyage

Protégez le fauteuil de toutes les sources de lumière directe (soleil, lune, lampes halogènes, etc.) pour éviter le risque de décoloration.

Utilisez un aspirateur et essuyez régulièrement le fauteuil sans friction excessive pour éviter d'endommager le rembourrage. L'aspirateur enlèvera la poussière sèche mais pas la poussière grasse qui peut adhérer au rembourrage. Il est donc recommandé de nettoyer le fauteuil tous les six mois. Nettoyez les parties en contact direct avec le cuir chevelu et les mains avec de l'eau et un savon neutre. Évitez les détergents ménagers ou les produits contenant des solvants ou des huiles qui peuvent endommager les garnitures. Testez toujours sur une partie cachée du fauteuil.

Matières grasses	Utilisez un chiffon sec pour absorber l'huile et enlever la tache. Si cela ne suffit pas, appliquez une petite quantité de savon à vaisselle et frottez doucement avec un chiffon humide.
Café, thé et bière	Nettoyer à l'eau chaude. Si la tache persiste, tamponnez-la avec une solution savonneuse.
Chewing-gum	Placez un glaçon enveloppé dans un tissu pour refroidir le chewing-gum. Grattez-le doucement.
Encre de stylo bille	Humidifiez un coton-tige avec un peu de vinaigre. Passez-le sur la tache.
Tache de nourriture et de sang	Enlevez soigneusement la partie superficielle. Humidifiez la tache avec de l'eau. Tamponnez avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse.

Astuce : Pour les taches tenaces, consultez un spécialiste du détachage.

Inspection / Entretien

Le mécanisme doit être régulièrement dépoussiéré et les fixations vérifiées et resserrées si nécessaire (au moins une fois par an).Pendant l'utilisation, le mécanisme peut présenter un léger jeu et de petits bruits ou grincements ne sont pas à exclure pendant le fonctionnement. Dans de tels cas, il est recommandé d'appliquer une petite quantité de lubrifiant sur les articulations.Certains revêtements de surface – en particulier le cuir synthétique – peuvent grincer pendant l'utilisation. Pour réduire ces effets, il est recommandé d'utiliser du talc.

Matériau

	MOBIO Comfort Premium	
Siège	Châssis métallique avec ressorts métalliques Mousse haute résilience (34 kg/m³)	Matelas en mousse à mémoire de forme (52 kg/m3)
Dossier	Structure métalique Mousse haute résilience (26 kg/m³) Têtière articulée manuelle	Matelas en mousse à mémoire de forme (52 kg/m3)
Repose-pied	Structure panneau Mousse haute résilience (34 kg/m³	Matelas en mousse à mémoire de forme (52 kg/m3)
Accoudoir	Structure bois multiplis Mousse polyéther (20 kg/m³)	
Mécanisme multipostions releveur, 3 moteurs, pivotante ZERO-GRAVITY Stawett allemande		

Garantie

Le MOBIO Comfort Premium est garanti 2 ans contre tout défaut de matériel et de fabrication.Veuillez vous adresser à votre magasin local spécialisé dans la mobilité ou à votre revendeur en cas de recours à la garantie.La garantie n'est valable que si le produit est utilisé correctement, conformément aux instructions du présent manuel d'utilisation.

Exclusions de Garantie

Dommages non intentionnels causés lors de la livraison ou de l'installation par le distributeur ou l'utilisateur.

Dommages causés par une mauvaise utilisation du fauteuil.

Changements d'apparence causés par l'utilisation normale et l'usure du produit.

Produits dans un état anormalement sale ou avec des dommages non intentionnels ou délibérés.

Les dommages résultant d'une utilisation interdite : s'asseoir sur le repose-pieds ou les accoudoirs, entrer ou sortir du fauteuil sans rabattre au préalable le repose-pieds, déplacer le produit en tirant latéralement sur l'accoudoir ou le dossier, gêner la libre circulation des éléments du dossier ou du repose-pieds, surtout contre un mur ou un meuble.

La présence d'une marque sur n'importe quelle partie de la chaise indiquant qu'elle a été placée contre un mur, notamment sur le dossier, annulera la garantie du produit.

Pour la partie électrique, les dommages causés par les surtensions ou la foudre, une mauvaise installation électrique, la coupure ou l'arrachement des fils électriques, la rupture des fiches de connexion, la déconnexion involontaire des moteurs ou des télécommandes.

The MOBIO Comfort Chairs are delivered by:

MOBIO BV

Hillarestraat 20, 9160 Lokeren, Belgium

(+32) 9 328 77 23
info@mobio.be
www.mobio.be

MOBIO Switzerland GmbH

Im Stetterfeld 2
5608 Stetten
SWITZERLAND
Tel: +41 (0) 44 940 36 50
switzerland@mobio.be
www.mobio.be

Distributor / dealer

Art. No. User Manual: 105145 – Revision A, 2025-09